




СтомИнструмент

КАТАЛОГ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ

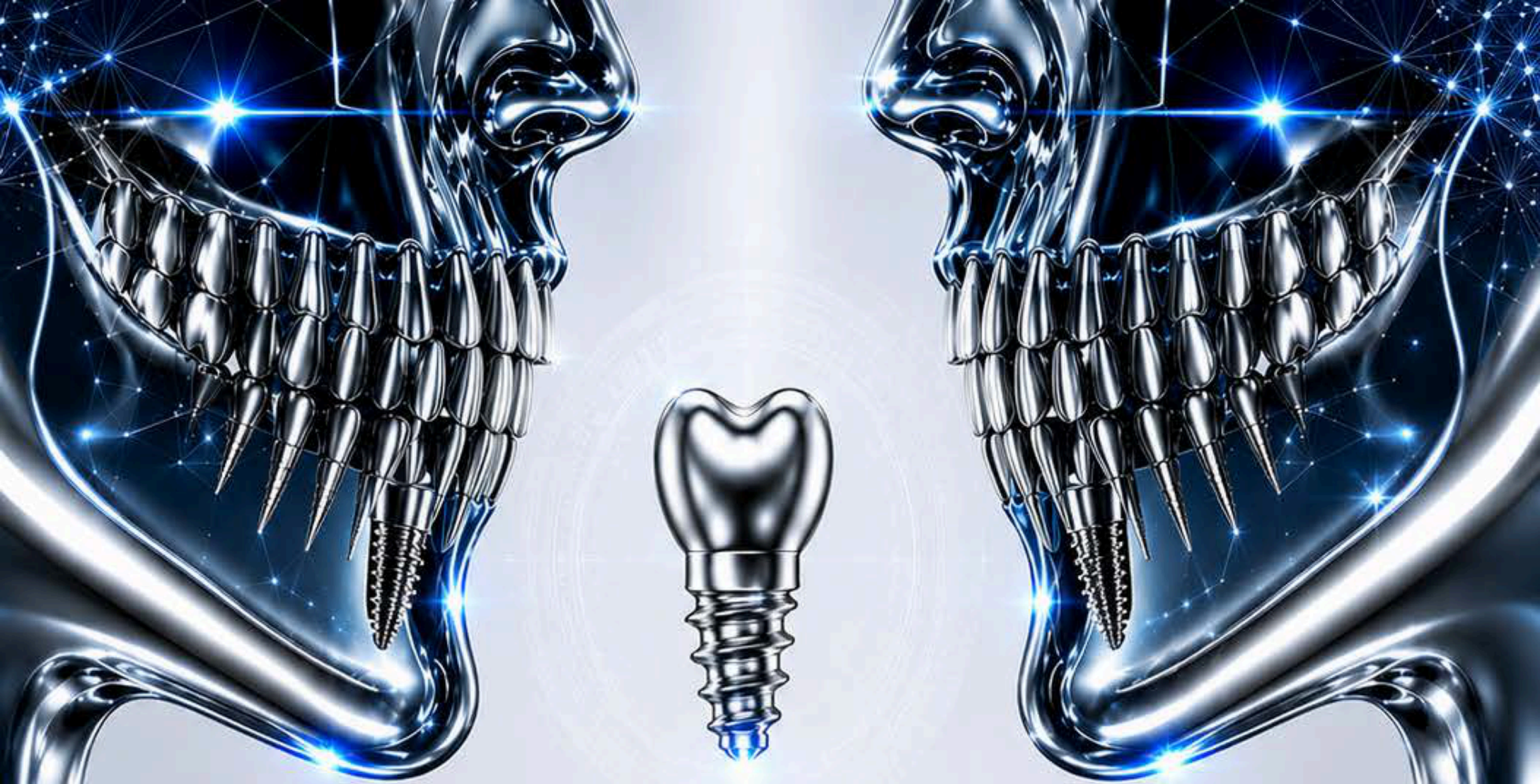

ПРЕМИАЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО



НАДЁЖНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

СОДЕРЖАНИЕ

• О компании "СтомИнструмент"	4
• Продукция "ORANGE" UNICORP INSTRUMENTS INC.	4
• Большой имплантологический набор	6
• Остеотомы и расширители	7
• Наборы и кюреты для синус лифтинга	8
• Периотомы, долото, молотки	11
• Костные мельницы и ступки	13
• PRF Инструменты	14
• Измерители и остеометры	15
• Ручки для скальпеля	16
• Костные шприцы и уплотнители	17
• Распаторы, кюретажные ложки, рашпили	19
• Аспираторы, слюноотсосы, костные ловушки	22
• Набор для растяжения надкостницы	23
• Скребки	24
• Иглодержатели	25
• Ножницы и микродержатели	31
• Пинцеты	35
• Ретракторы, ранорасширители	38
• Парадонтический набор и кюреты	41
• Щипцы, эмалевые ножи	42
• Элеваторы	51
• Люксаторы	59
• Боксы, кассеты для стерилизации	63
• Набор для безударной техники фиксации пинов	64
• Титановые мембраны	68
• Фрезы, боксы, трепаны	69
• Винты, ключи, отвертки	70
• Стоматологические материалы "Verident"	71
• Синтетические полимерные зубы "Verident"	72
• Остеопластические материалы и мембраны	74
• Ималантаты MeDENT Implants Systems	78
• Хирургические наборы MeDENT	80
• Инструкция по стерилизации	82

О КОМПАНИИ

Деятельность компании «СтомИнструмент» направлена на поставку высококачественной стоматологической продукции: расходных стоматологических материалов, хирургических инструментов, различных протетических систем и систем имплантации зарубежных производителей, по самым доступным ценам. За время своего существования компания зарекомендовала себя как надежный поставщик на российском рынке и с каждым годом все больше партнеров медицинских учреждений выбирает "СтомИнструмент" для постоянного сотрудничества на долгосрочной основе. Мы ценим каждого клиента и заботимся о каждом заказе.

ORANGE (TEXAS, USA) - производитель стоматологического и медицинского инструментария. Продукция компании **"UNICORP INSTRUMENTS INC. ORANGE"** - отвечает всем требованиям международных медицинских стандартов, что подтверждено сертификатами: ISO-13485:2003; 13485:2012; CE-2007/47EEC;FDA.

Американские инструменты «**ORANGE**» изготовлены из медицинской стали высшего качества (420), что обеспечивает превосходную производительность, долговечность, надежность и бескомпромиссное качество. Наши инструменты специально спроектированы и изготовлены с учетом строгих стандартов производства. Эргономичные конструкции обеспечивают максимальный комфорт и безопасность, как для врача, так и для пациента.

Сталь инструмента, обеспечивает высокую устойчивость к коррозии, термо и дезинфекционной обработке. Эргономическая форма инструмента и облегченный вес ручки, делают работу врача наиболее удобной.

Большой ассортимент, качество и надежность медицинского инструмента **"UNICORP INSTRUMENTS INC. ORANGE"** удовлетворяет требованиям самых взыскательных врачей.



В чем преимущество работы с нашей компанией?

- Мы учитываем главные потребности наших клиентов, поэтому принцип нашей работы заключается на профессионализме и индивидуальном подходе.
- Все предлагаемые нами товары, имеют сертификаты качества и лицензии.
- Возможность быстрой доставки по всей территории Российской Федерации.
- Наличие доступных цен и гибкой системы скидок. Товары с нашего сайта представлены в разных ценовых категориях, чтобы вы смогли подобрать для себя все, что искали, учитывая при этом ваши потребности и финансовые возможности.
- Большой ассортимент продукции. У нас представлена только самая лучшая продукция на исключительных условиях. Мы являемся импортерами от прямых производителей и считаем неприемлемым предлагать клиентам сходную по характеристикам, однако существенно отличающуюся по качеству продукцию. Исходя из этого, покупая у нас, можно быть уверенным, что приобретаемый товар является лучшим из всех, которые представляет стоматологический рынок.



БОЛЬШОЙ ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИЙ НАБОР

АРТ. 4952


Хирургический набор состоит из 21 инструмента и кассеты для стерилизации.

Состав набора: кюреты для синус-лифтинга - 5шт.; остеотом - 5шт.; костные расширители - 5шт.; набор долот градуированных - 4шт.; молоток 140 мм - 1шт.; костная ступка с крышкой - 1шт.




АРТ. 4751 НАБОР ВОГНУТЫХ ОСТЕОТОМ БАЙОНЕТ С КАССЕТой ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

- набор 5шт. с кассетой для стерилизации

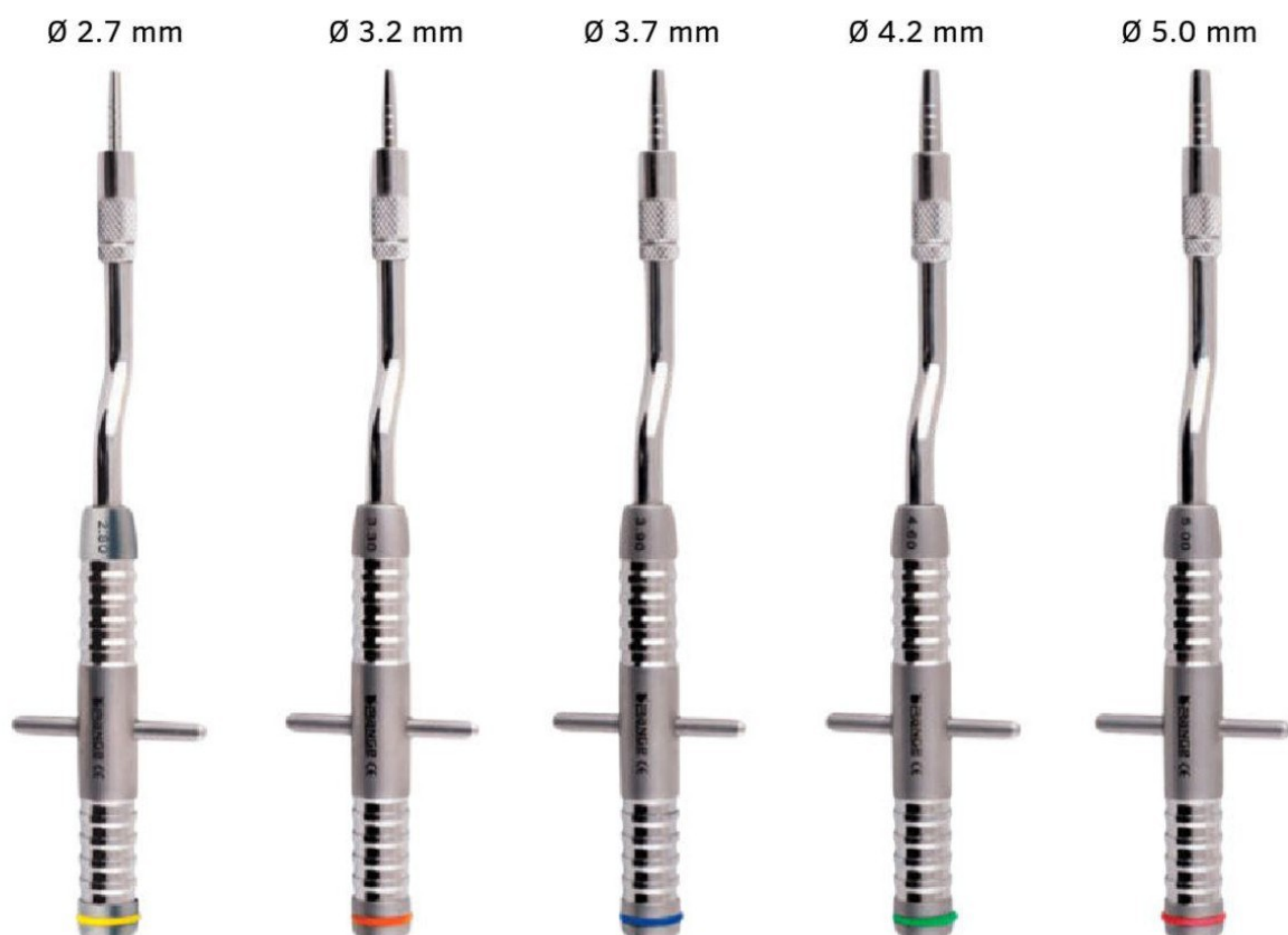

АРТ. 4771 НАБОР КОСТНЫХ РАСШИРИТЕЛЕЙ С КАССЕТой ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

- набор 5шт. с кассетой для стерилизации

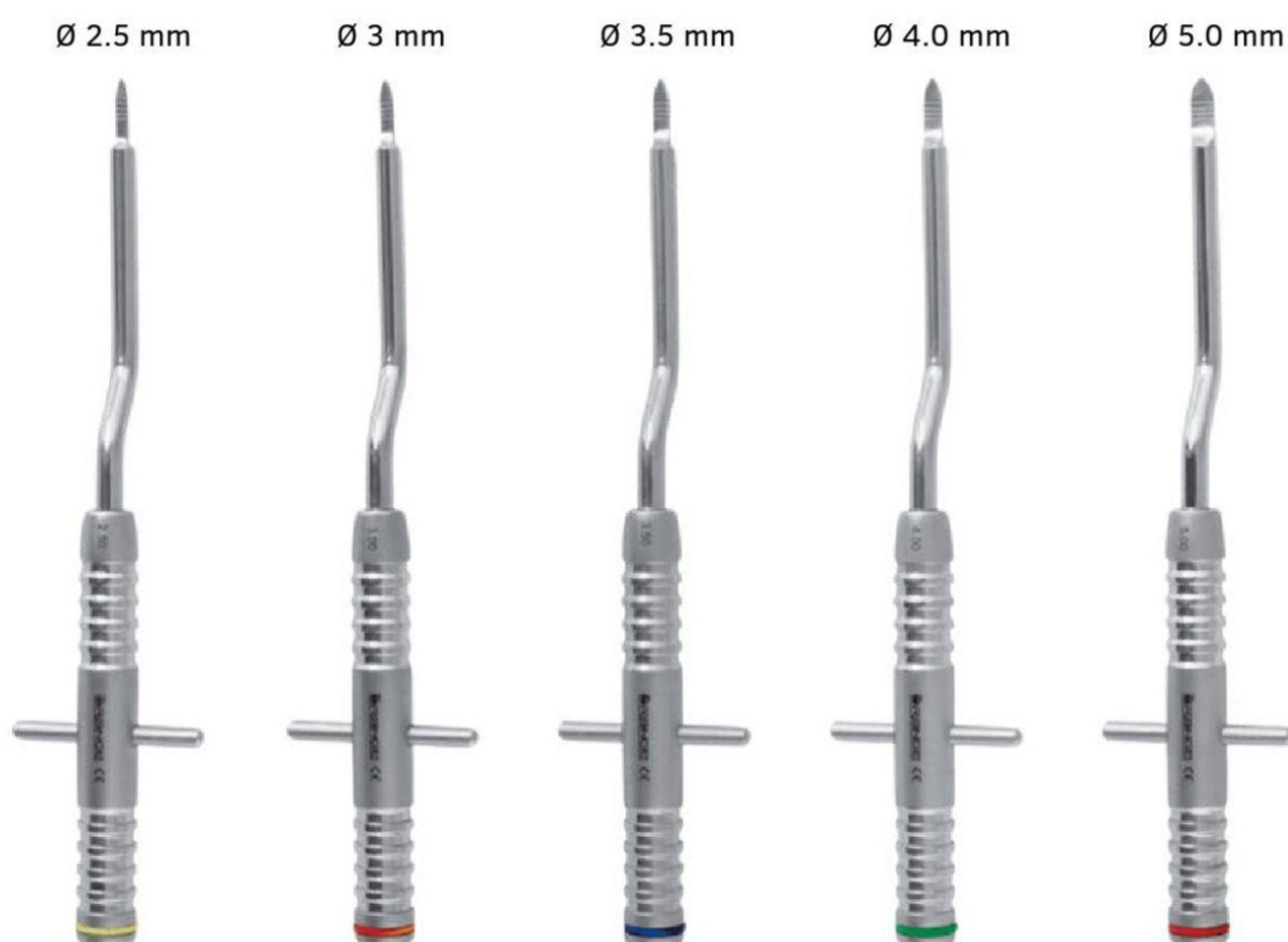


АРТ. 4969 НАБОР ДЛЯ СИНУС-ЛИФТИНГА "BLUE TITANIUM " С КАССЕТОЙ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

- набор кюрет 10 шт. с кассетой для стерилизации
- АРТ. 4971G - набор кюрет "GOLD TITANIUM"




АРТ. 4976 В НАБОР ДЛЯ СИНУС-ЛИФТИНГА "BLUE"


- арт. 4976 G - набор "GOLD"
- кассета 1 шт.; кюреты 6 шт.

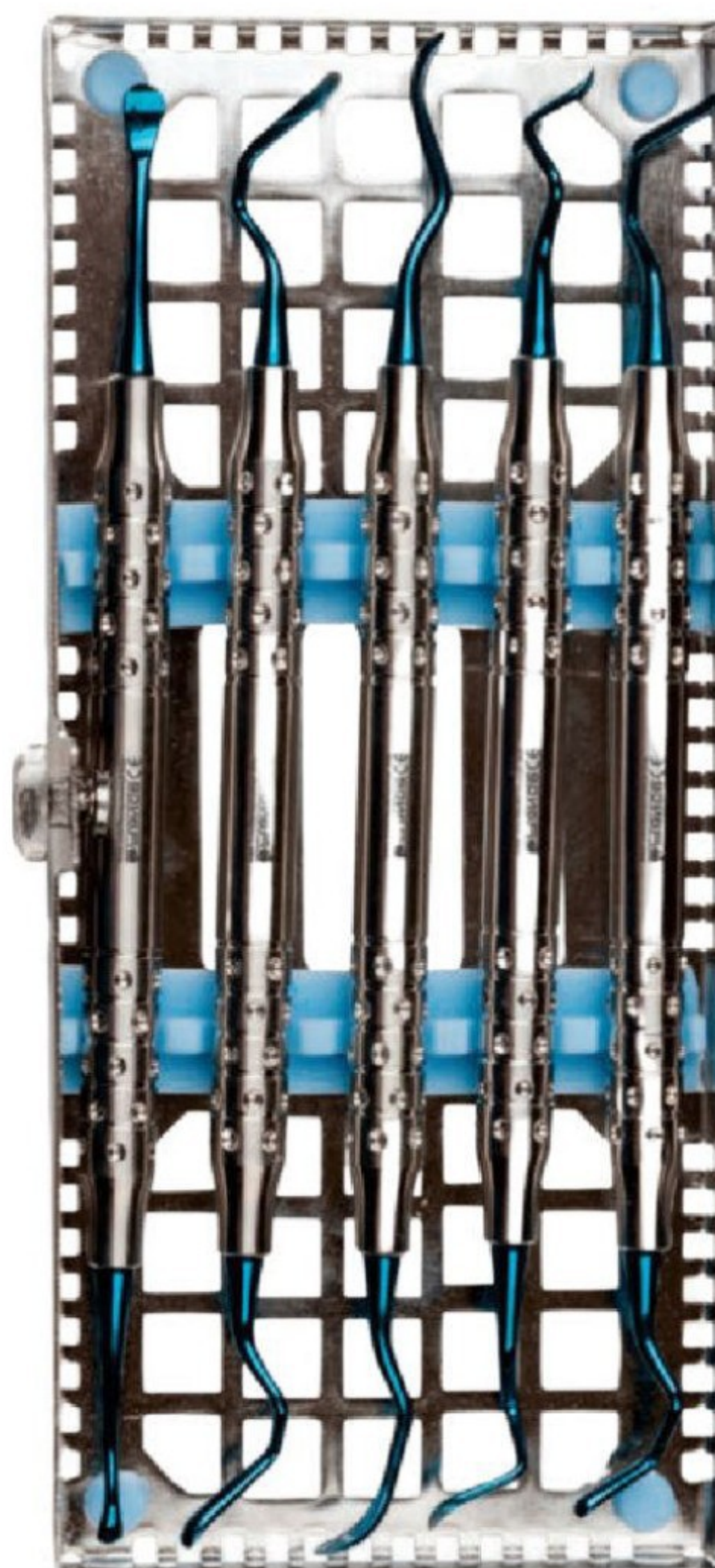

АПТ. 4971 КЮРЕТЫ ДЛЯ СИНУС ЛИФТИНГА "GOLD TITANIUM" В АССОРТИМЕНТЕ

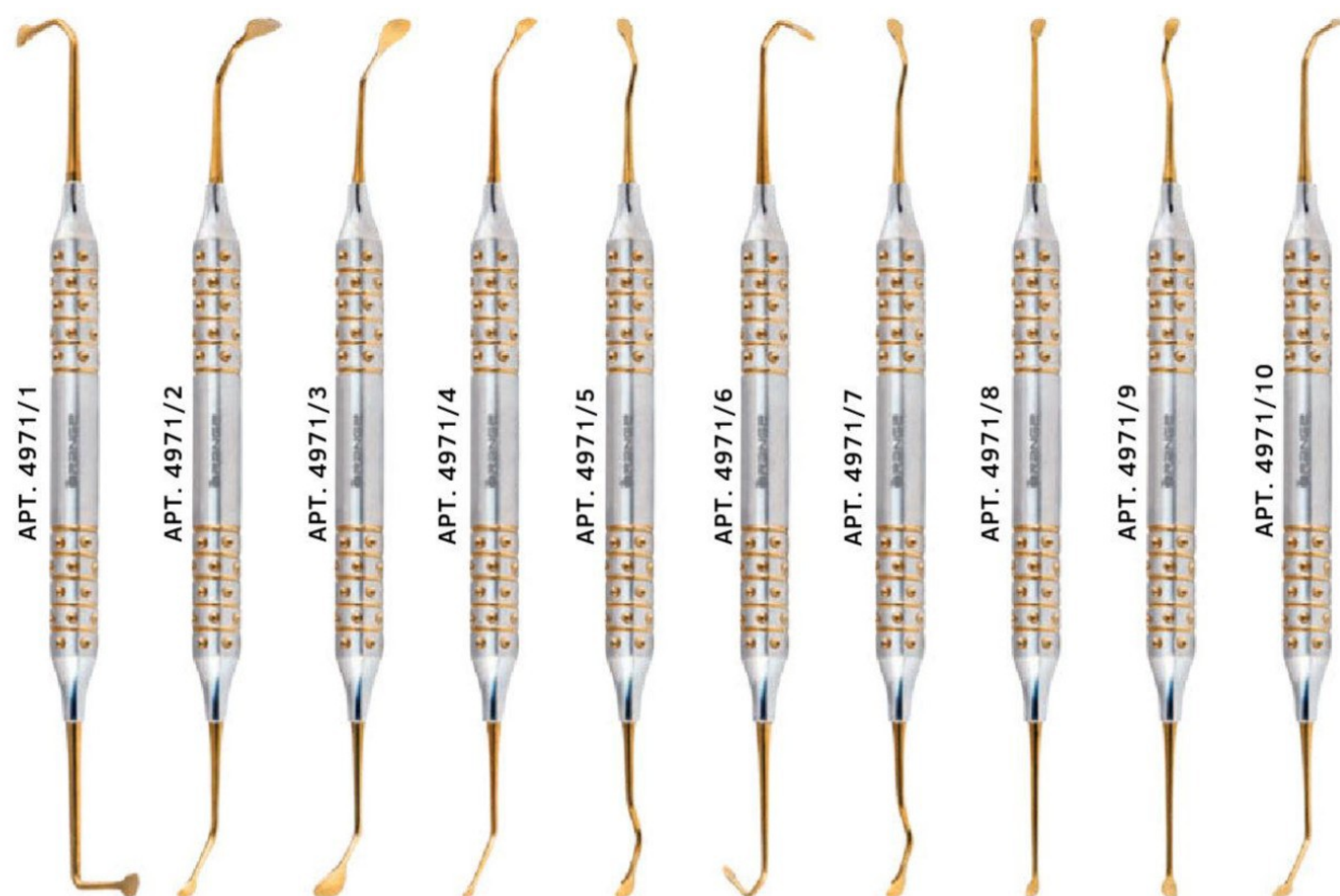

АПТ. 4969 КЮРЕТЫ ДЛЯ СИНУС ЛИФТИНГА "BLUE TITANIUM" В АССОРТИМЕНТЕ

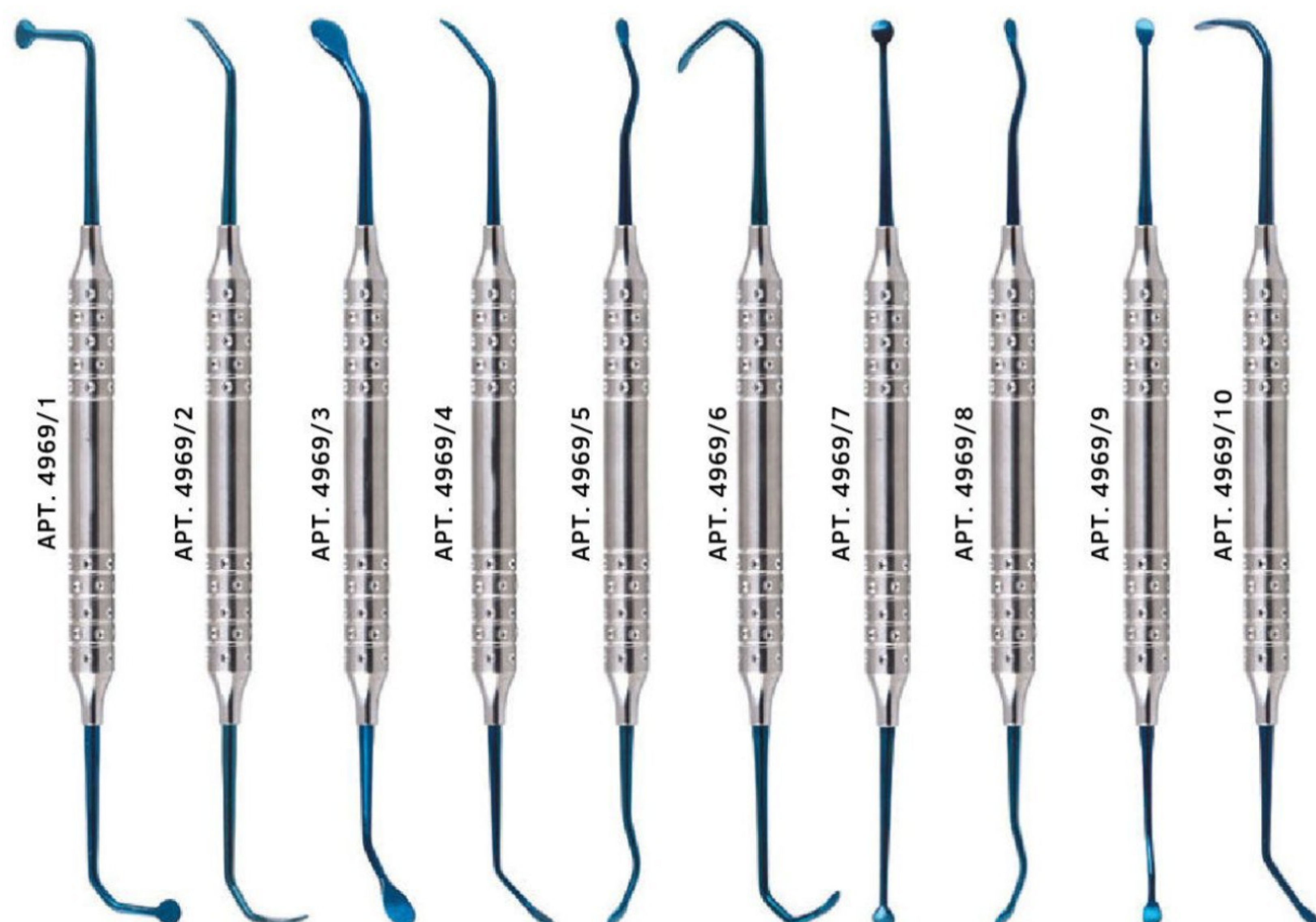


АРТ. 4975 НАБОР ДЛЯ СИНУС-ЛИФТИНГА

- кассета для стерилизации 1 шт.; кюреты 4 шт.
- грибовидная кюрета Арт. 4975/1




АРТ. 6915 НАБОР ДЛЯ ТУННЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В БОКСЕ

- кассета 1 шт.; кюреты в ассортименте 5 шт.

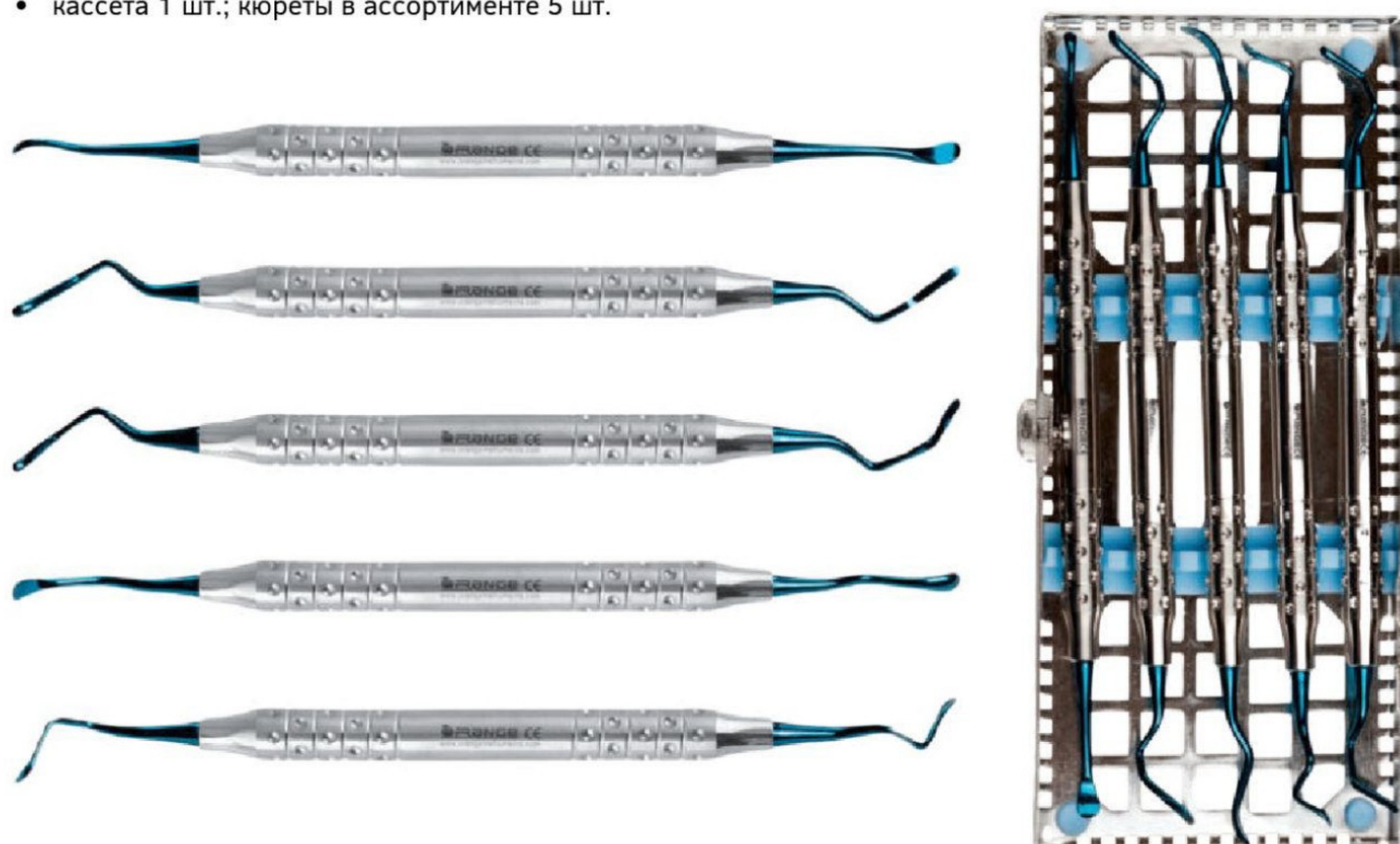

АРТ. 2250 НАБОР ГИБКИХ ПЕРИОТОМ

- кассета для стерилизации 1 шт.; периотом изогнутый 8 шт.; ручной винт 2 шт.

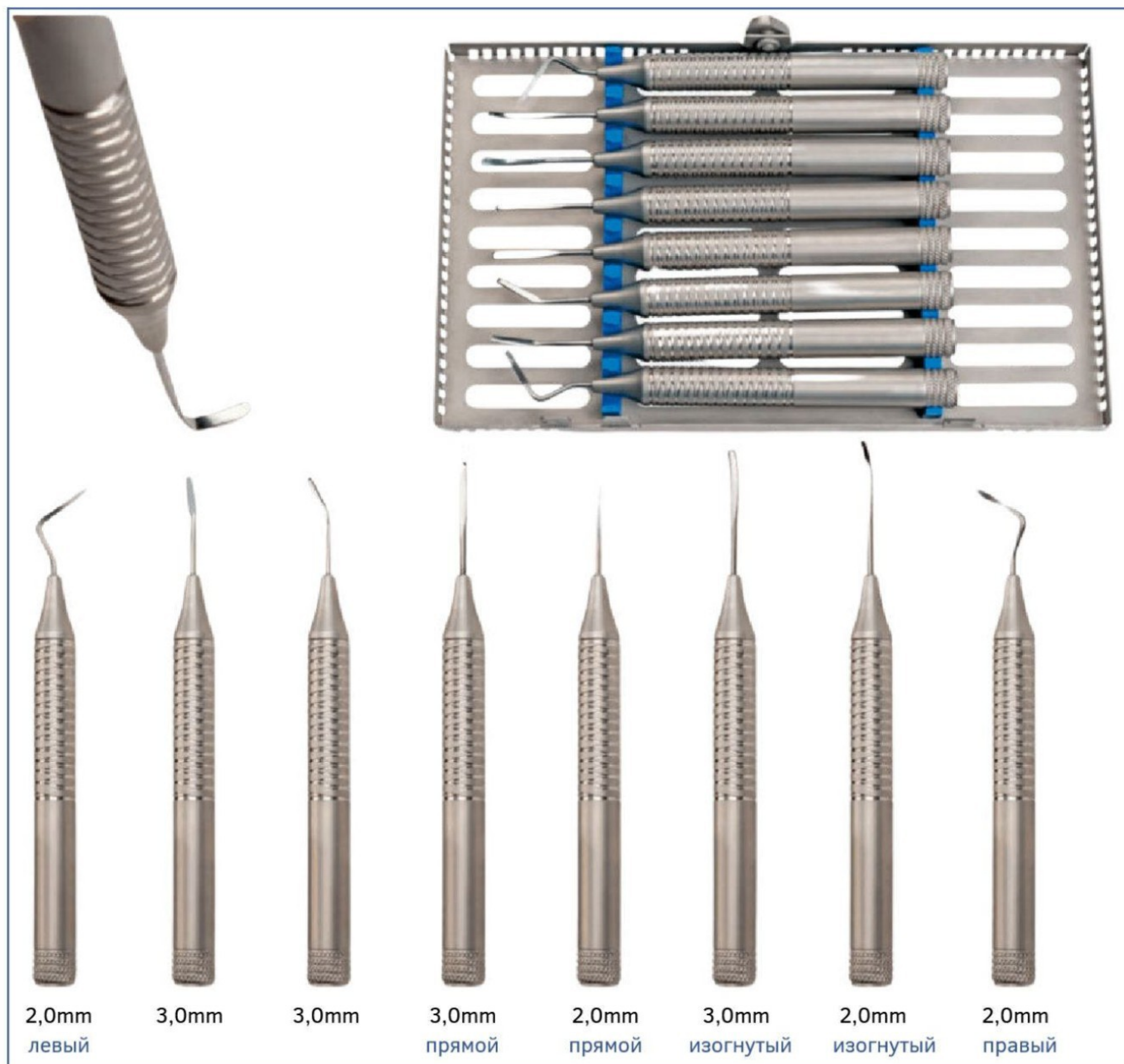

АРТ. 2891 НАБОР ПЕРИОТОМ С НАСАДКАМИ

- рукоядка - 1 шт.; насадки съемные периотом - 4 шт.



АРТ. 4901 НАБОР ДОЛОТО 4 ШТ.

- кассета для стерилизации 1 шт.; 140 mm молоток 1 шт.
- 4-6 mm долото прямое 2 шт.; 4-6 mm долото изогнутое 2 шт.



АРТ.4036
КОСТНАЯ МЕЛЬНИЦА С
ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ



АРТ.4037
КОСТНАЯ МЕЛЬНИЦА "GOLD" 43*29



АРТ. 4035 КОСТНАЯ МЕЛЬНИЦА



АРТ. 4012
КОСТНАЯ СТУПКА С
ПРЯМОЙ КРЫШКОЙ



АРТ.4038 КОСТНАЯ СТУПКА



АРТ. 4013
КОСТНАЯ ЧАШКА



АРТ. 4011
КОСТНАЯ СТУПКА С КРЫШКОЙ



PRF ИНСТРУМЕНТЫ



АРТ. 8144 ПИНЦЕТ "GIRAFFE" 15 CM

- для удобства извлечения сгустков из пробирок



АРТ. 9011 ЛОТОК PRF



АРТ. 8115 ПИНЦЕТ "SEMKEN"

- 150 mm, хирургический прямой



АРТ. 8042 НОЖНИЦЫ ЗУБЧАТЫЕ "GOLDMAN-FOX"

- 130 mm хирургические изогнутые



АРТ. 9026 ЛОТОК PRF



АРТ. 4476 ЛОЖКА ДЛЯ КОСТНОГО МАТЕРИАЛА

- для внесения костного материала в донорский участок



АРТ. 4471 КОСТНЫЙ ШТОПФЕР

- Арт. 4471 - 3-4 mm; Арт. 4472 - 6-8 mm



АРТ. 4458 PRF ШПАТЕЛЬ

- для внесения сгустков и мембран на операционное поле



АРТ. 9050
ШТАТИВ ДЛЯ ПРОБИРОК



АРТ. 9851 PRF BOX

ИЗМЕРИТЕЛИ И ОСТЕОМЕТРЫ



АПТ. 4064 / АПТ. 4063 - ПРЯМОЙ
ОСТЕОМЕТР CASTROVIEJO LARGE ANG 18cm 0-40mm



АПТ. 4466
ОСТЕОМЕТР CASTROVIEJO BONE CALIPER CVD



АПТ. 4067
ОСТЕОМЕТР RIDGE MAPPING CALIPER 0-25mm



АПТ. 4068
ОСТЕОМЕТР CASTROVIEJO BONE CALIPER 0-40mm



АПТ. 4062 / АПТ. 4061 ПРЯМОЙ
ПРЯМОЙ ОСТЕОМЕТР 9cm CASTROVIEJO GAUGE SMALL STR



АПТ. 4065
ИЗМЕРИТЕЛЬ ИНТЕРВАЛА ДЛИНЫ ИМПЛАНТАТА 0-80mm

РУЧКИ ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ



АРТ. 8001

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОВОРОТНАЯ РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ 160mm №3



АРТ. 8003

РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ С ЛИНЕЙКОЙ 125 mm №3



АРТ. 8005

КРУГЛАЯ РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ 145mm №3

- арт.8006 - 145mm угловой



АРТ. 8007

ДВУСТОРОННЯЯ КРУГЛАЯ РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ 145mm №3 и №4



АРТ. 8008

РУЧКА С ДВОЙНЫМ ЛЕЗВИЕМ 145mm прямой №3



АРТ. 8024





РУЧКА С ДВОЙНЫМ ЛЕЗВИЕМ 145mm №3



АРТ. 8009

ОБЛЕГЧЕННАЯ РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ 145mm изогнутый №3

КОСТНЫЕ ШПРИЦЫ 160 mm

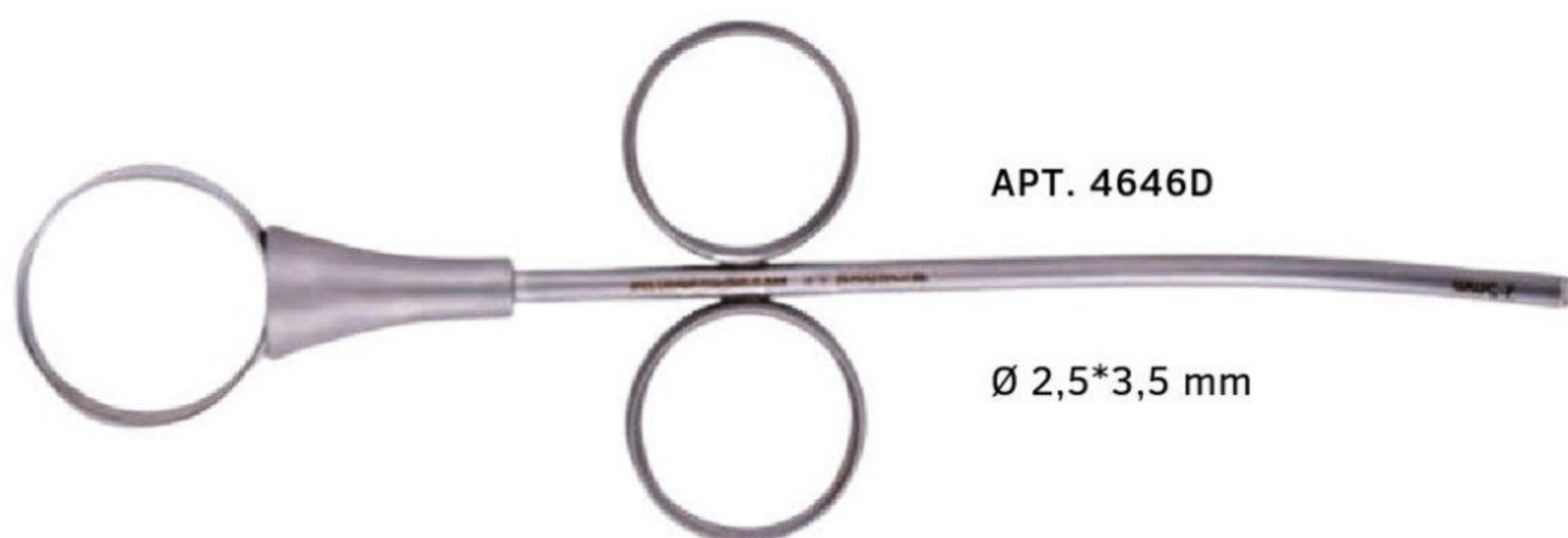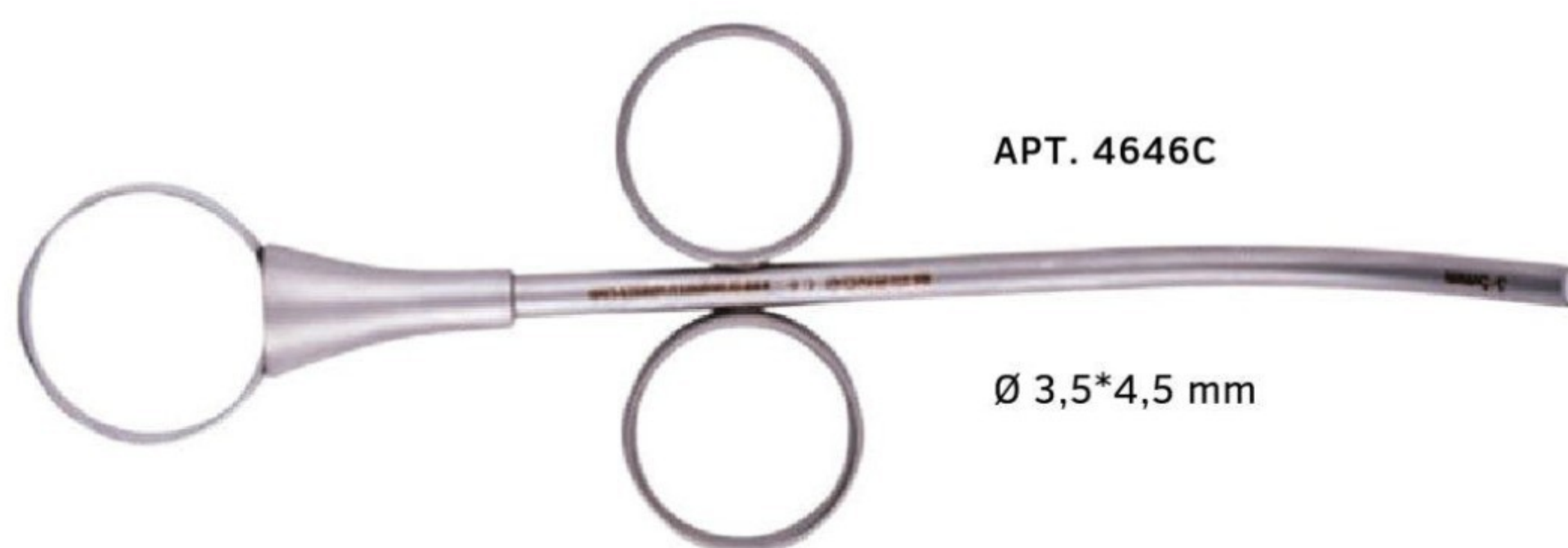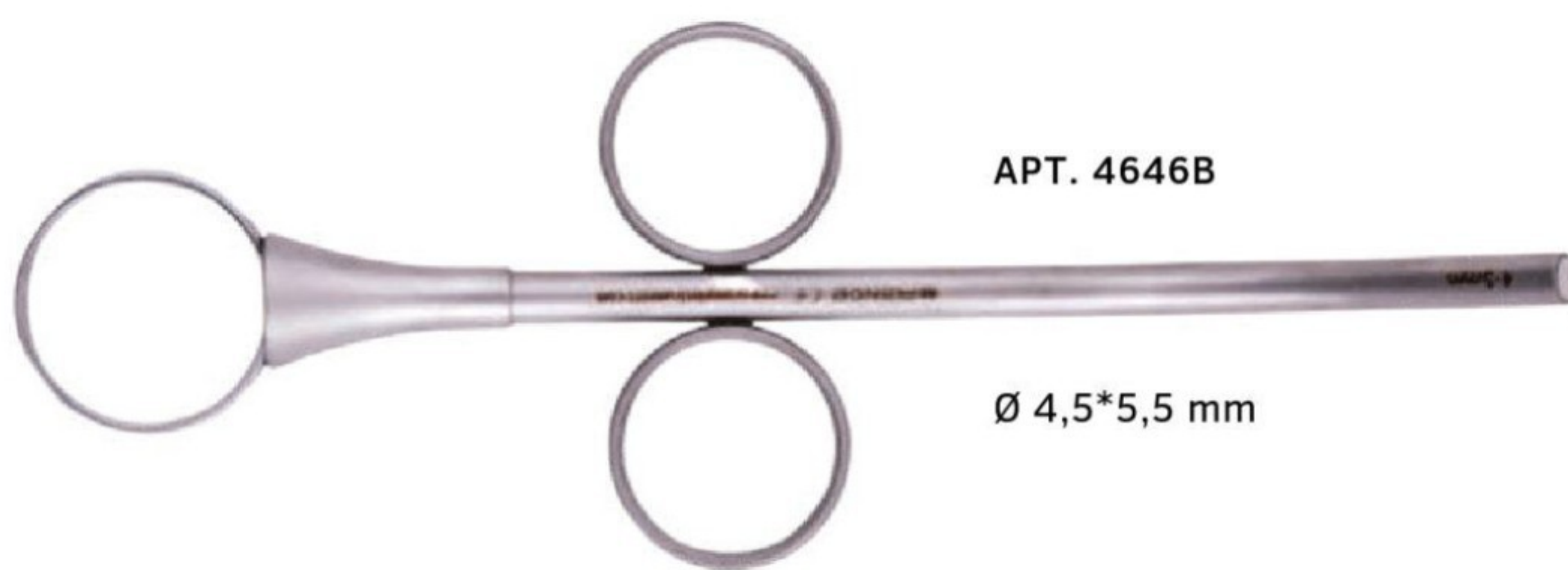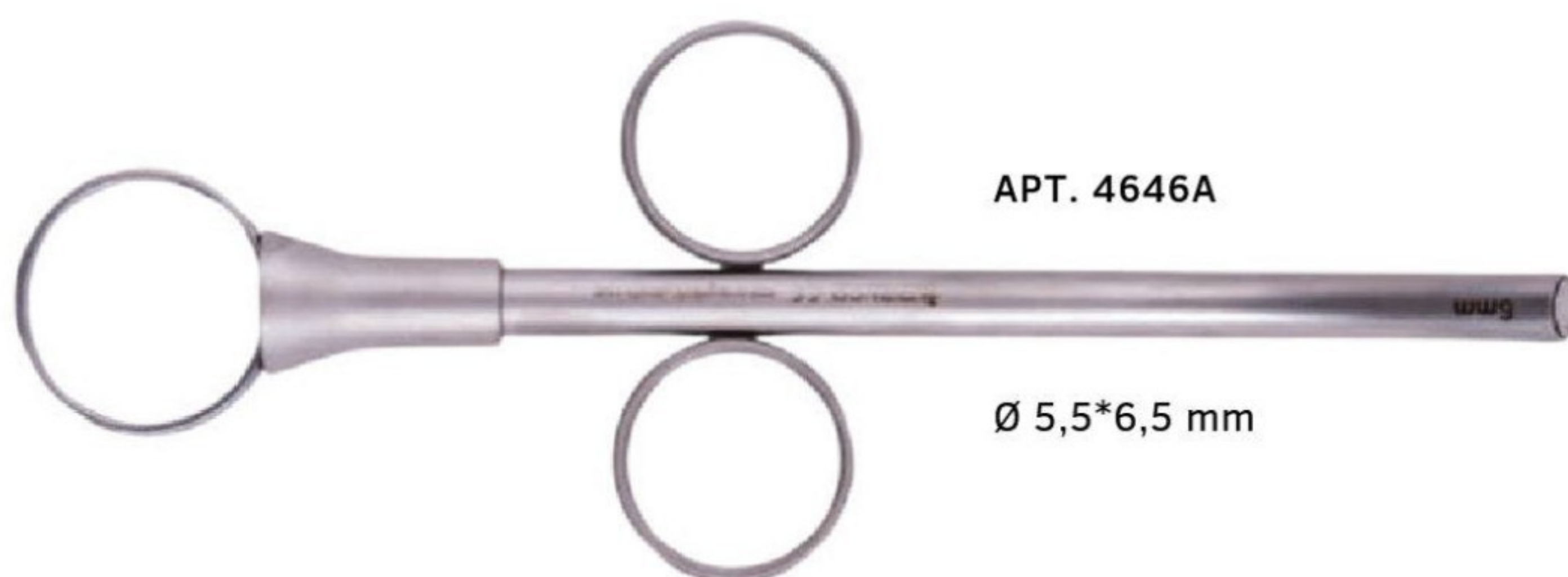



АРТ. 4471 КОСТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 3-4mm



АРТ. 4472 КОСТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 6-8mm



АРТ. 4473 КОСТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ "Blue Titanium"

Ø 8 mm / Ø 11 mm / Ø 13 mm / Ø 15 mm / Ø 18 mm



АРТ. 4474 ЛОЖКА УПЛОТНИТЕЛЬ



АРТ. 4475 КОСТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ-ЛОЖКА "Blue Titanium"

Ø 2 mm / Ø 4 mm / Ø 6 mm / Ø 8 mm / Ø 10 mm



АРТ. 4476 ЛОЖКА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ КОСТНОГО МАТЕРИАЛА
"Blue Titanium"



APT. 4161 Распатор "Seldin"



APT. 4162 Распатор "Buser" 4-4.5mm



APT. 4163 Распатор "P24G" 4-5mm



APT. 4164 Распатор "MOLT" 5-8mm



APT. 4165 Распатор "Prichard" 4.5-10.5mm



APT. 4166 Распатор "Goldman Fox"



АПТ. 4091/1 ЛОЖКА КЮРЮТАЖНАЯ "LUCAS" 2.5 mm



АПТ. 4091S ЛОЖКА ЗУБЧАТАЯ КЮРЮТАЖНАЯ "LUCAS" 2.5 mm



АПТ. 4091/2 ЛОЖКА КЮРЮТАЖНАЯ "LUCAS" 3.0 mm




АПТ. 4092S ЛОЖКА ЗУБЧАТАЯ КЮРЮТАЖНАЯ "LUCAS" 3.0 mm




АПТ. 4091/3 ЛОЖКА КЮРЮТАЖНАЯ "LUCAS" 3.5 mm



АПТ. 4093S ЛОЖКА ЗУБЧАТАЯ КЮРЮТАЖНАЯ "LUCAS" 3.5 mm

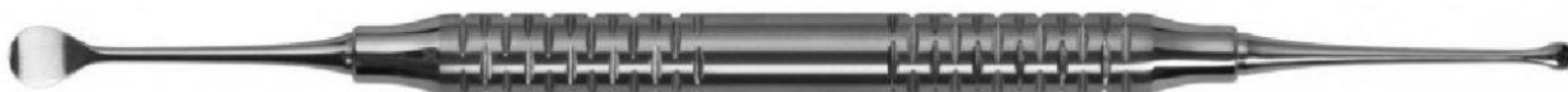


АРТ. 4094/1 ЛОЖКА КЮРЮТАЖНАЯ "MOLT" КРУГЛАЯ 3.5-7 mm

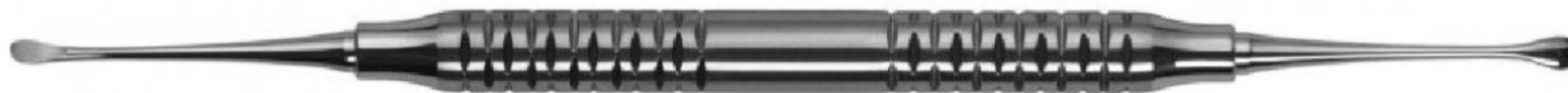

АРТ. 4094/2 ЛОЖКА КЮРЮТАЖНАЯ "MOLT" ОВАЛЬНАЯ 3-4 mm



АРТ. 4094/3 ЛОЖКА КЮРЮТАЖНАЯ "MOLT" КРУГЛАЯ 3-4 mm

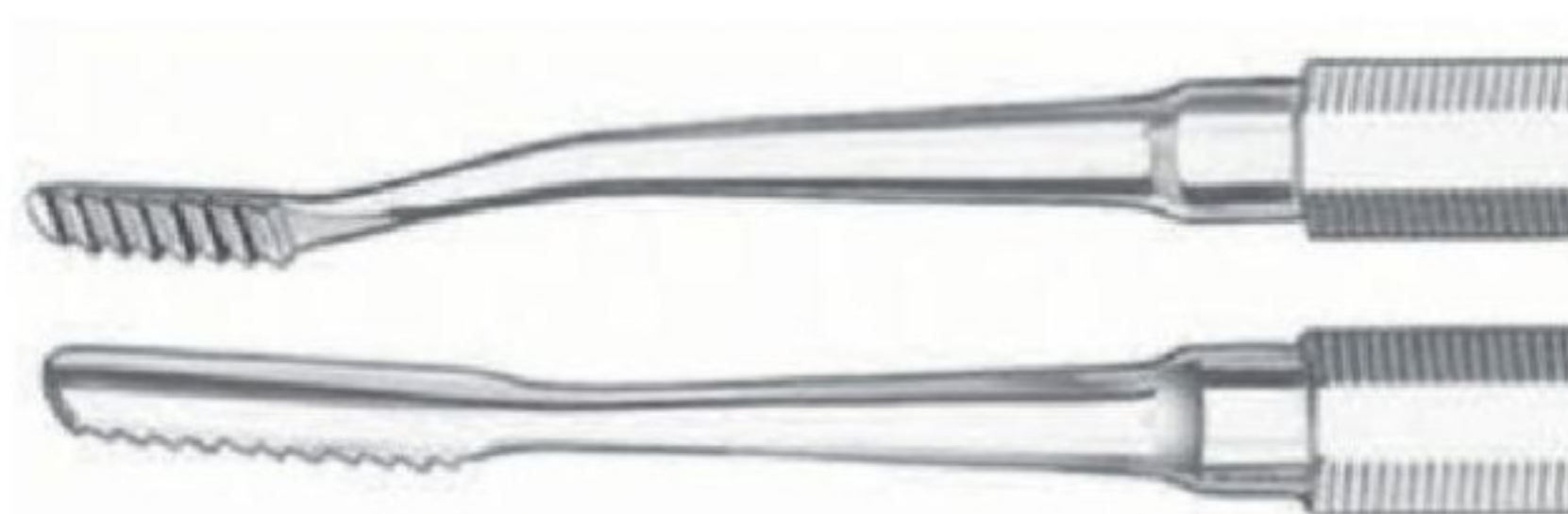

АРТ. 4194 КОСТНЫЙ РАШПИЛЬ

АРТ. 4193 КОСТНЫЙ РАШПИЛЬ



АРТ. 4192 КОСТНЫЙ РАШПИЛЬ


АРТ. 4191 КОСТНЫЙ РАШПИЛЬ



АРТ. 4651 АСПИРАТОР ХИРУРГИЧЕСКИЙ Ø 3,5mm



АРТ. 4652 АСПИРАТОР ХИРУРГИЧЕСКИЙ Ø 3mm

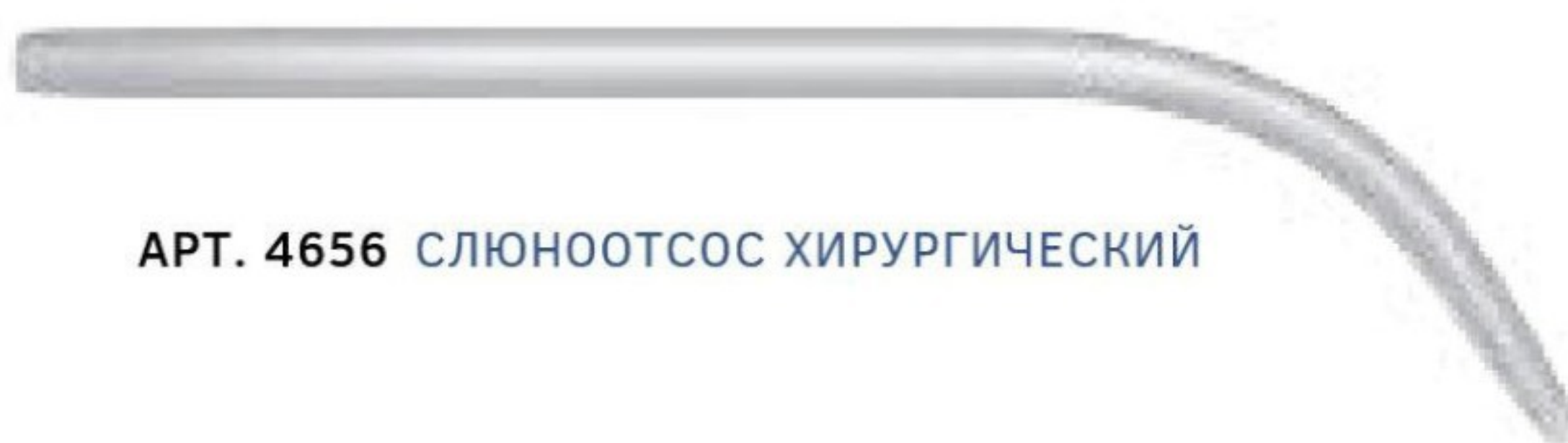

АРТ. 4656 СЛЮНООТСОС ХИРУРГИЧЕСКИЙ



АРТ. 4654А
КОСТНАЯ ЛОВУШКА СО СТАЛЬНЫМ ФИЛЬТРОМ

АРТ. 4654В
КОСТНАЯ ЛОВУШКА С СИЛИКОНОВЫМ ФИЛЬТРОМ




АРТ. 4921 НАБОР ДЛЯ РАСТЯЖЕНИЯ НАДКОСТНИЦЫ "SOFT BRUSHING KIT"



ОДНОРАЗОВЫЙ КОСТНЫЙ СКРЕБОК "EASY BONE SCRAPER"



EASY BONE SCRAPER - Передняя часть согнута так, чтобы боковой доступ к полости рта был легким. Лезвие используется при повороте на 90°, а также при повороте на 360°. Поскольку продукт прозрачен, вы можете в реальном времени увидеть количество взятой аутогенной кости. Вместе с Easy Bone Scraper, вы получаете: атравматичный забор без повреждения донорской области, гарантированный доступ к удаленным донорским зонам, нулевую потерю аутокости при заборе, экономическую выгоду (поворотное лезвие + возможность автоклавировать).

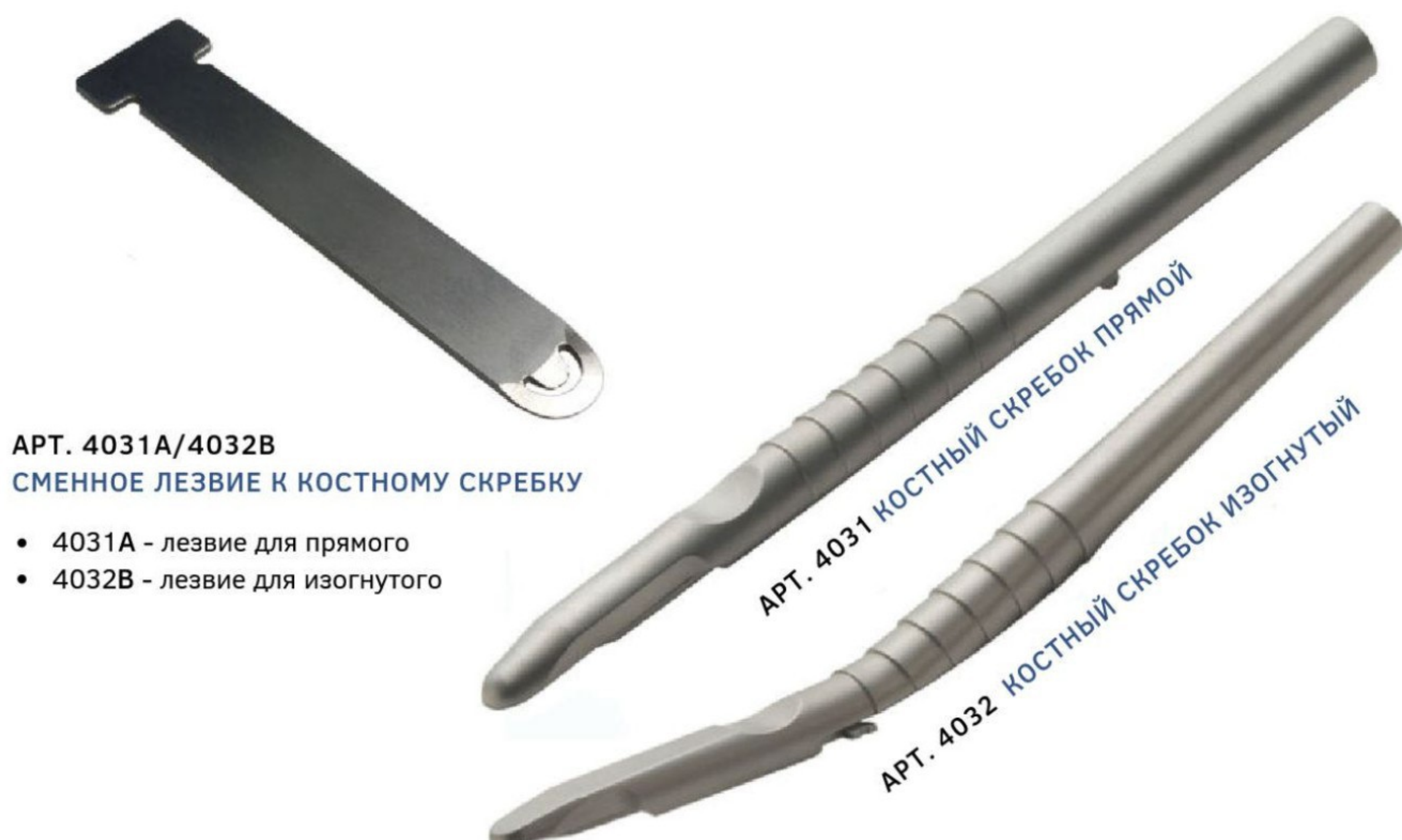



АРТ. 8201 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ CASTROVIEJO С ПЛОСКОЙ РУЧКОЙ 180ММ

- Арт. 8203 - прямой 140 mm (для игл №5; №6; №7)



АРТ. 8202 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗОГНУТЫЙ CASTROVIEJO С ПЛОСКОЙ РУЧКОЙ 180 ММ

- Арт. 8204 - изогнутый 140 mm (для игл №5; №6; №7)



АРТ. 8215 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ CASTROVIEJO MICRO 140 MM

- Арт. 8216 - изогнутый 140 mm (для игл №5; №6; №7)



АРТ. 8213 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ CASTROVIEJO MICRO 180 MM

- Арт. 8214 - изогнутый 180 mm (для игл №5; №6; №7)



АРТ. 8205 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ CASTROVIEJO С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ 180 ММ для игл №5; №6; №7



АРТ. 8206 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗОГНУТЫЙ CASTROVIEJO С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ 180 ММ для игл №5; №6; №7



АРТ. 8207 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ CASTROVIEJO С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ для игл №5; №6; №7



АРТ. 8208 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗОГНУТЫЙ CASTROVIEJO С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ для игл №5; №6; №7

АРТ. 8210 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗОГНУТЫЙ CASTROVIEJO С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ 180 ММ

- Арт. 8209 - прямой 180 mm (для игл №5; №6; №7)



АРТ. 8291 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ, С НОЖНИЦАМИ CASTROVIEJO 180ММ (для игл №5; №6; №7)

- Арт. 8292 - 140 mm (для игл №5; №6; №7)



АРТ. 8395 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ, CASTROVIEJO MICRO 180ММ


- Арт. 8396 - изогнутый 180 mm (для игл №5; №6; №7)




АРТ. 8230 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ "CRILE-WOOD" 150 MM



АРТ. 8231 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ "RYDER" 150 MM

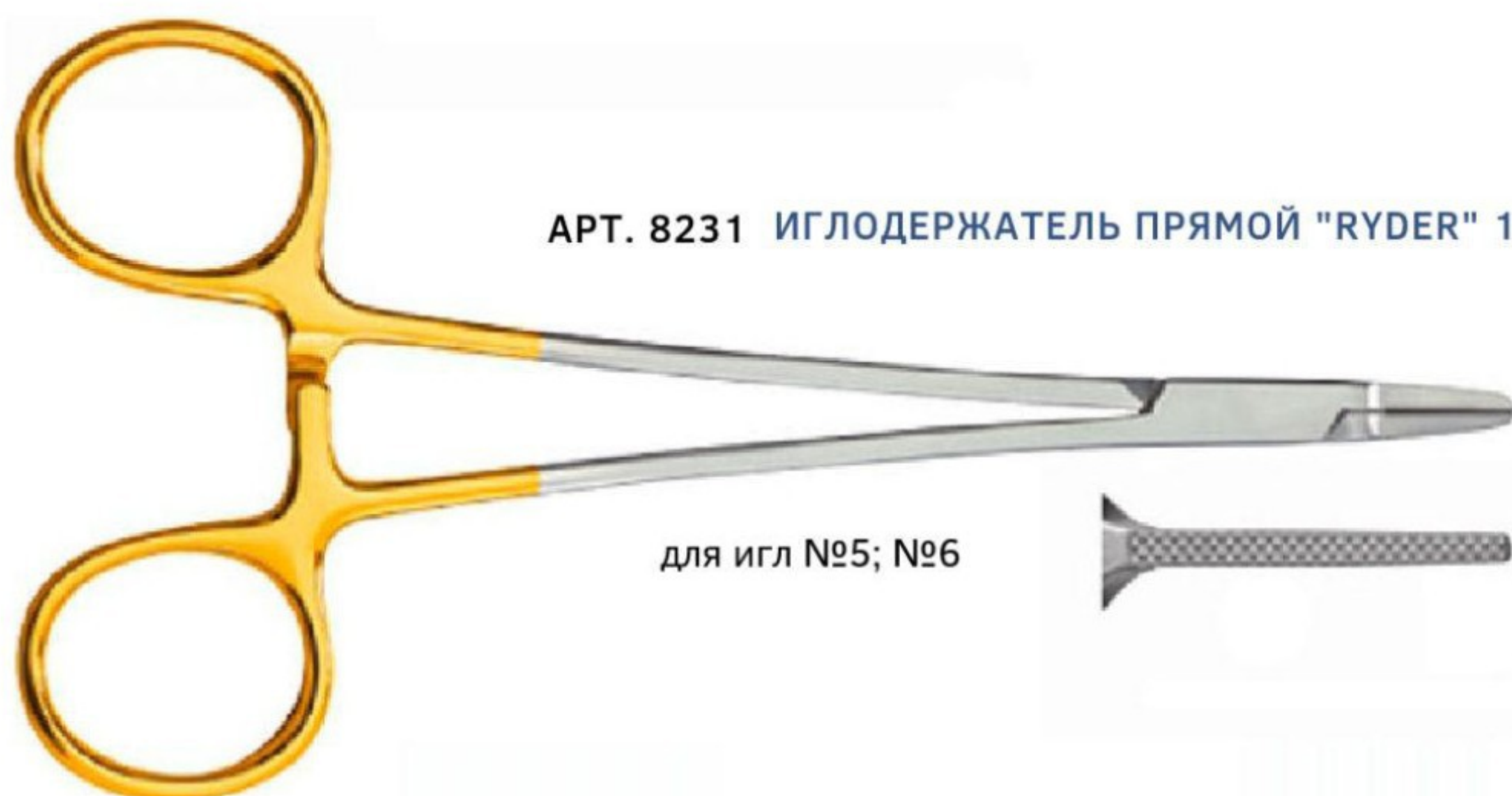

АРТ. 8232 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ "DALICATE" 150 MM

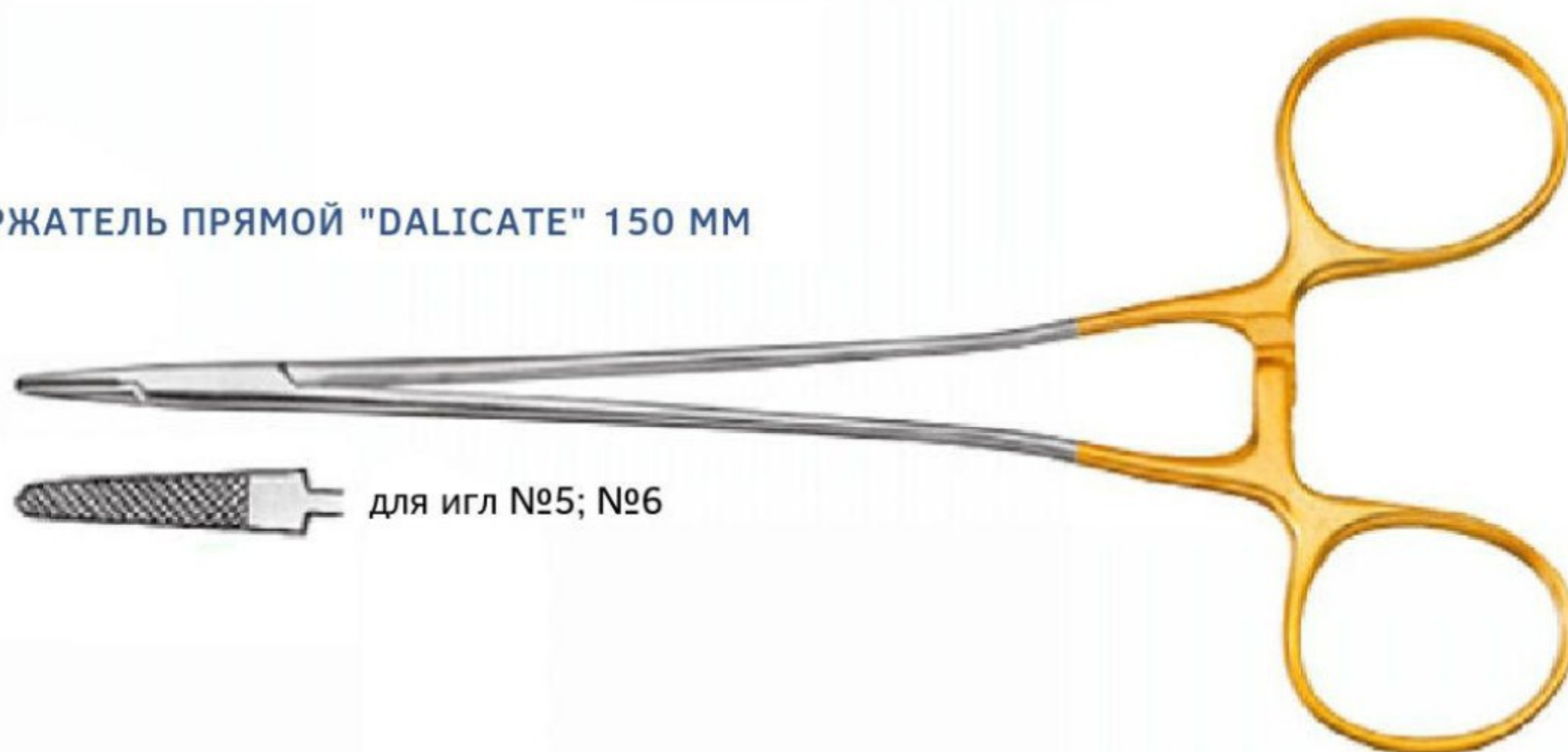

для игл №3; №4; №5; №6

АРТ. 8234 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ "MAYO-HEGAR" 150 MM



АРТ. 8251 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ "MATHIEU" 140 ММ для игл №3; №4; №5; №6

- Арт. 8252 - 170 mm для игл №3; №4; №5; №6



АРТ. 8253 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ "MATHIEU" С ПОЗОЛОЧЕННОЙ РУЧКОЙ 140ММ
для игл №3; №4; №5; №6

- Арт. 8254 - 170 mm для игл №3; №4; №5; №6



АРТ. 8255 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ "MATHIEU-OLSEN" С ПОЗОЛОЧЕННОЙ РУЧКОЙ 140ММ
для игл №3; №4; №5; №6



АРТ. 8256 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ "LICHTENBERG" 170 ММ для игл №3; №4; №5



АРТ. 8257 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ "HOSEL" 200 ММ для игл №3; №4; №5; №6



АРТ. 8258 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ "LANGENBECK" 180 ММ для игл №3; №4; №5; №6



АРТ. 8026 УТОНЧЕННЫЕ С НАСЕЧКАМИ ПРЯМЫЕ "IRIS" 120 ММ

- Карбит-вольфрамовые вставки



АРТ. 8027 УТОНЧЕННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ С НАСЕЧКАМИ "IRIS" 120 ММ

- Карбит-вольфрамовые вставки



АРТ. 8028 УТОНЧЕННЫЕ УГЛОВЫЕ С НАСЕЧКАМИ "IRIS" 120 ММ

- Карбит-вольфрамовые вставки



АРТ. 8030 ДВОЙНОЙ ИЗГИБ "LA - GRANDE" 120 ММ С НАСЕЧКАМИ

- Арт. 8029 - прямые 160 мм
- Карбит-вольфрамовые вставки



АРТ. 8031 ПРЯМЫЕ, УДЛИНЕННАЯ РУЧКА, С НАСЕЧКАМИ "KELLY" 160 ММ

- Арт. 8032 - изогнутые 160 mm
- Карбит-вольфрамовые вставки



АРТ. 8035 УГЛОВЫЕ С НАСЕЧКАМИ, УДЛИНЕННАЯ РУЧКА, "DEAN" 170 ММ

- Карбит-вольфрамовые вставки



АРТ. 8033 УДЛИНЕННАЯ ИЗОГНУТАЯ РУЧКА, С НАСЕЧКАМИ "LOCKLIN" 160 ММ

- Арт. 8034 - изогнутые 160 mm
- Карбит-вольфрамовые вставки



АРТ. 8041 ПРЯМЫЕ С НАСЕЧКАМИ "GOLDMAN-FOX" 130 ММ

- Арт. 8042 - изогнутые 130 mm
- Карбит-вольфрамовые вставки




АРТ. 8063 МИКРО ДЕСНЕВЫЕ НОЖНИЦЫ ПРЯМЫЕ 110 ММ "NOYES"



АРТ. 8064 МИКРО НОЖНИЦЫ ДЕСНЕВЫЕ ИЗОГНУТЫЕ 110 ММ "NOYES"



АРТ. 8065 МИКРО НОЖНИЦЫ ДЕСНЕВЫЕ УГЛОВЫЕ 110 ММ "NOYES"

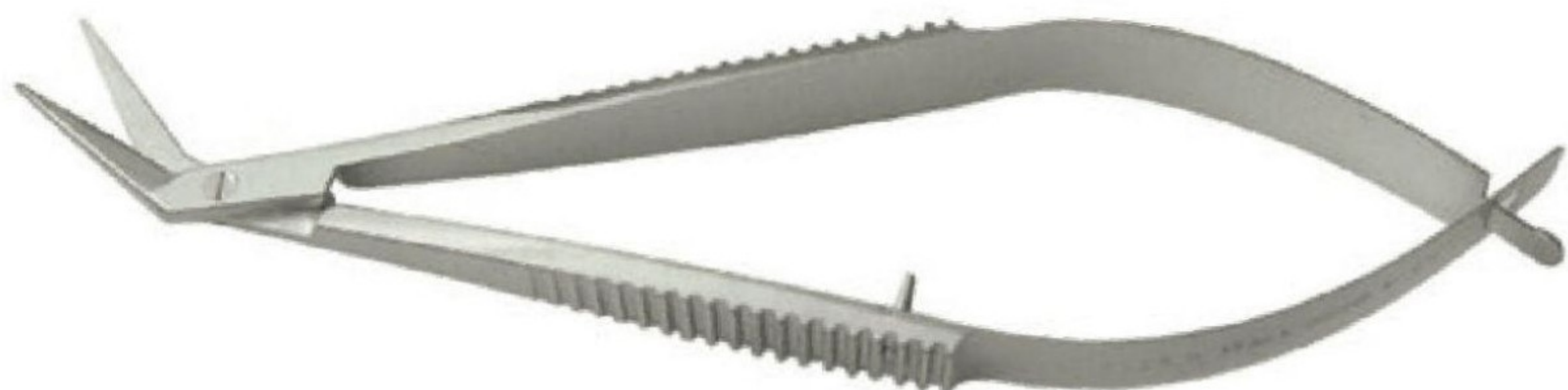

АРТ. 8055 МИКРО ДЛЯ СЛИЗИСТОЙ "CASTROVIEJO" УГЛОВЫЕ 180 ММ С ПОЗОЛОЧЕННОЙ РУЧКОЙ

- арт. 8053 - прямые 180 mm
- арт. 8054 - изогнутые 180 mm



АРТ. 8056 МИКРО ДЛЯ СЛИЗИСТОЙ "CASTROVIEJO" ПРЯМЫЕ 150 ММ

- арт. 8057 - изогнутые 150 mm



АРТ. 8059 МИКРО ДЛЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ "CASTROVIEJO" ПРЯМЫЕ 150 ММ С ПОЗОЛОЧЕННОЙ РУЧКОЙ

- арт. 8060 - изогнутые 150 mm



АРТ. 8851 МИКРО ОБЛЕГЧЕННЫЕ CASTROVIEJO ПРЯМЫЕ 140ММ

- арт. 8852 - изогнутые 140 mm



АРТ. 8101 ПИНЦЕТ "ADSON" 125 ММ АНАТОМИЧЕСКИЙ



АРТ. 8102 ПИНЦЕТ "ADSON" 125 ММ АНАТОМИЧЕСКИЙ КАРБИТ-ВАЛЬФРАМЫВЫЕ ВСТАВКИ




АРТ. 8103 ПИНЦЕТ "ADSON" 125 ММ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЗУБЧАТЫЙ



АРТ. 8104 ПИНЦЕТ ЗУБЧАТЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "MICRO-ADSON" 125 ММ КАРБИТ-ВАЛЬФРАМЫВЫЕ ВСТАВКИ



АРТ. 8105 ПИНЦЕТ "MICRO-ADSON" 125 ММ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЗУБЧАТЫЙ

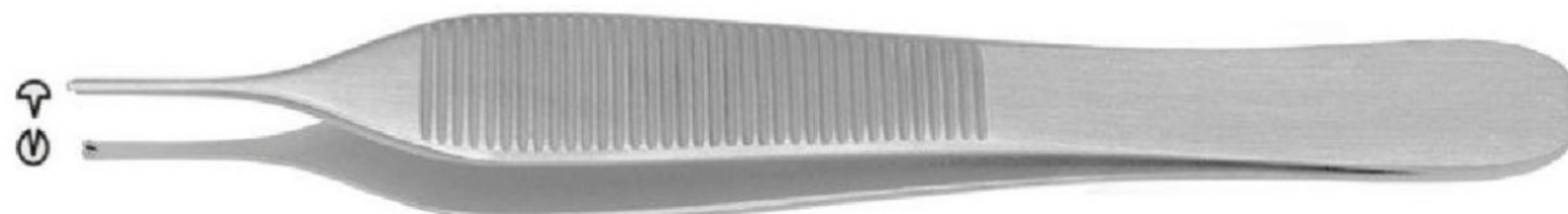

АРТ. 8111 ПИНЦЕТ "ADSON-BROWN" 125 ММ АНАТОМИЧЕСКИЙ




АРТ. 8113 МИКРО ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ 180 ММ ПРЯМОЙ УЛЬТРАТОНКИЙ 0.8 ММ



АРТ. 8114 МИКРО ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ 180 ММ ИЗОГНУТЫЙ, УЛЬТРАТОНКИЙ



АРТ. 8115 ПИНЦЕТ "SEMKEN" 150 ММ ЗУБЧАТЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ, ПРЯМОЙ

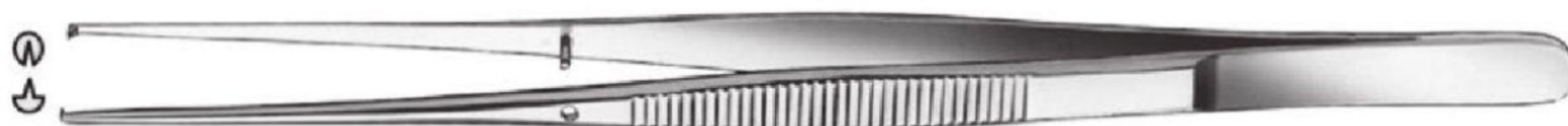

АРТ. 8116 ПИНЦЕТ "SEMKEN" 150 ММ ЗУБЧАТЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ, ИЗОГНУТЫЙ




АРТ. 8118 ПИНЦЕТ "SEMKEN" 125 ММ ЗУБЧАТЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ, ИЗОГНУТЫЙ



АРТ. 8128 ИЗОГНУТЫЙ "CRANE-KARLAN" 150 ММ ГРАДУИРОВАННЫЙ ДЛЯ СЛИЗИСТОЙ



АРТ. 8126 ПИНЦЕТ "DE BAKEY" 150 ММ ПРЯМОЙ, АНАТОМИЧЕСКИЙ

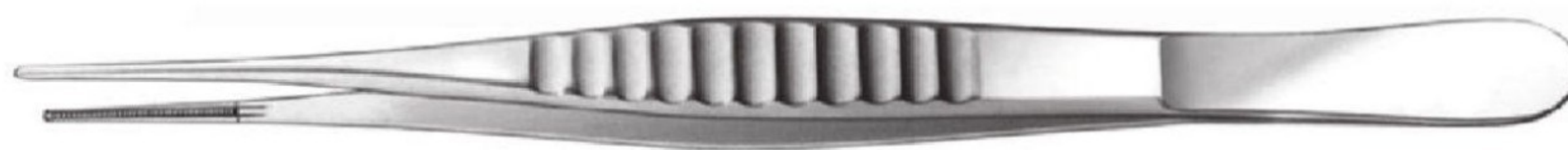

АРТ. 8127 ПИНЦЕТ "DE BAKEY" 150 ММ ИЗОГНУТЫЙ, АНАТОМИЧЕСКИЙ



АРТ. 8131 ПИНЦЕТ ШОВНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ 150 ММ



Арт. 8132 - прямой 150 мм




Арт. 8133 - прямой 150 мм

АРТ. 8144 ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ "CIRAFFE" 150 ММ





APT. 8901
РЕТРАКТОР ГУБНОЙ "COLUMBIA" 140 MM

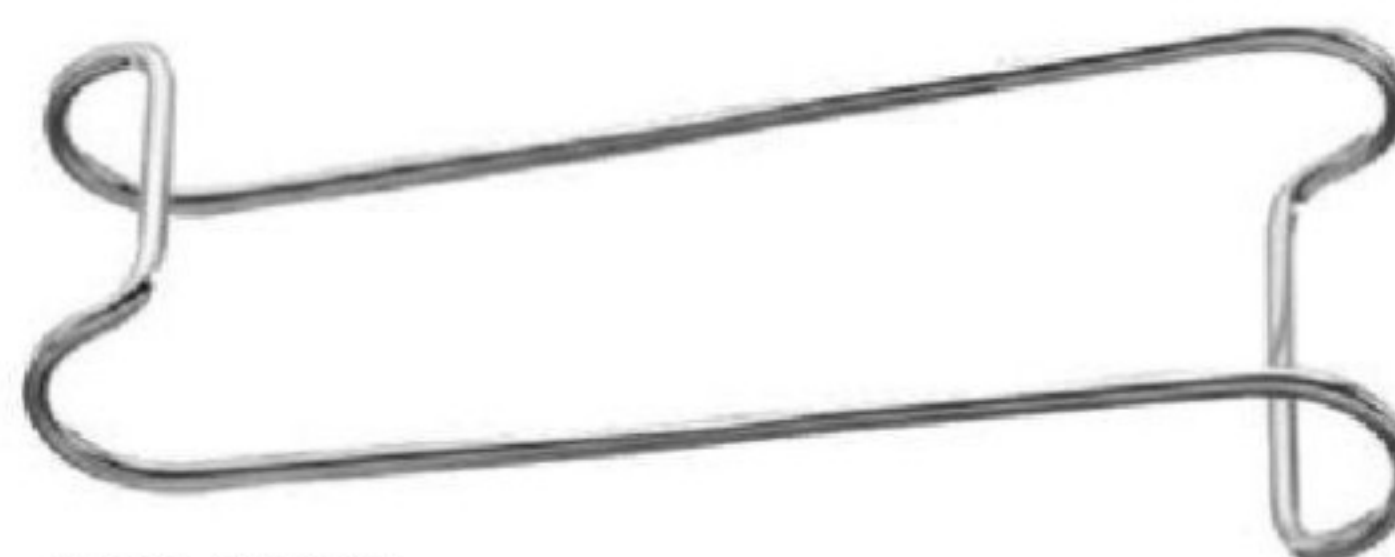

APT. 8902
ГУБНОЙ "STERBERG" 160 MM



APT. 8906 РЕТРАКТОР ЩЕЧНЫЙ 130 MM
"CAWOOD-MINNESOTA"



APT. 8907 РЕТРАКТОР ЩЕЧНЫЙ 140 MM
"MINNESOTA"



APT. 8908 РЕТРАКТОР ЩЕЧНЫЙ 160 MM
"BISHOP"



APT. 8922 ЩЕЧНЫЙ "WIEDER" 140 MM



APT. 8945 РЕТРАКТОР ЩЕЧНЫЙ 130 MM
"KILNER"



APT. 8989 РЕТРАКТОР ЩЕЧНЫЙ 130 MM
"FARABEUF"



APT. 8995
ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ РЕТРАКТОР
"UNIVERSAL" 170 MM



APT. 8994
"ORINGER MOUTH SPREADER"
M 50*110 MM / L 60*115 MM



APT. 8996
ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ РЕТРАКТОР
"UNIVERSAL" 230 MM

APT. 8992 ПЕТРАКТОР "DOYEN-MOLT" 140 MM



APT. 8951/2 ПЕТРАКТОР ЩЕЧНЫЙ "MIDDEELDORPF" 190 MM



22 X 20 MM

APT. 8971 ПЕТРАКТОР ЩЕЧНЫЙ "KOCHER" 210 MM



21 X 14 MM

APT. 8950 ПЕТРАКТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ "ORIENTABLE" 200 MM



АПТ. 8933 РАНОРАСШИРИТЕЛЬ "WASSMUND" 220 MM



АПТ. 8931 ПЕТРАКТОР "LANGERBECK" 230 MM



АПТ. 8931/2



32 X 14 MM

АПТ. 8931/3



42 X 10 MM

АПТ. 8931/4



60 X 11 MM


АПТ. 8960 РАНОРАСШИРИТЕЛЬ ПРУЖИННЫЙ "SPRING-NECK" 150 MM



АПТ. 8941 РАНОРАСШИРИТЕЛЬ ОСТРЫЙ "SENN-MILLER" 160 MM



АРТ. 6801 НАБОР ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЙ "GOLD TITANIUM" 7 ИНСТРУМЕНТОВ

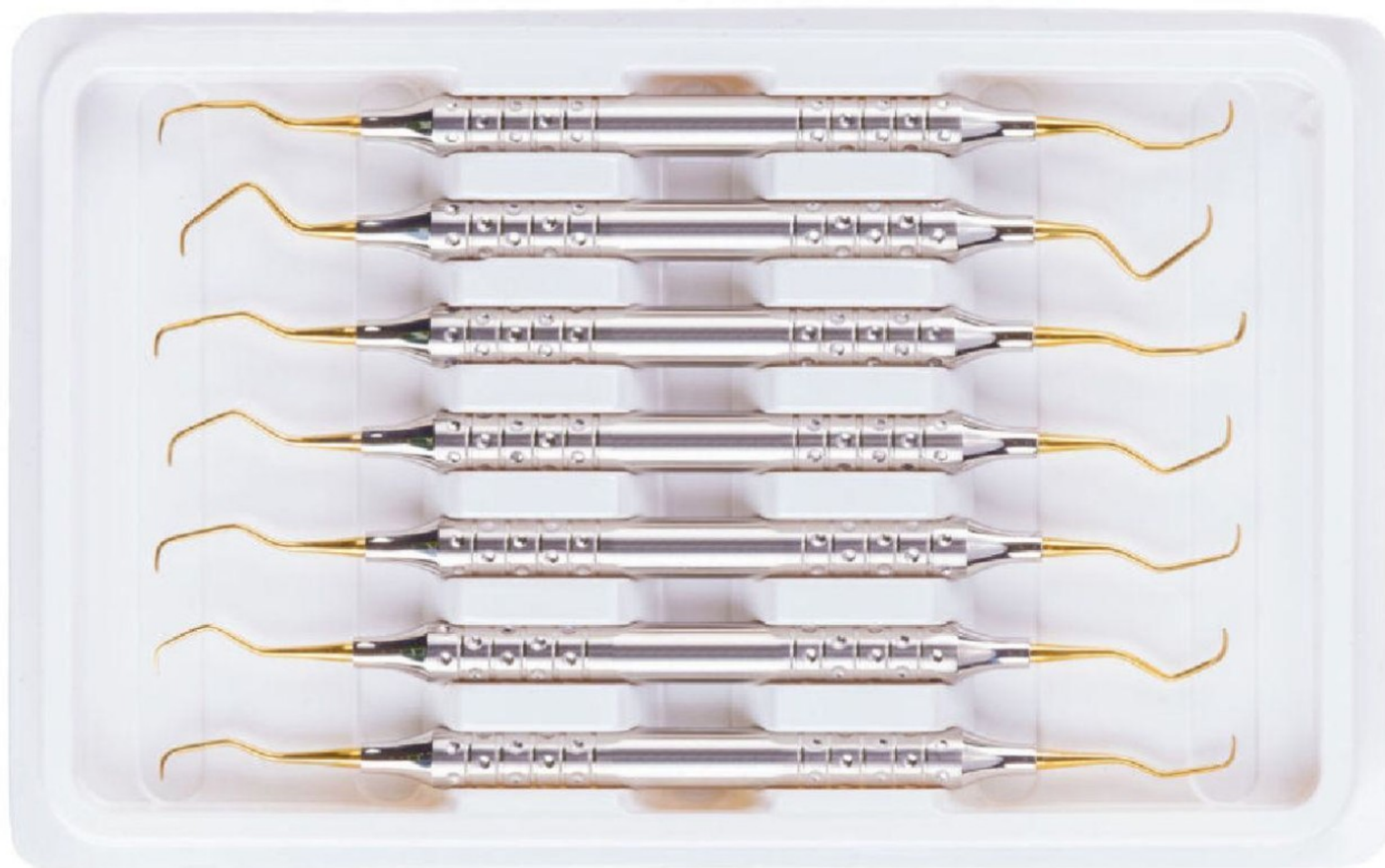

КЮРЕТЫ "GRACEY" В АССОРТИМЕНТЕ

- Кюрета "GRACEY" 11-12 blue арт.6802/6



- Кюрета "GRACEY" 13-14 blue арт.6802/7



- Кюрета "GRACEY" 5-6 blue арт.6802/3



- Кюрета "GRACEY" 7-8 blue арт.6802/4



АРТ. 2901 НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 12 ИНСТРУМЕНТОВ



АРТ. 2902 НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 11 ИНСТРУМЕНТОВ



АРТ. 2951МС НАБОР ЩИПЦОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ, 10 ИНСТРУМЕНТОВ (МУЛЬТИКОЛОР)



АРТ. 2951/7 MC




АРТ. 2951/13 MC



АРТ. 2951/17 MC



АРТ. 2951/18 MC

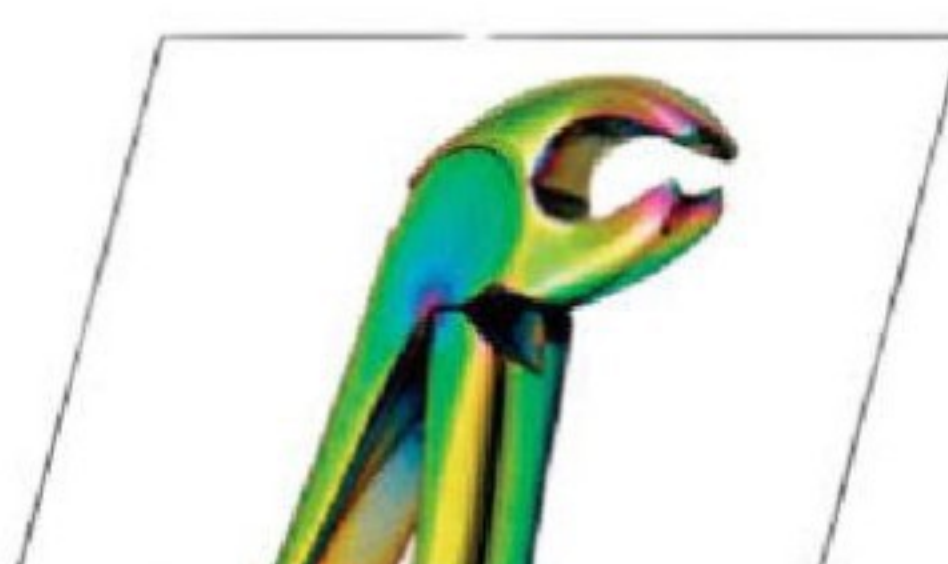

АРТ. 2951/22 MC



АРТ. 2951/33A MC



АРТ. 2951/51A MC



АРТ. 2951/67A MC



АРТ. 2951/79 MC


АРТ. 2958МС НАБОР ЩИПЦОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 7 ИНСТРУМЕНТОВ, ДЕТСКИЙ (МУЛЬТИКОЛОР)




АРТ. 2958/217 МС



АРТ. 2958/218 МС

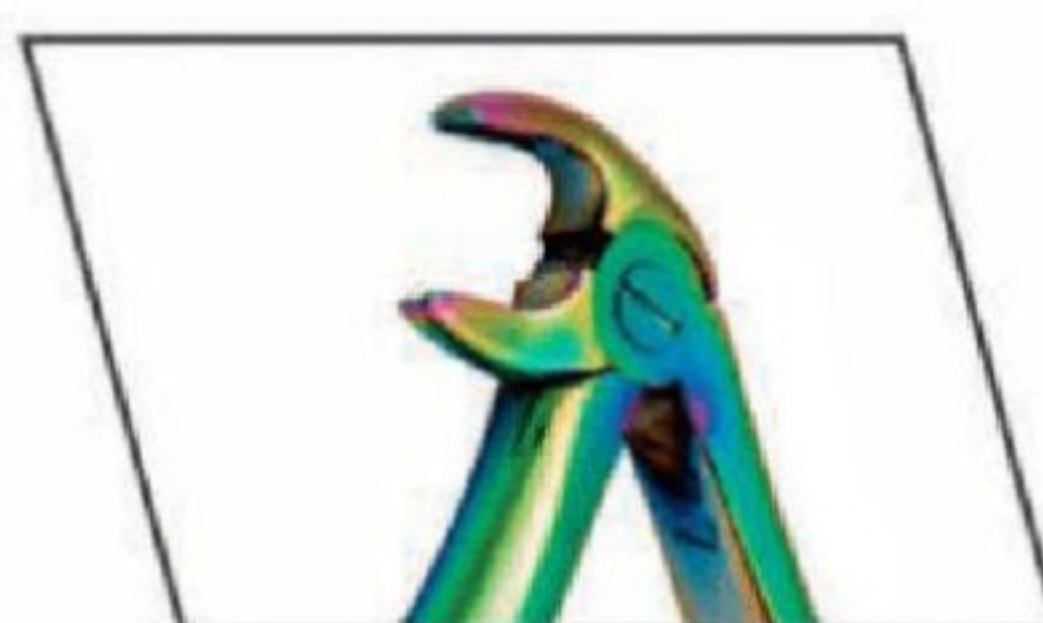

АРТ. 2958/221 МС

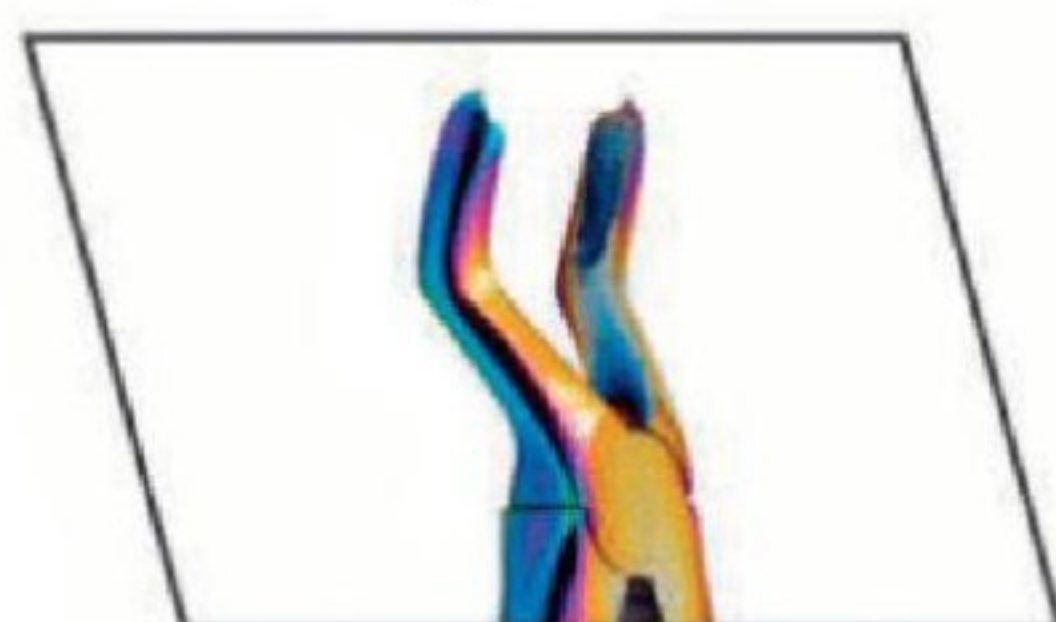


АРТ. 2958/220 МС



АРТ. 2958/222 МС



АРТ. 2958/223 МС

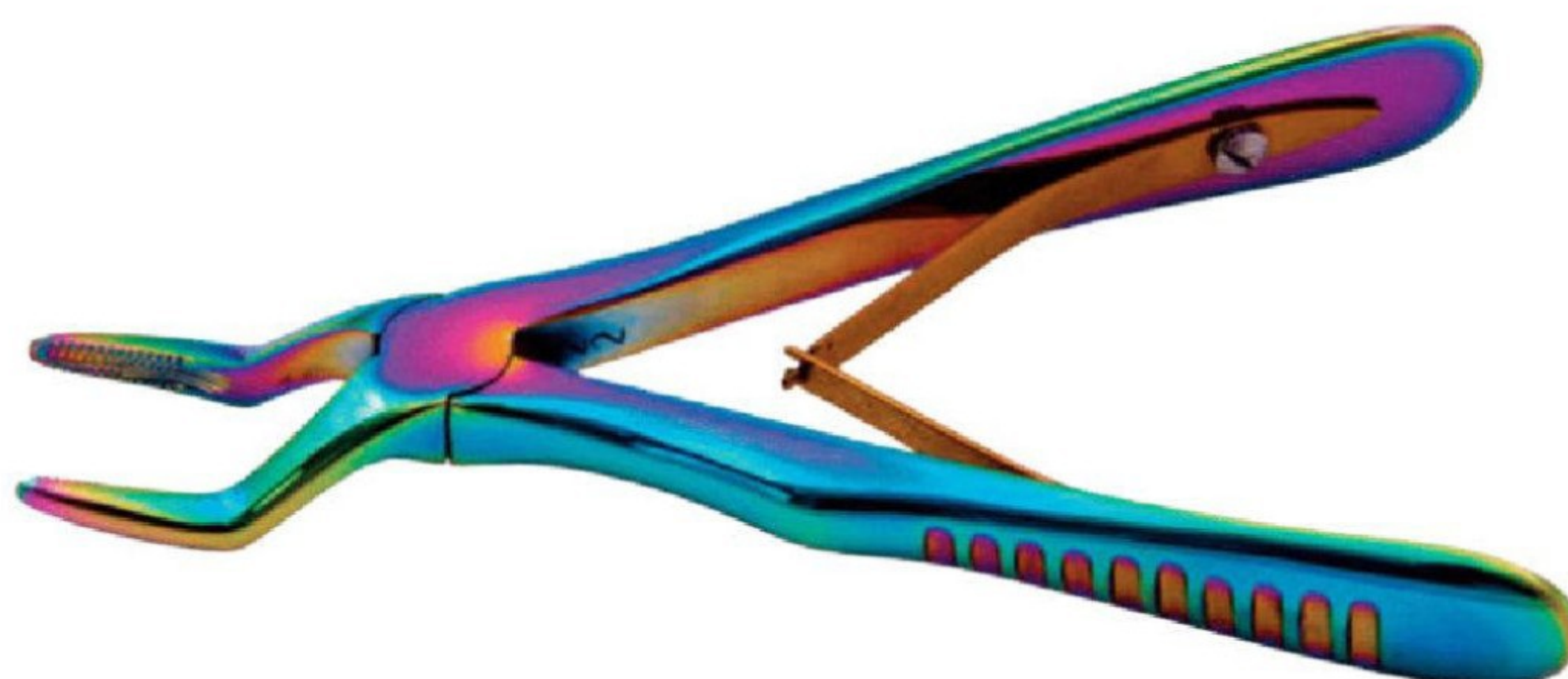

APT. 2952 НАБОР ЩИПЦОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ, 10 ИНСТРУМЕНТОВ



APT. 2952/1



APT. 2952/7



APT. 2952/13



APT. 2952/17



APT. 2952/18



APT. 2952/22




APT. 2952/33A




APT. 2952/67A




APT. 2952/79

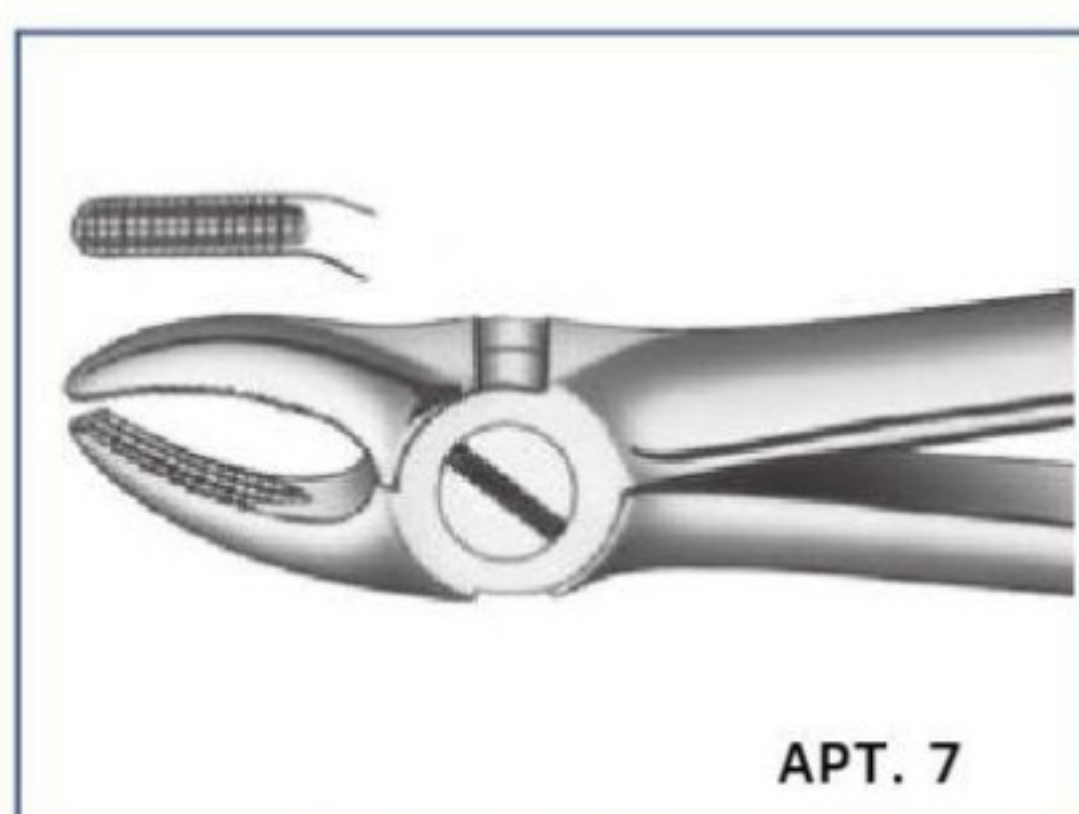

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
ВЕРХНИЕ ПРЕМОЛЯРЫ

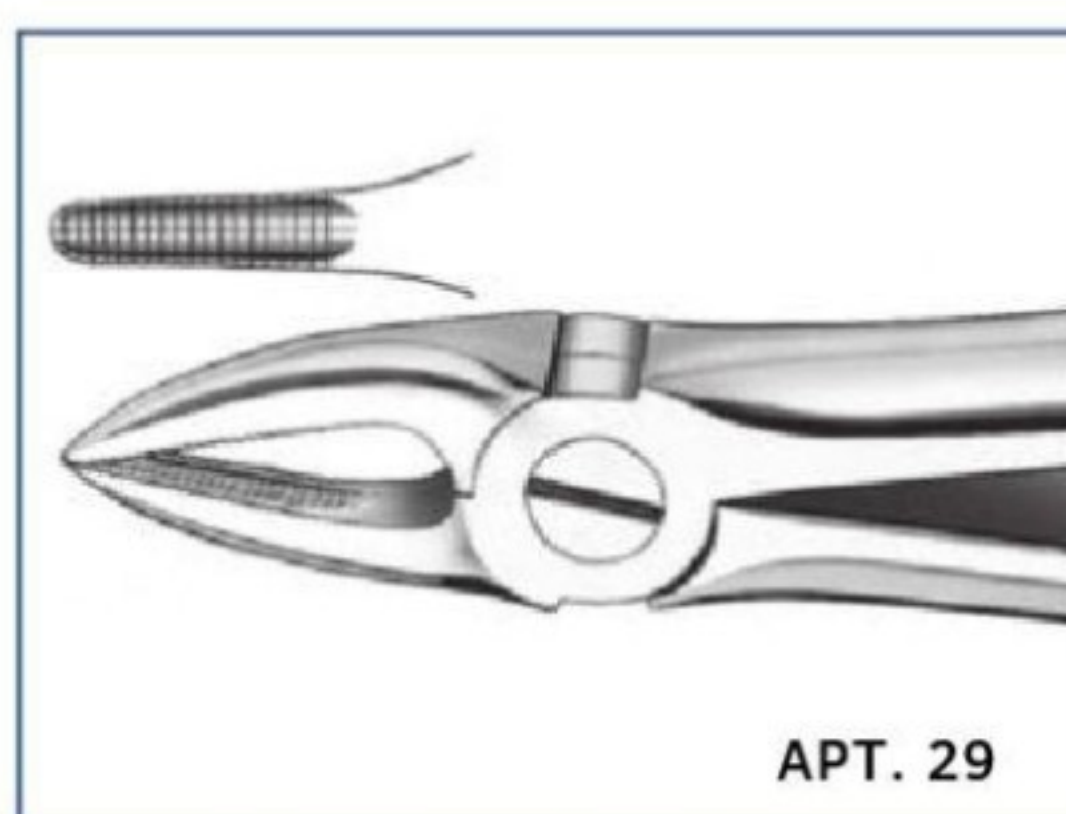

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
ВЕРХНИЕ КОРНЕВЫЕ

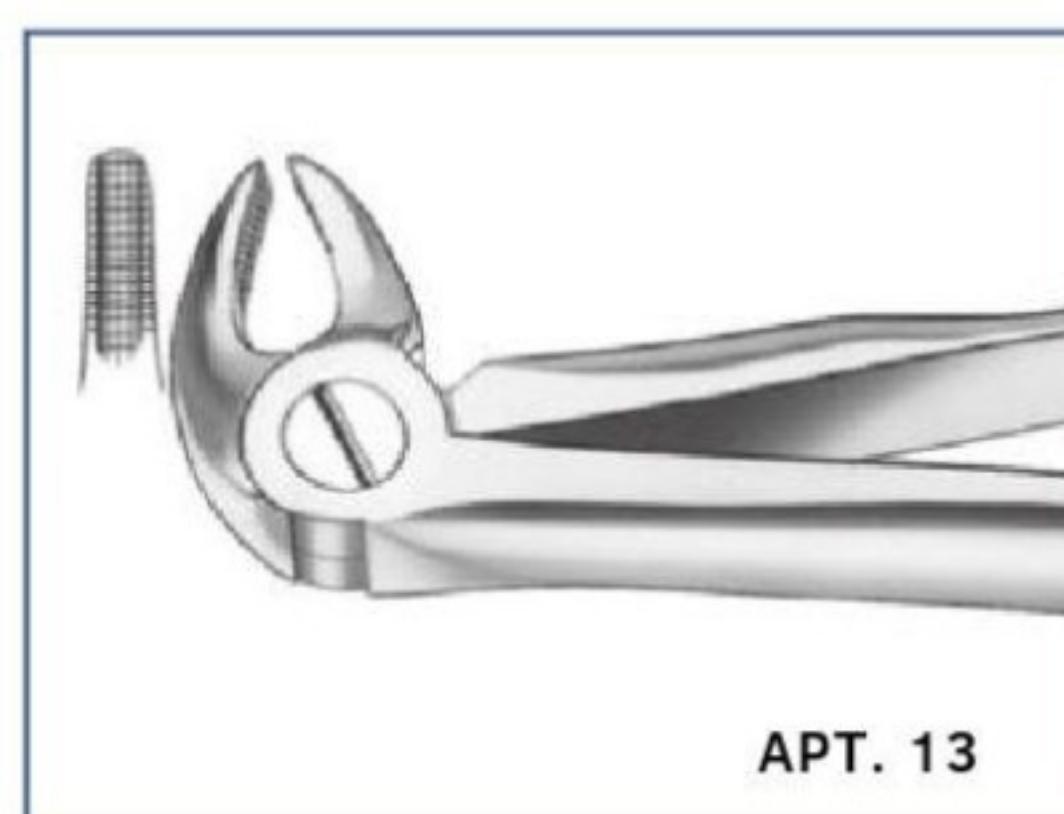


СТАНДАРТНАЯ РУЧКА, НИЖНИЕ
ПРЕМОЛЯРЫ




СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
НИЖНИЕ МОЛЯРЫ




СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
НИЖНИЕ КОРНЕВЫЕ

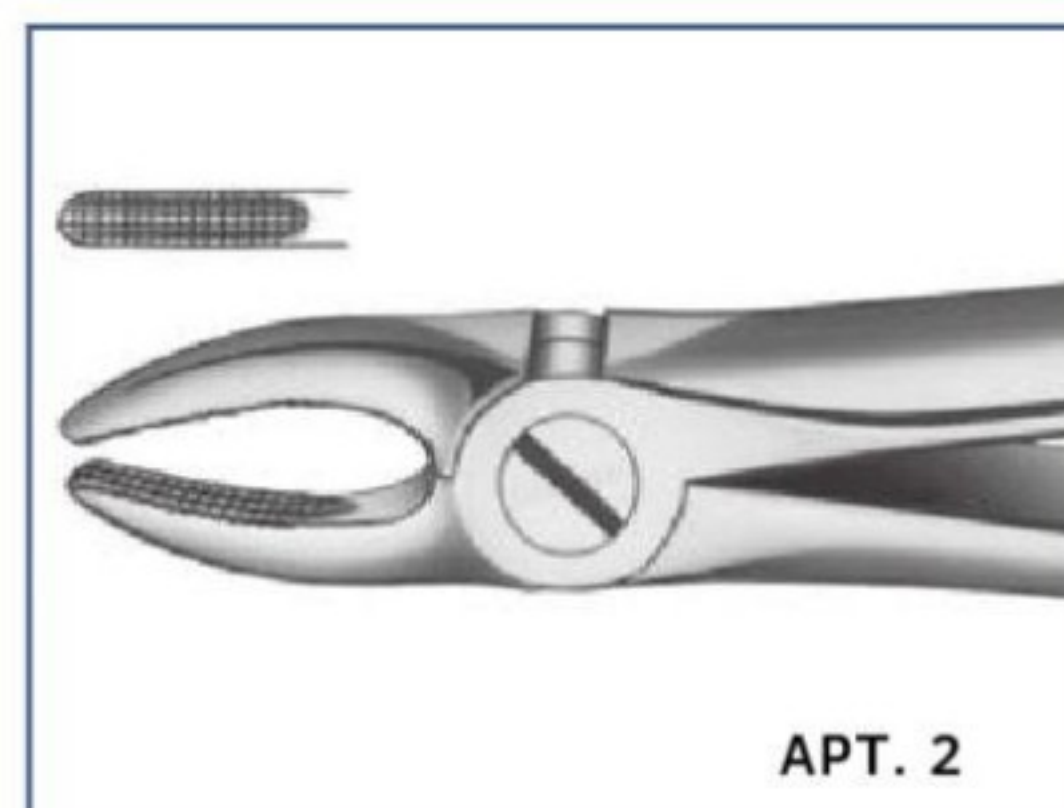


СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
ВЕРХНИЕ РЕЗЦЫ/КЛЫКИ

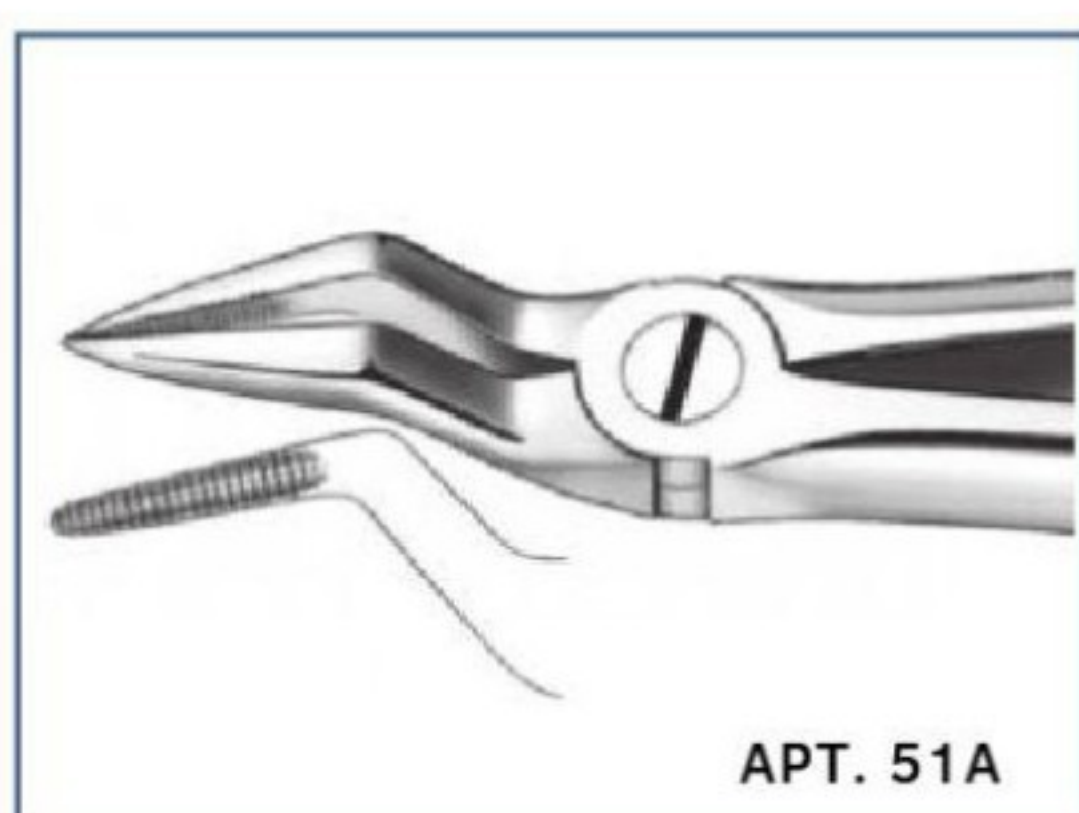


СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
ВЕРХНИЕ КОРНЕВЫЕ

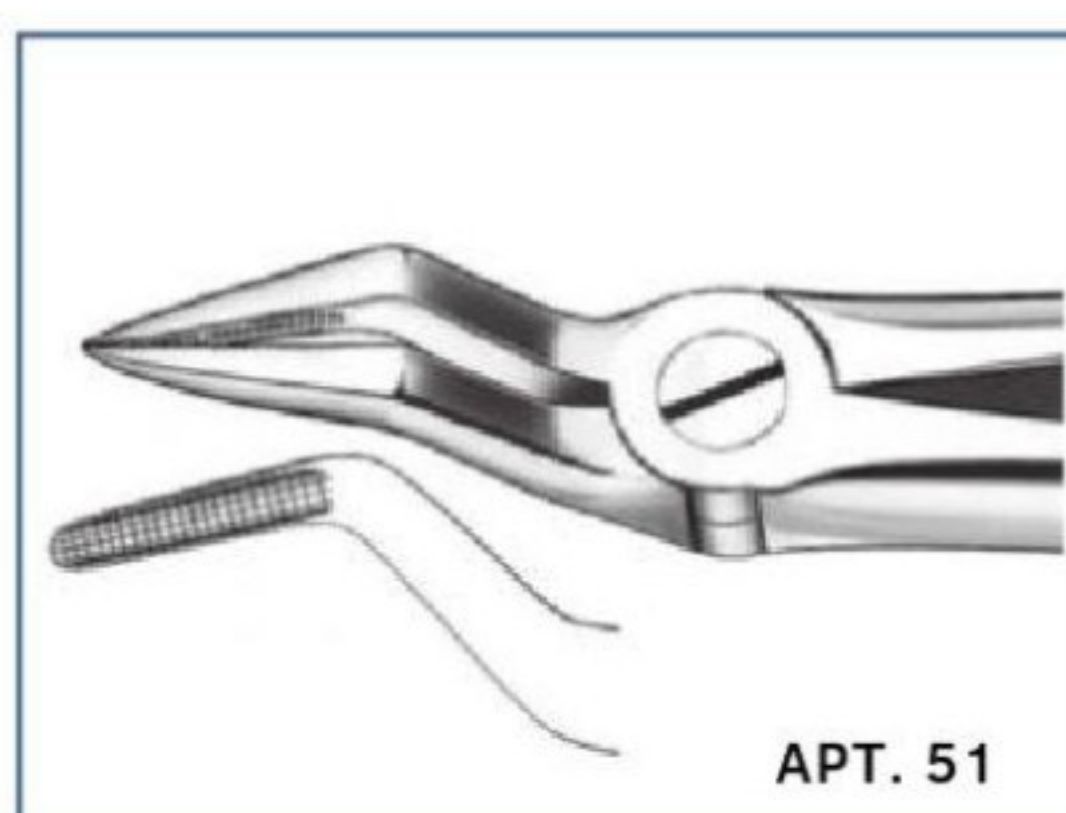


СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
ВЕРХНИЕ КОРНЕВЫЕ

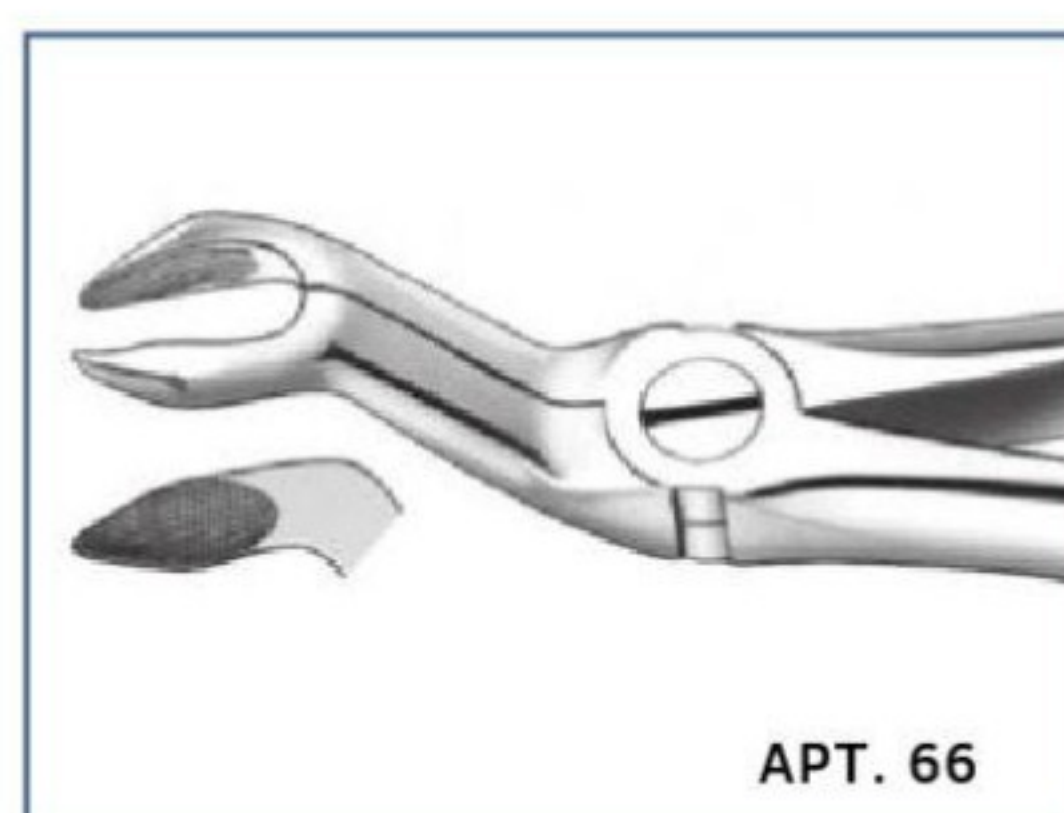


СТАНДАРТНАЯ
ВЕРХНИЕ МОЛЯРЫ ТРЕТЬИ

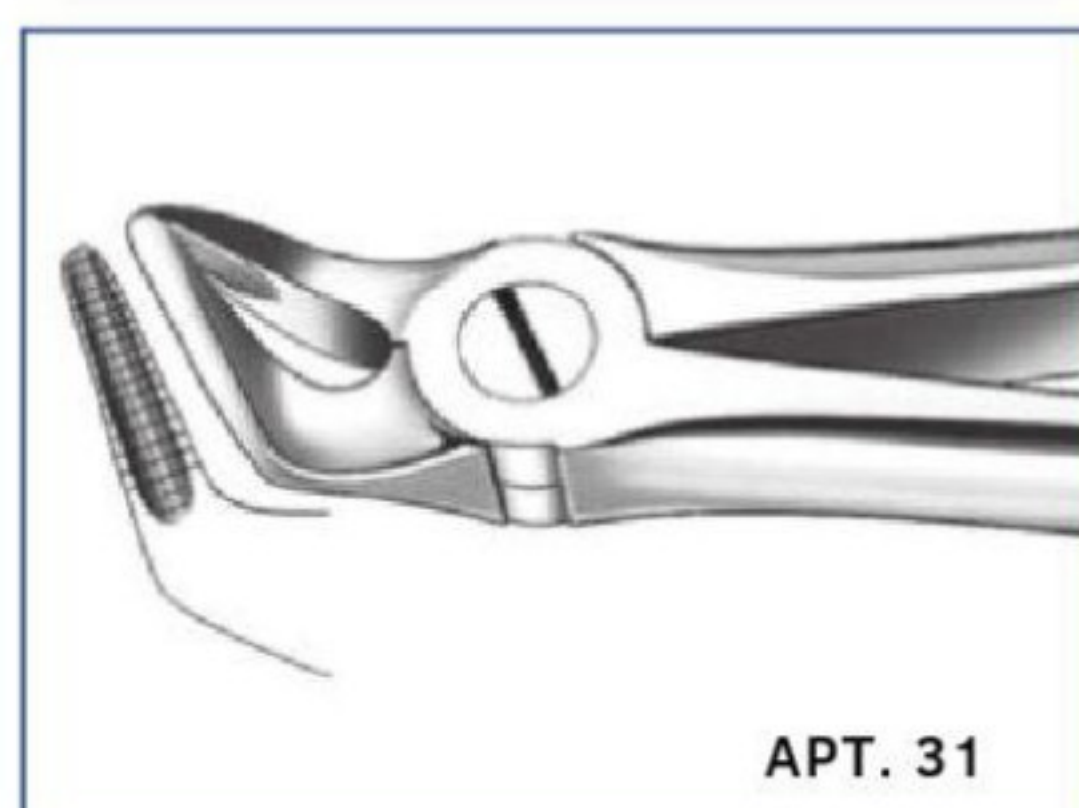


СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
НИЖНИЕ КОРНЕВЫЕ

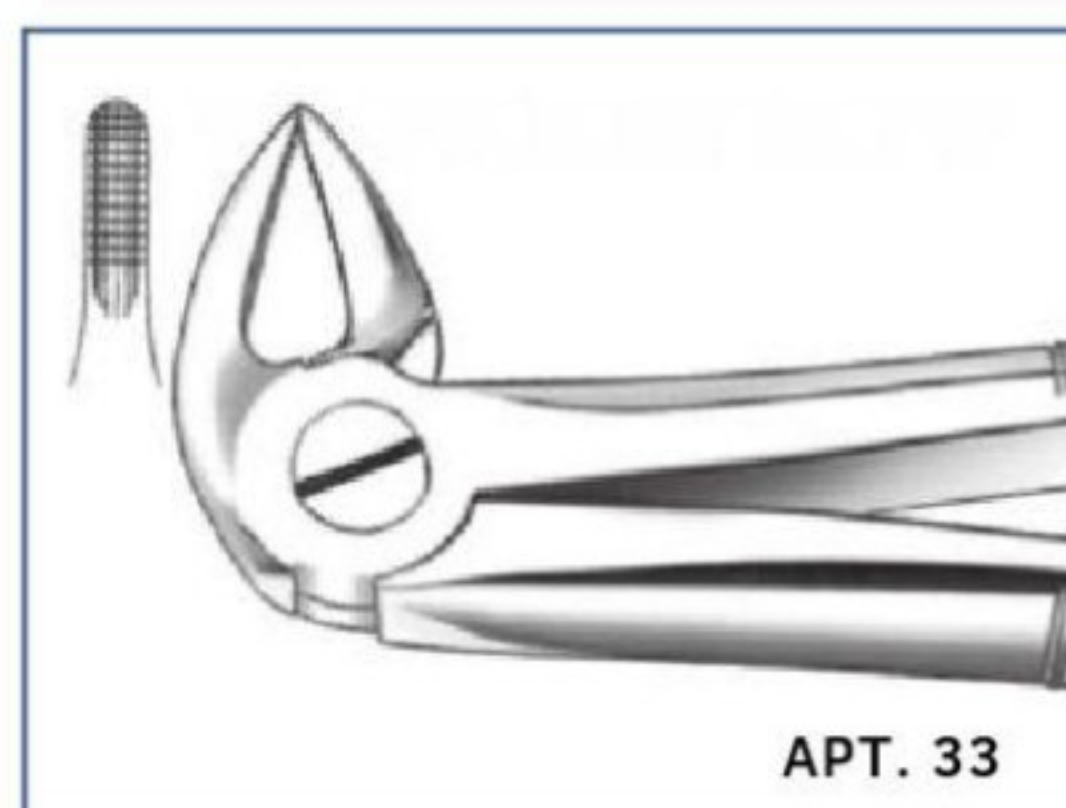


СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
НИЖНИЕ КОРНЕВЫЕ

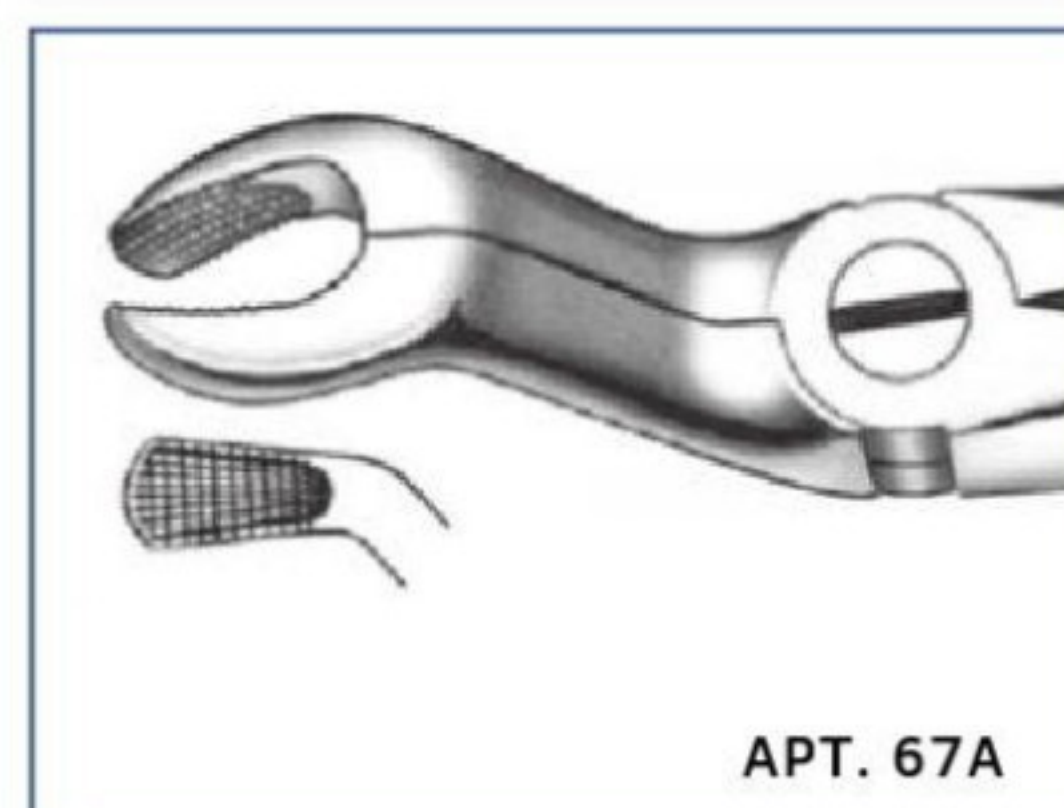


СТАНДАРТНАЯ РУЧКА ВЕРХНИЕ
МОЛЯРЫ ТРЕТЬИ

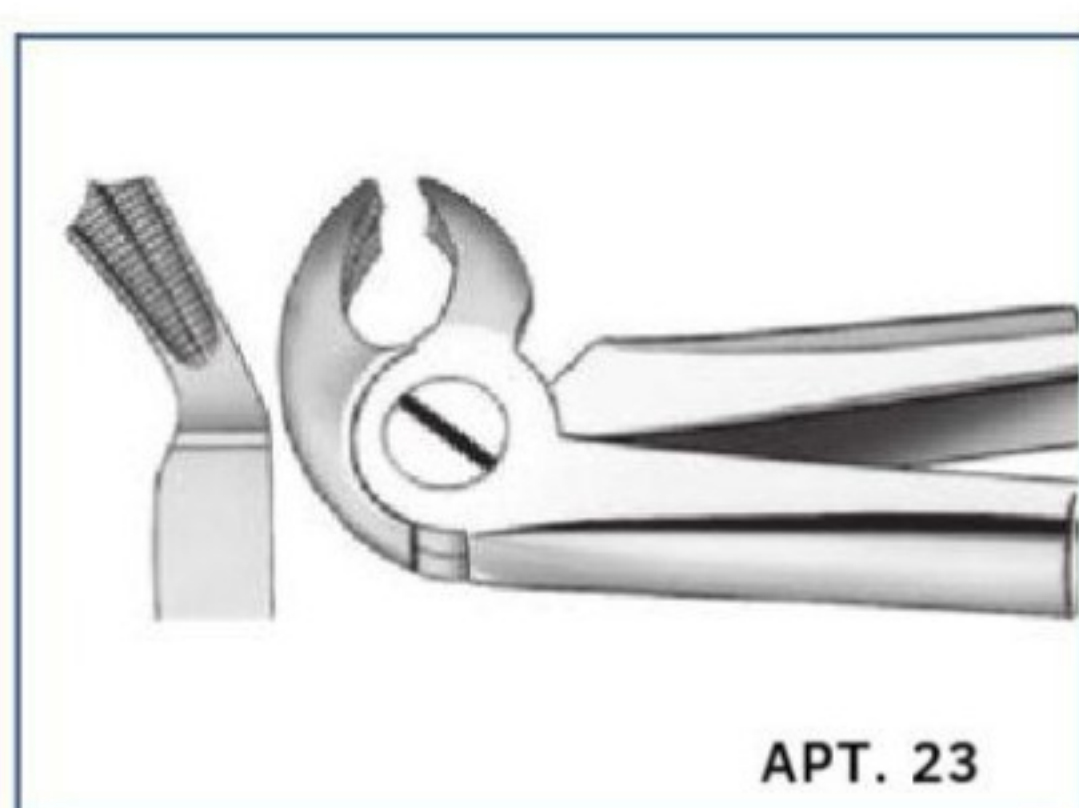


СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
НИЖНИЕ МОЛЯРЫ ЛЕВЫЕ

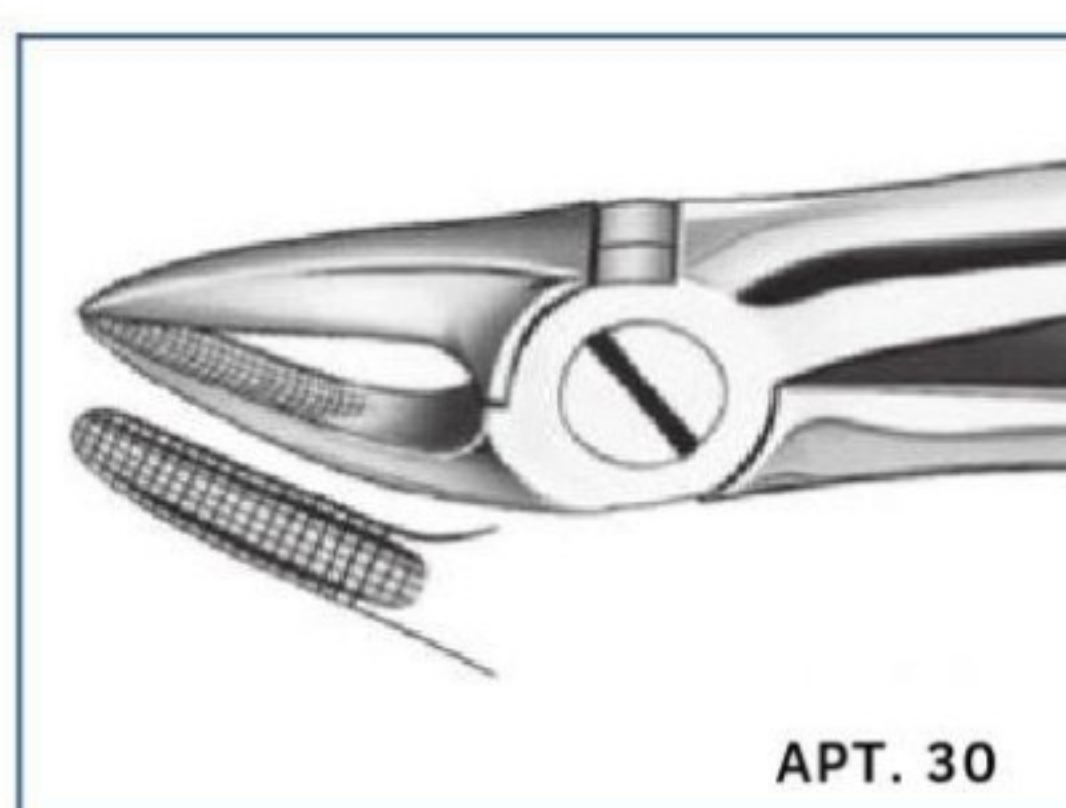

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
ВЕРХНИЕ КОРНЕВЫЕ

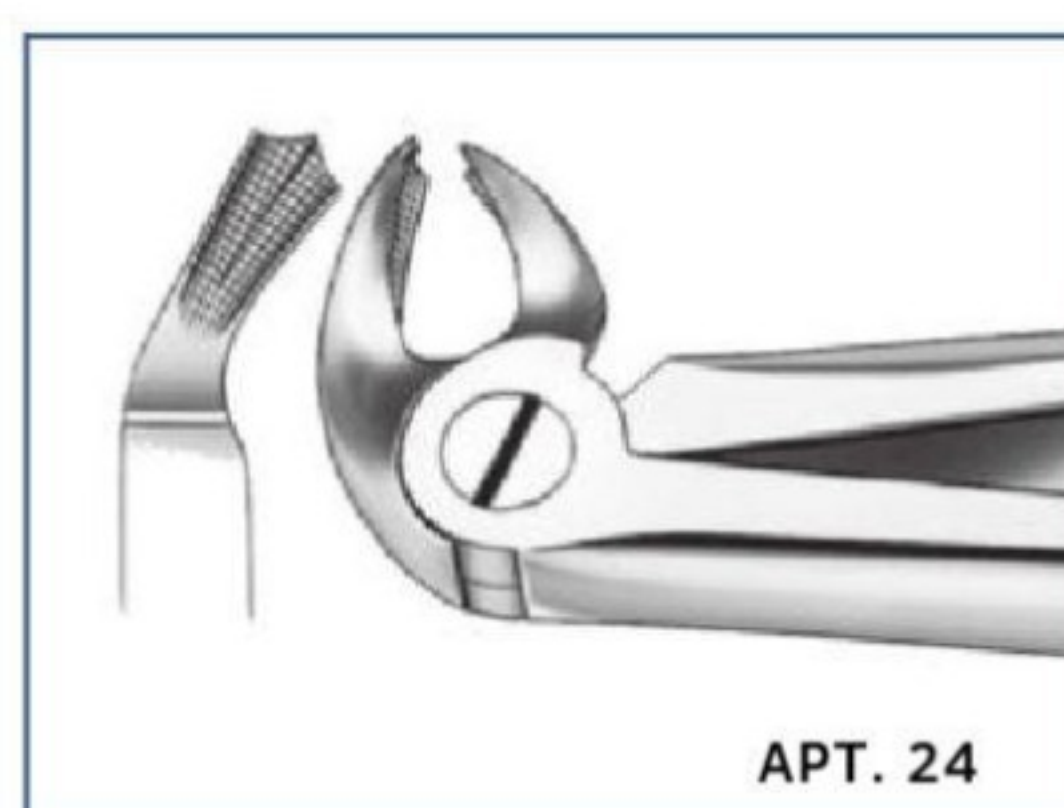

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
НИЖНИЕ МОЛЯРЫ ЛЕВЫЕ

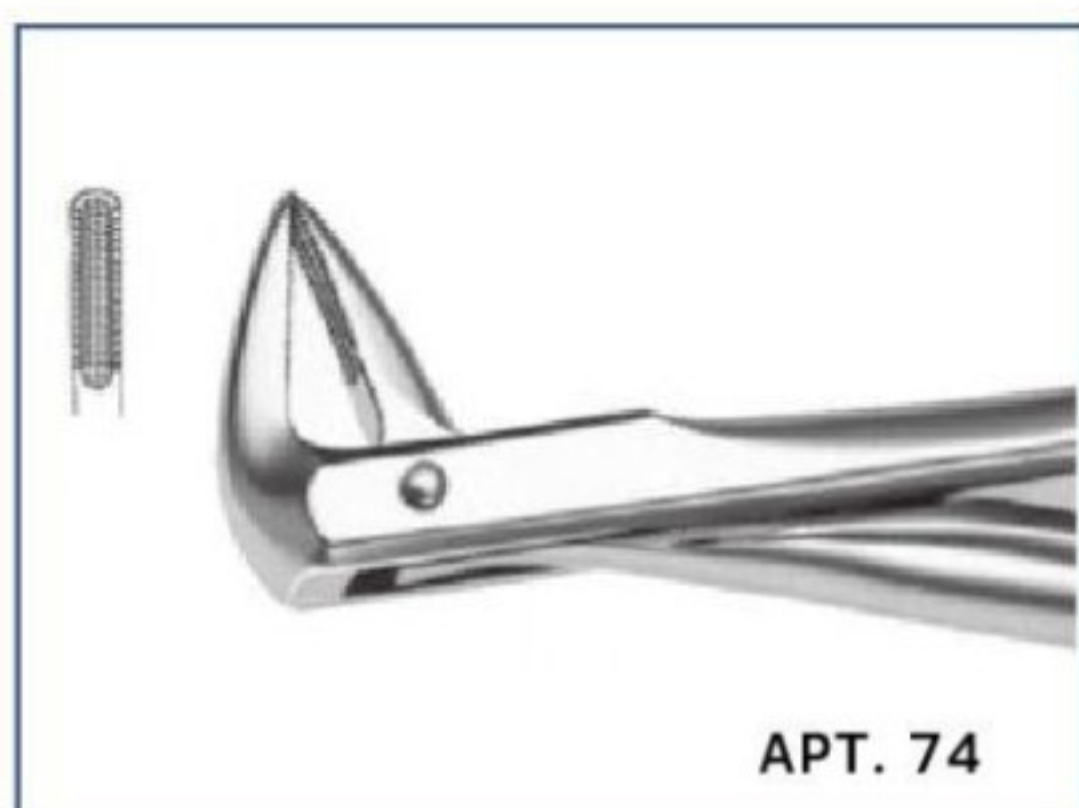

АРТ. 74

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
НИЖНИЕ КОРНЕВЫЕ




АРТ. 73

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
НИЖНИЕ МОЛЯРЫ




АРТ. 350

ПОЗОЛОЧЕННАЯ РУЧКА
НИЖНИЕ МОЛЯРЫ ЛЕВЫЕ

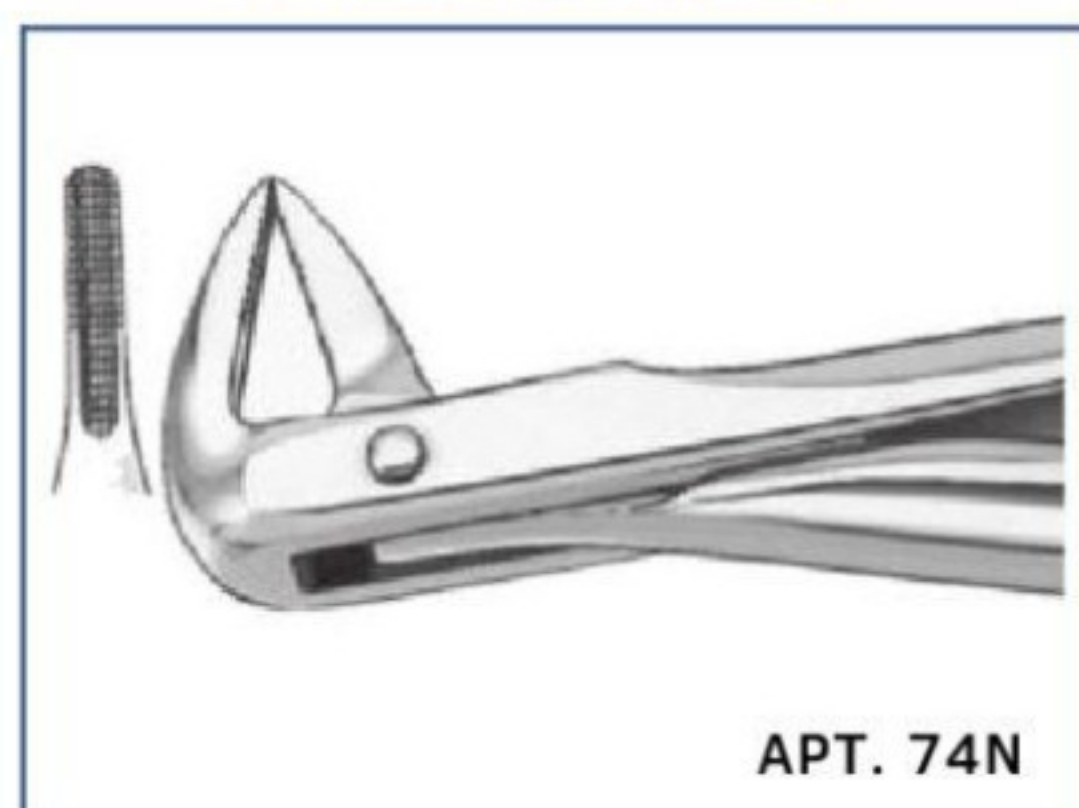


АРТ. 74N

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
НИЖНИЕ КОРНЕВЫЕ

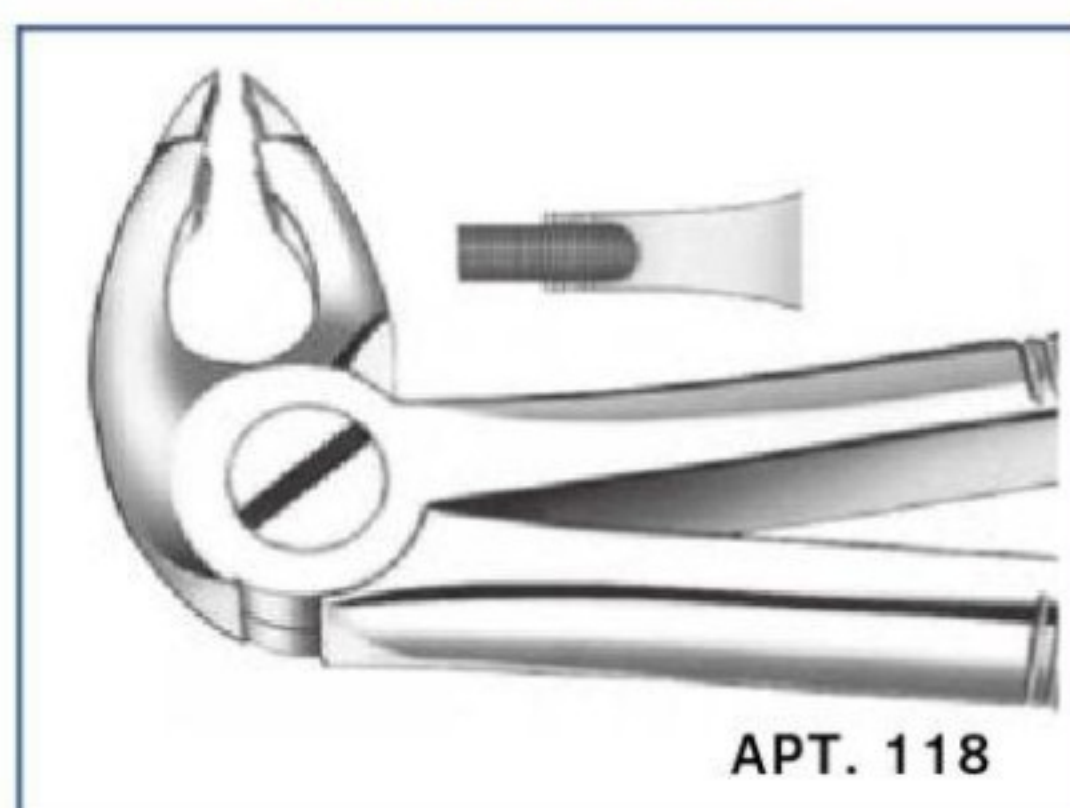


АРТ. 118

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
НИЖНИЕ КЛЫКИ/РЕЗЦЫ

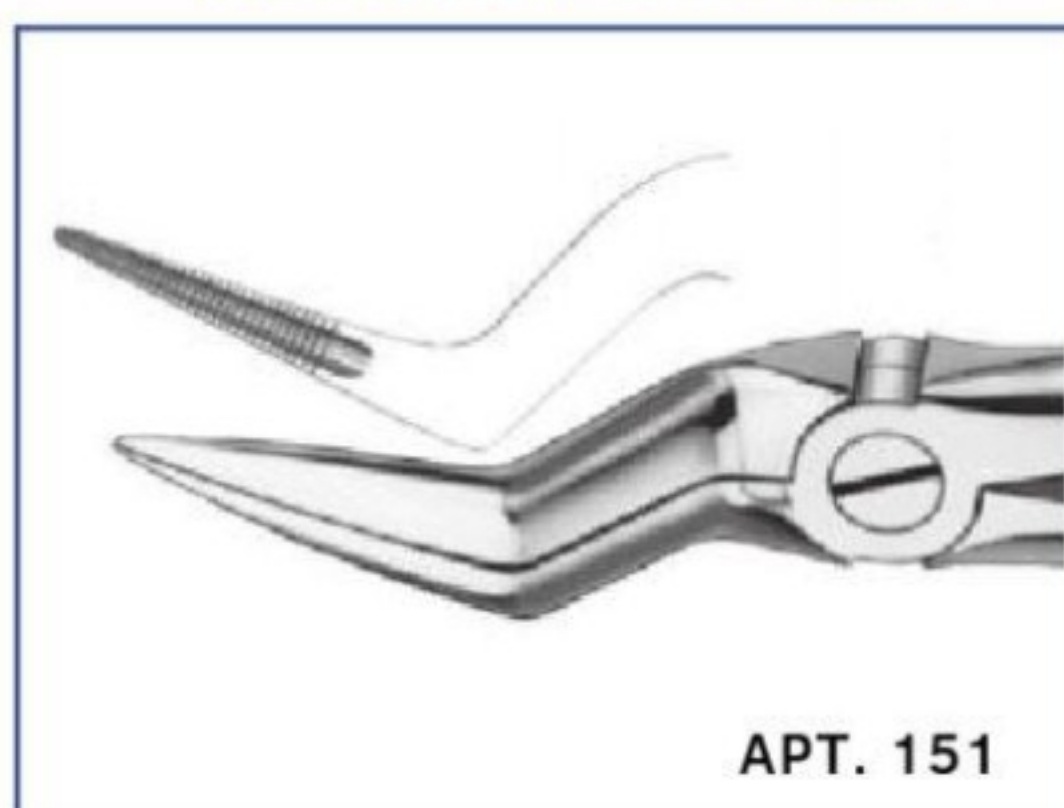


АРТ. 151

ОБЛЕГЧЕННАЯ РУЧКА
ВЕРХНИЕ КОРНЕВЫЕ

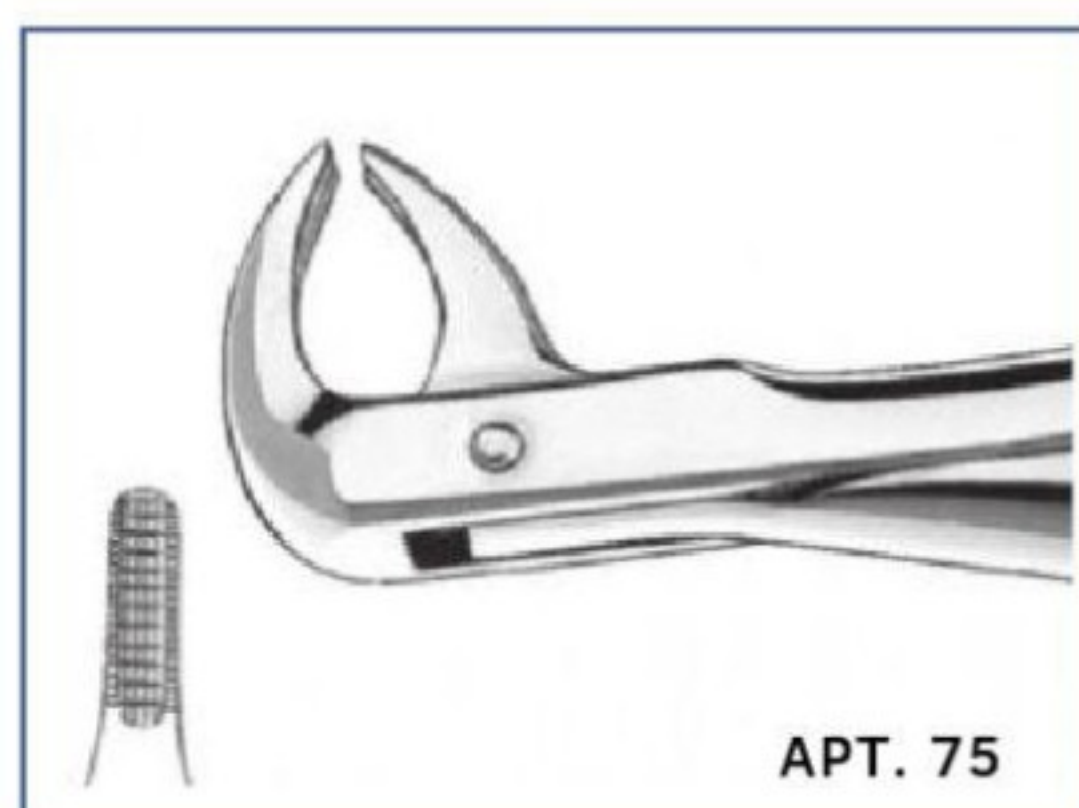


АРТ. 75

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
НИЖНИЕ ПРЕМОЛЯРЫ

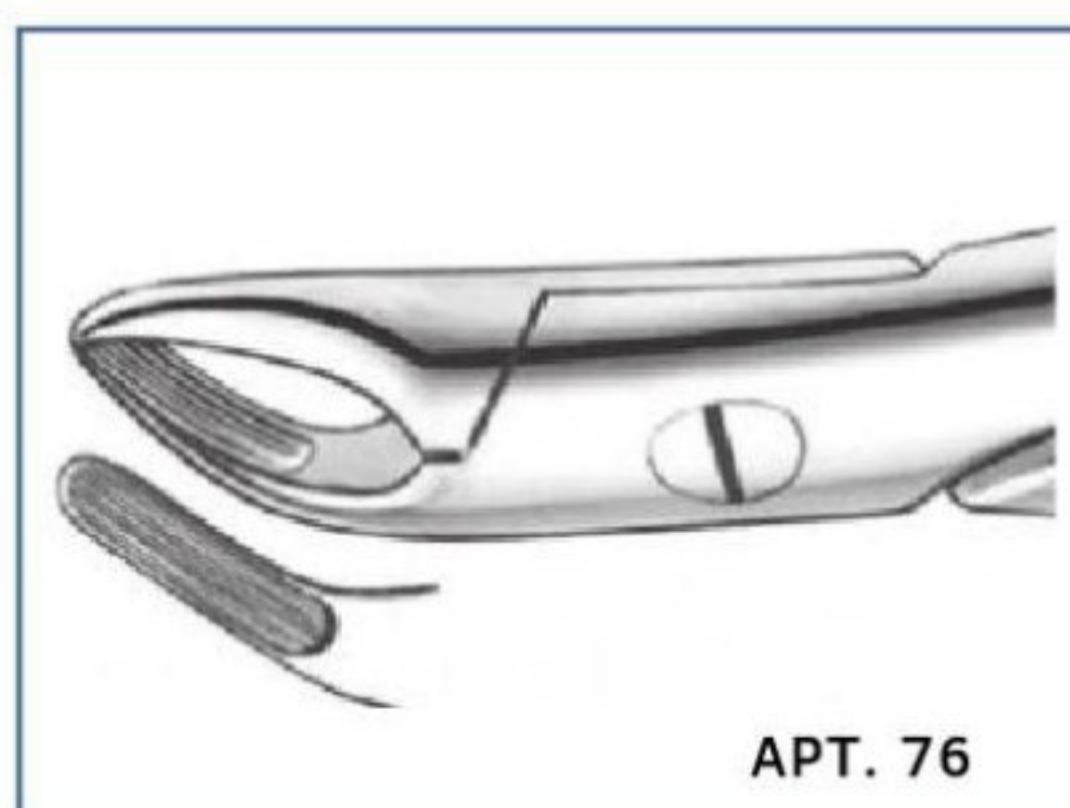


АРТ. 76

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
ВЕРХНИЕ КОРНЕВЫЕ

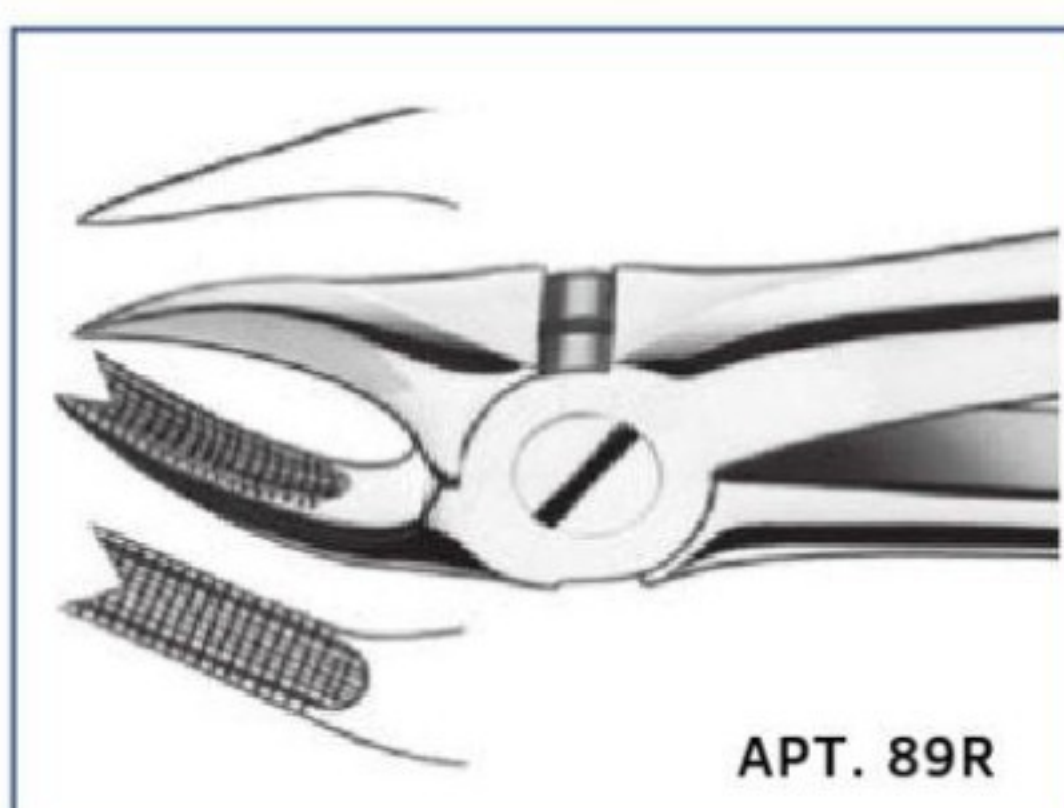


АРТ. 89R

СТАНДАРТНЫЕ ВЕРХНИЕ МОЛЯРЫ
ПРАВЫЕ

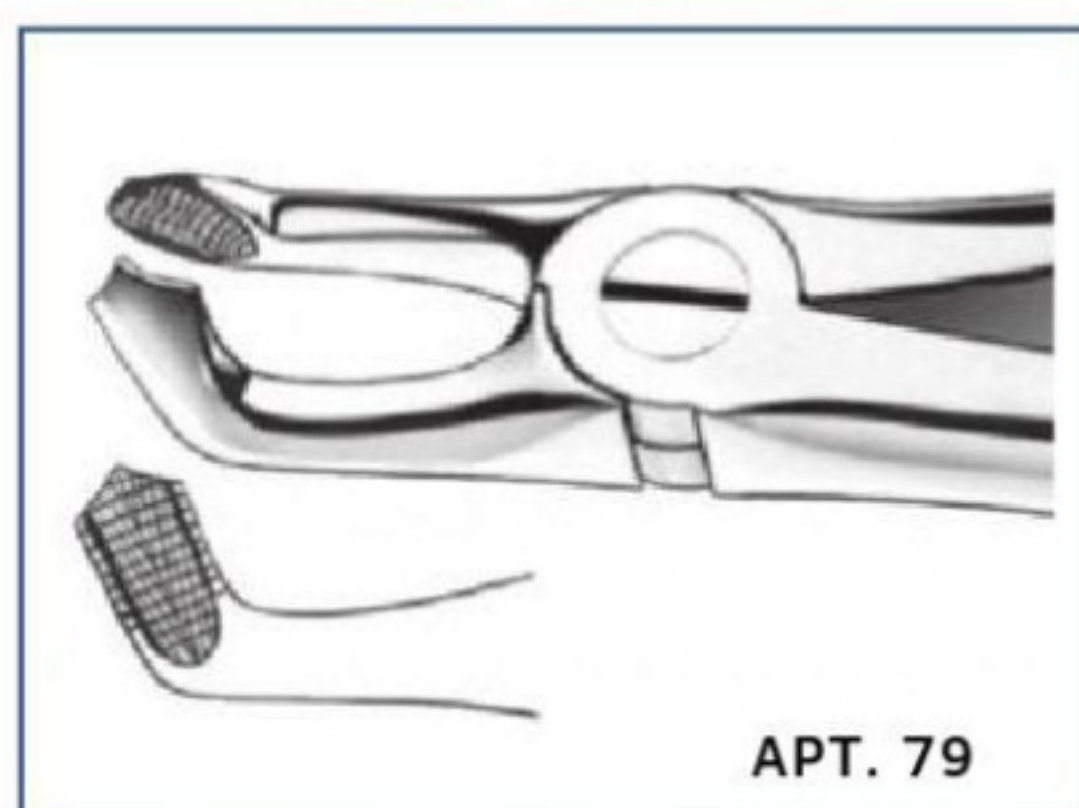


АРТ. 79

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА НИЖНИЕ
МОЛЯРЫ ТРЕТЬИ

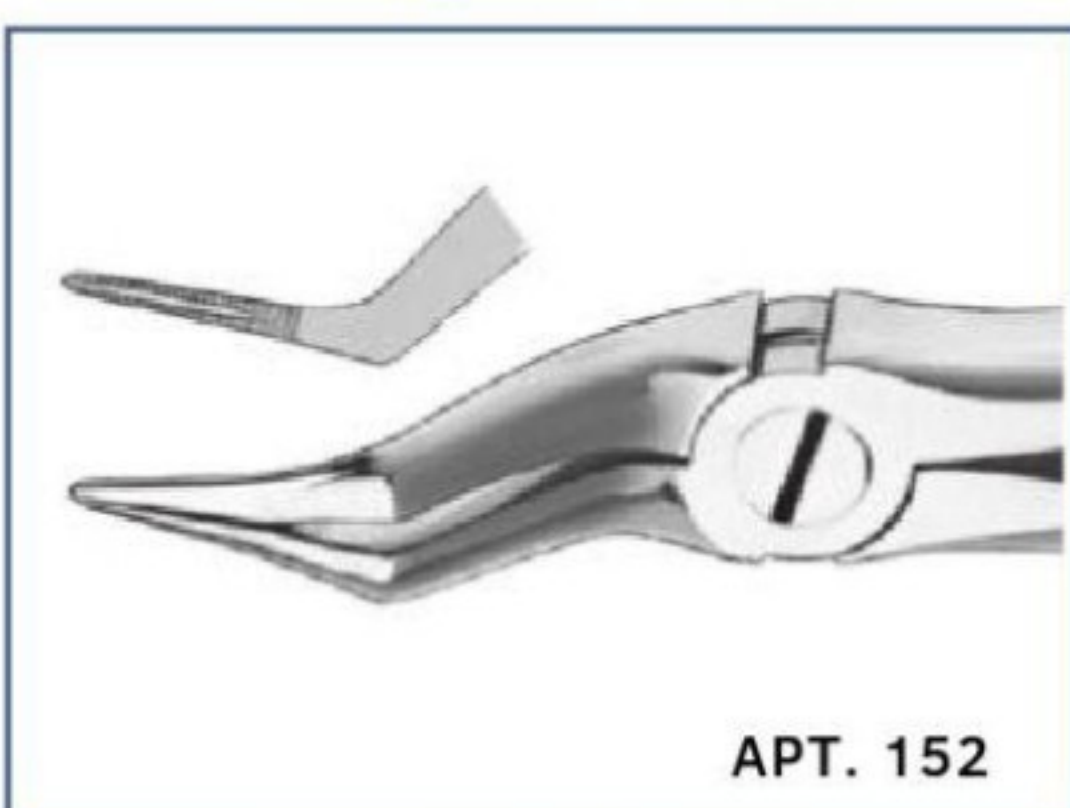


АРТ. 152

ОБЛЕГЧЕННАЯ РУЧКА
ВЕРХНИЕ КОРНЕВЫЕ

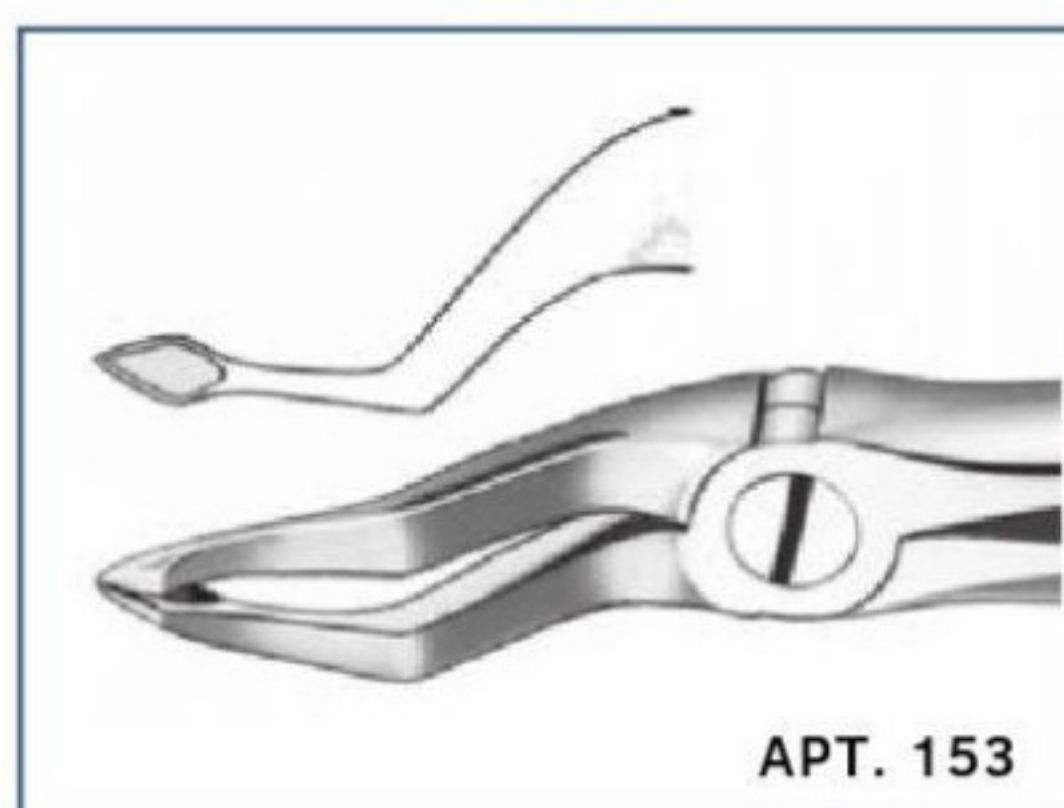

АРТ. 153

ОБЛЕГЧЕННАЯ РУЧКА
ВЕРХНИХ КОРНЕВЫХ
ФРАГМЕНТОВ

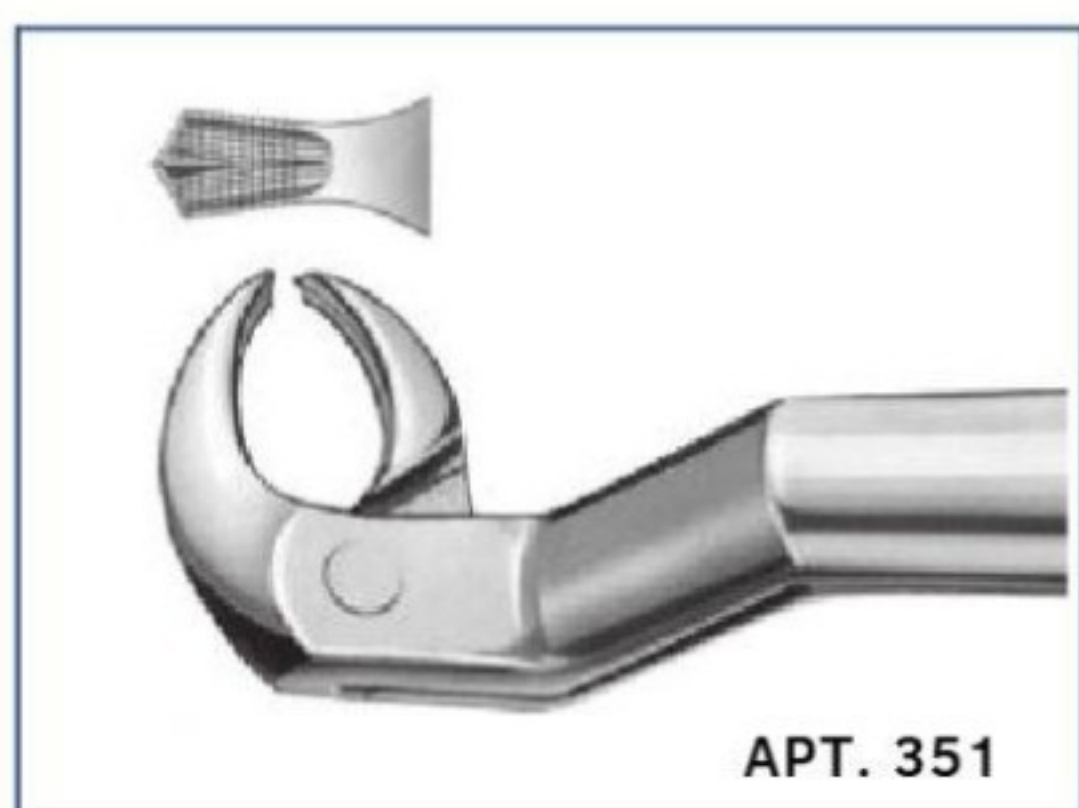


АРТ. 351

ПОЗОЛОЧЕННАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ
РУЧКА НИЖНИЕ МОЛЯРЫ ПРАВЫЕ




АРТ. 300

ОБЛЕГЧЕННАЯ РУЧКА
ВЕРХНИЕ КОРНЕВЫЕ

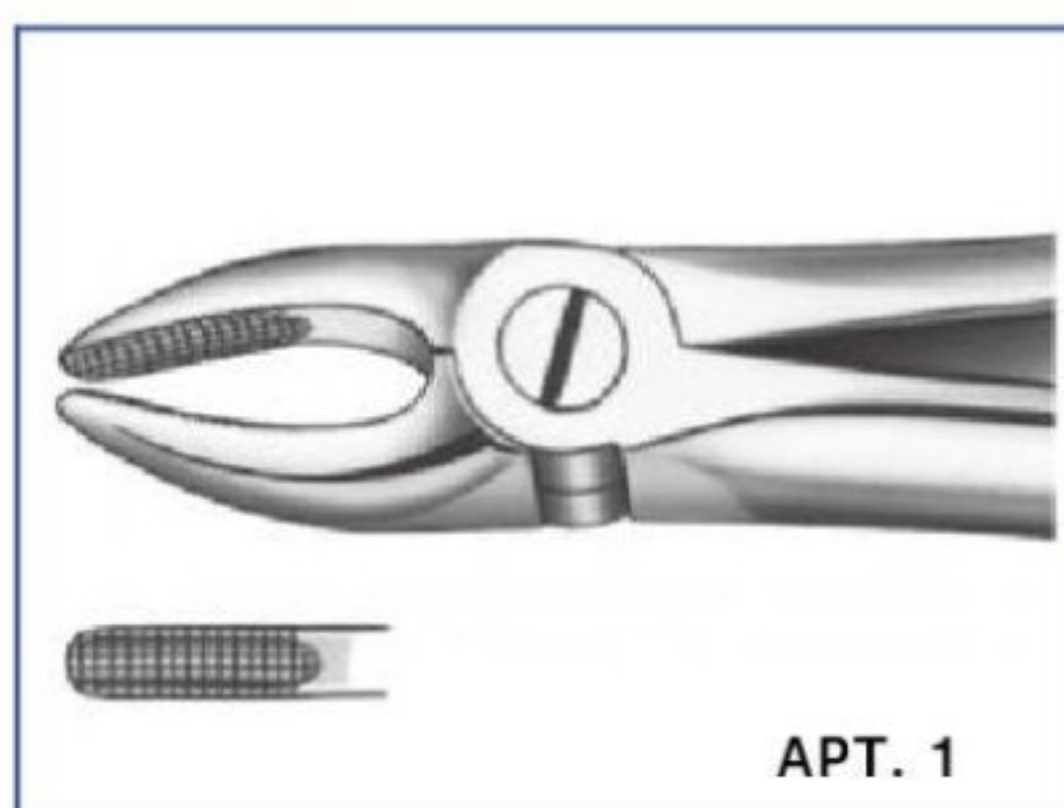


АРТ. 1

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА, ВЕРХНИЕ
РЕЗЦЫ/КЛЫКИ

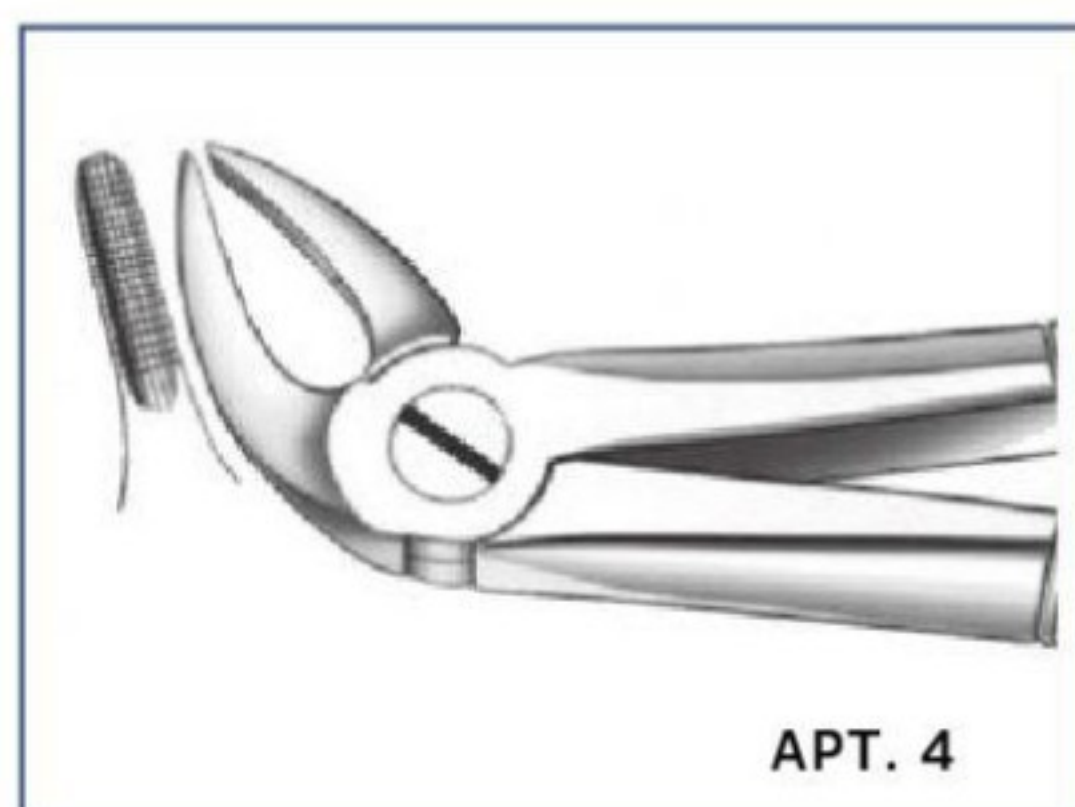


АРТ. 4

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
НИЖНИЕ РЕЗЦЫ/КЛЫКИ

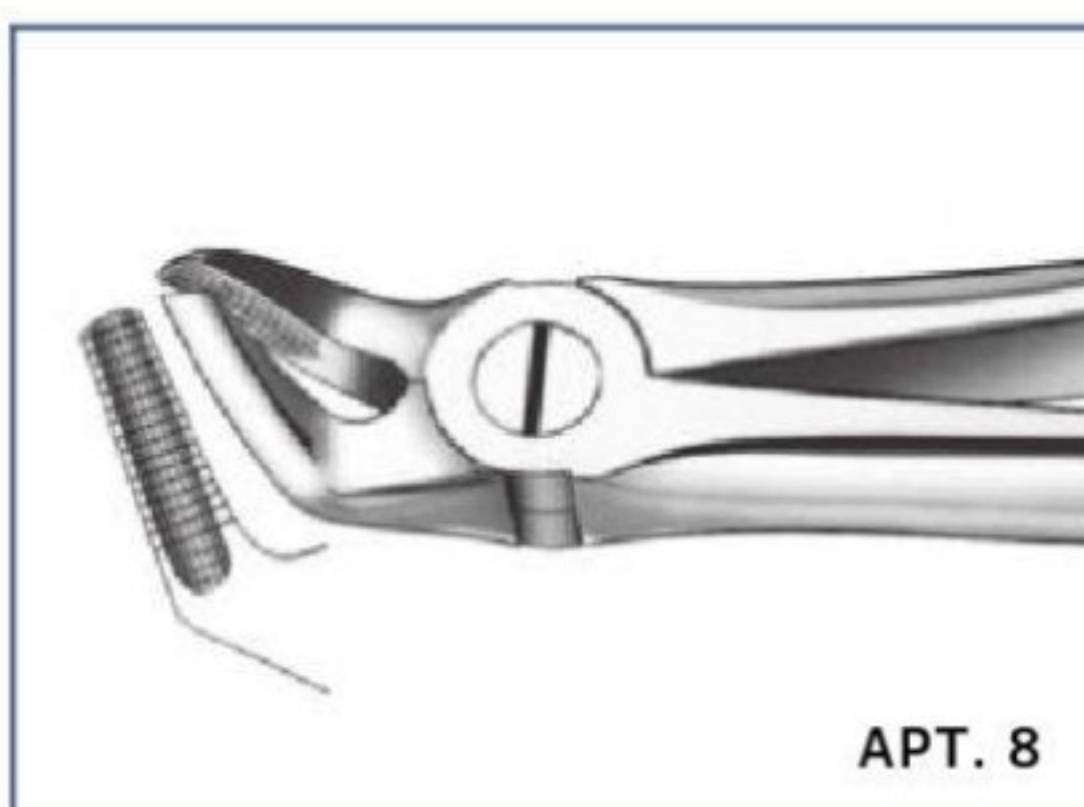


АРТ. 8

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА, НИЖНИЕ
РЕЗЦЫ

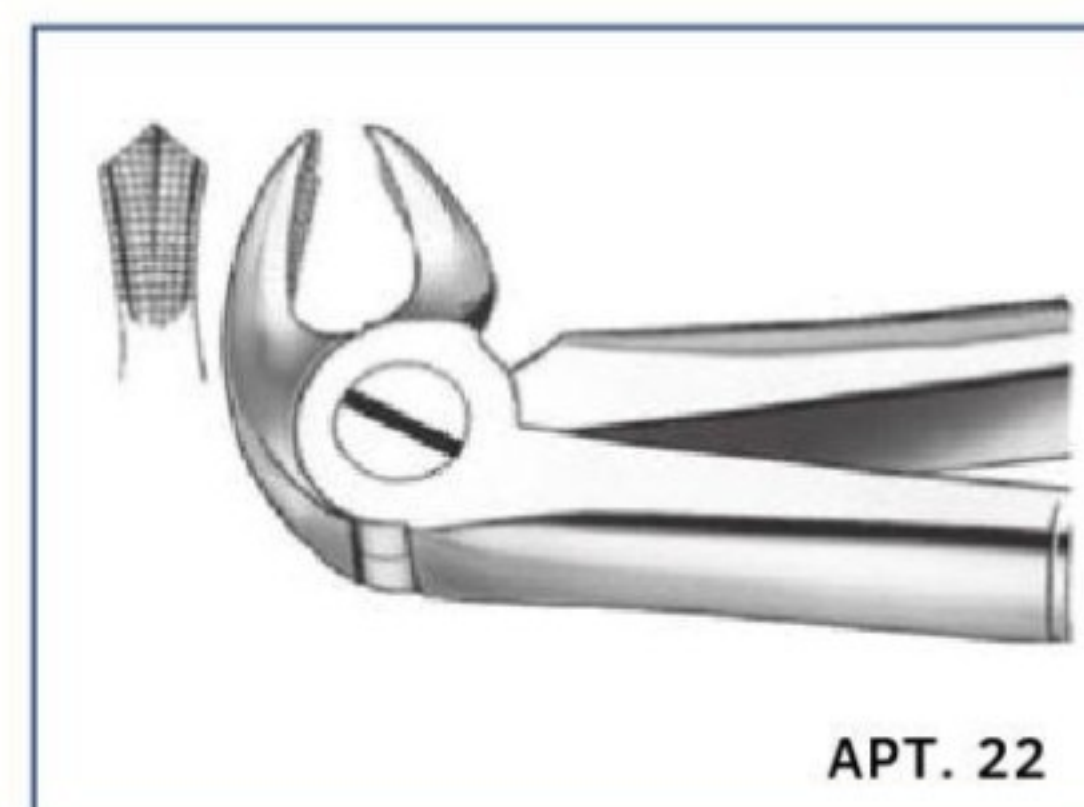


АРТ. 22

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА, НИЖНИЕ
МОЛЯРЫ

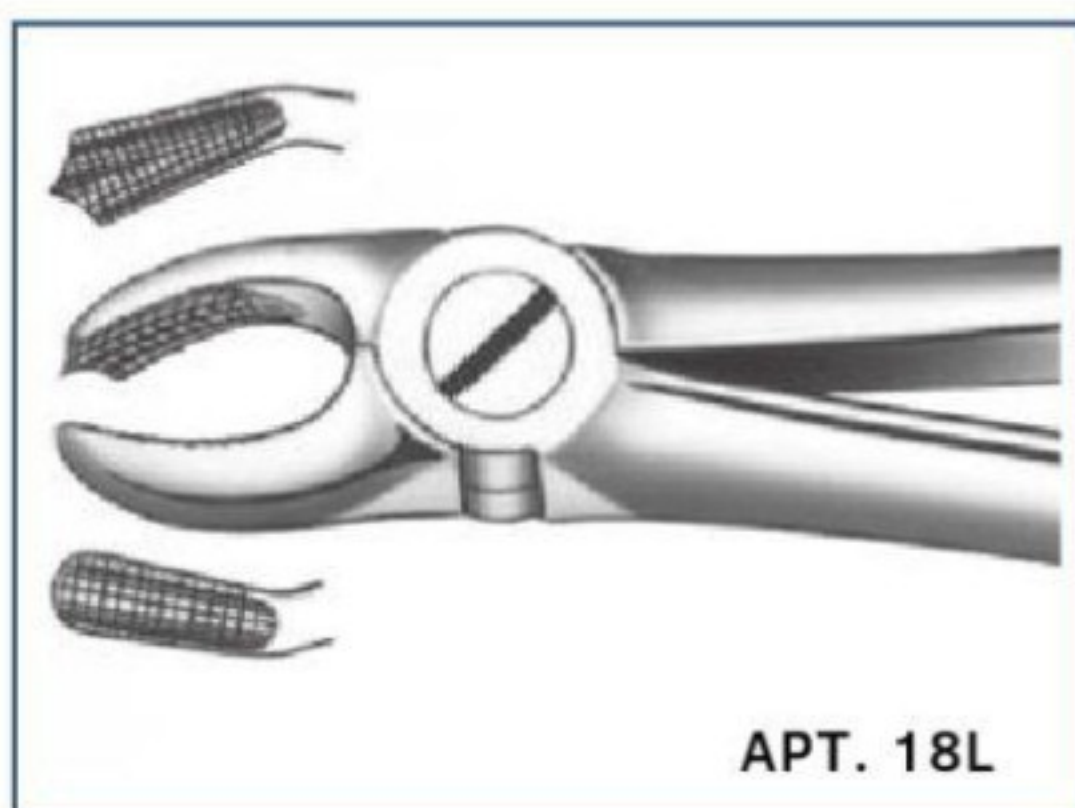


АРТ. 18L

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА ВЕРХНИЕ
МОЛЯРЫ, ЛЕВЫЕ

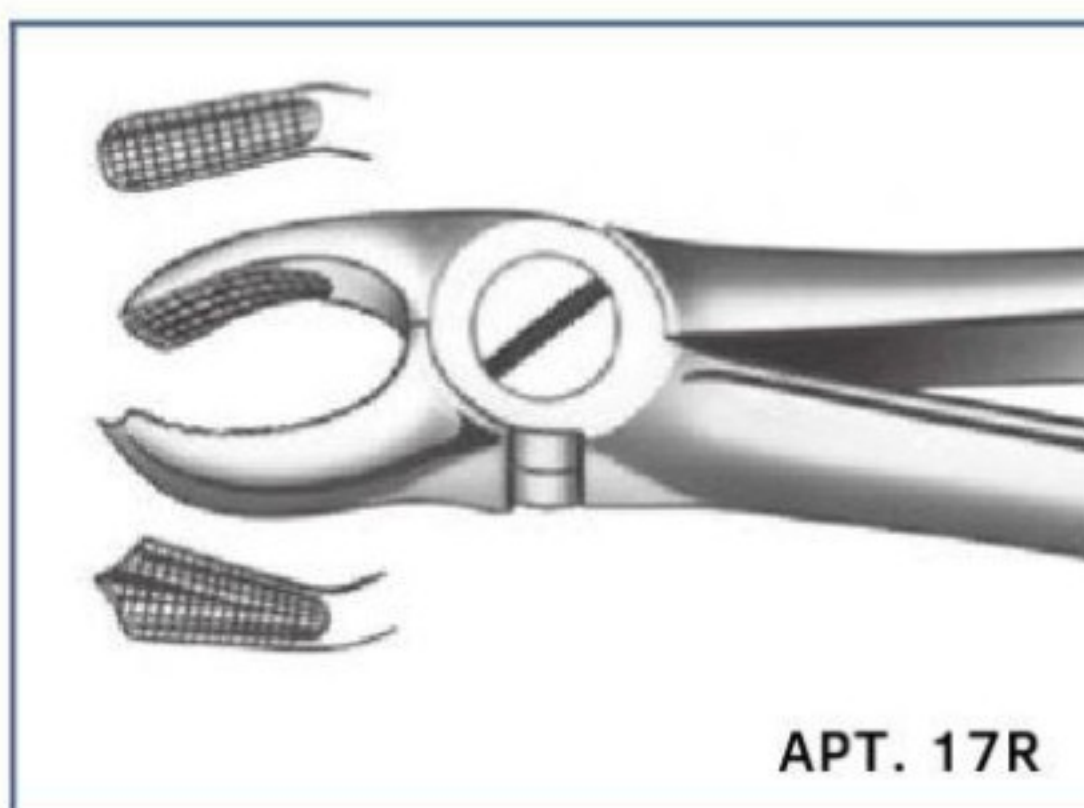

АРТ. 17R

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
ВЕРХНИЕ МОЛЯРЫ, ПРАВЫЕ

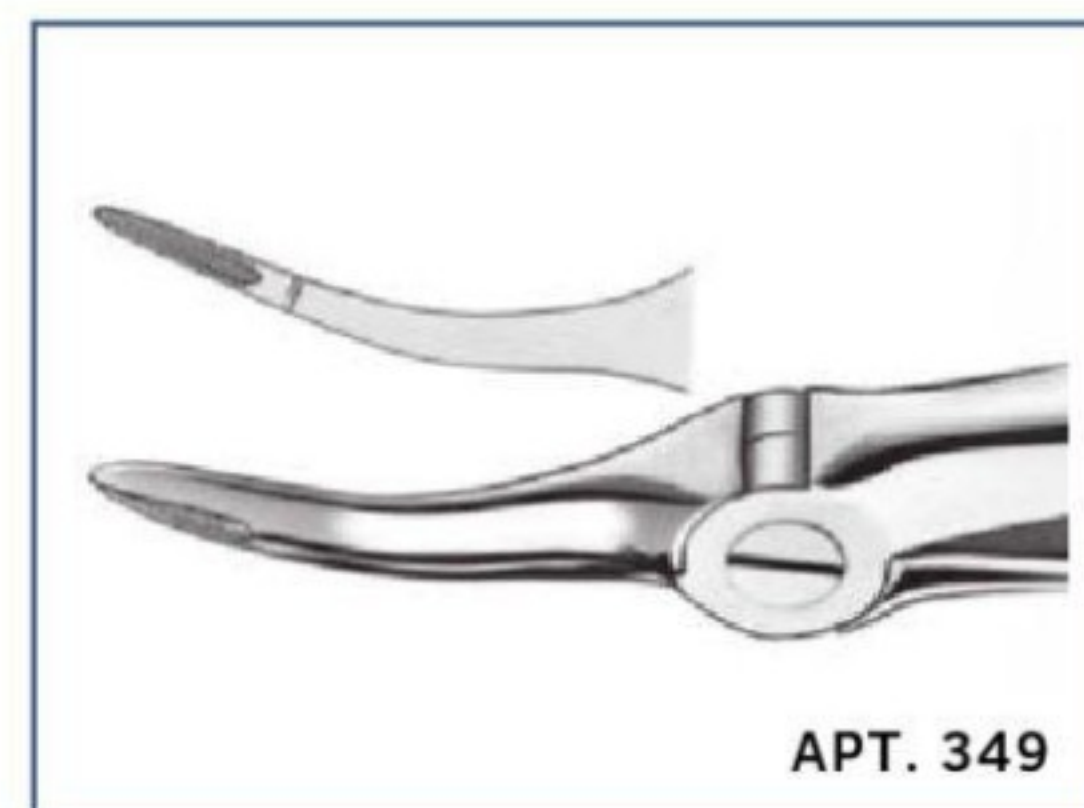

АРТ. 349

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЕРХНИХ
КОРНЕВЫХ ЗУБОВ




АРТ. 19

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА, ВЕРХНИЕ
МОЛЯРЫ ТРЕТЬИ




АРТ. 20

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
НИЖНИЕ МОЛЯРЫ

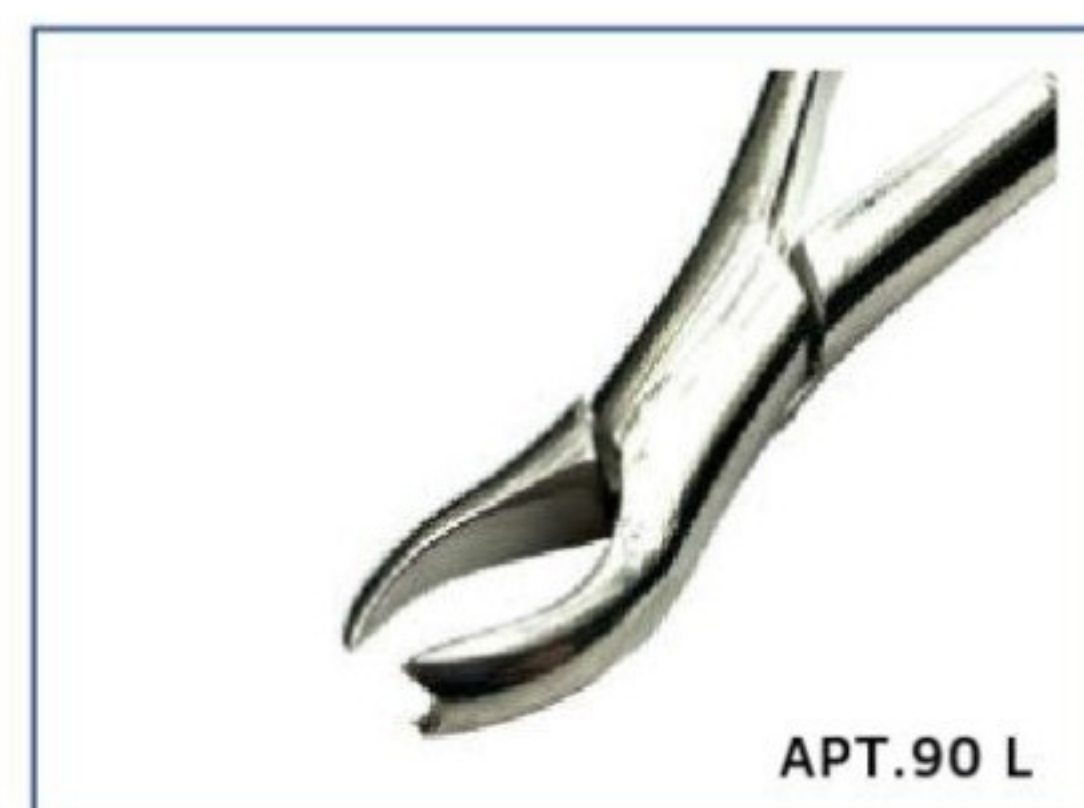

АРТ. 90 L

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА ВЕРХНИЕ
МОЛЯРЫ, ЛЕВЫЕ

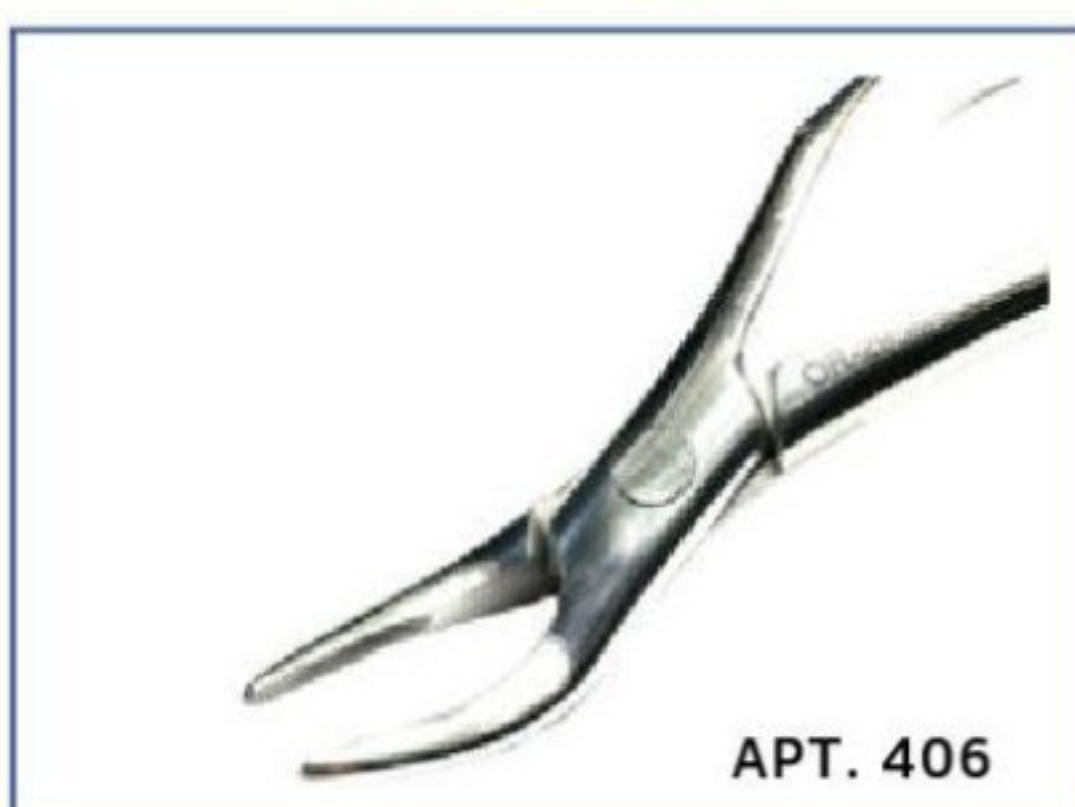

АРТ. 406

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
ВЕРХНИЕ КОРНЕВЫЕ




АРТ. 33M

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
НИЖНИЕ КОРНЕВЫЕ




АРТ. 51M

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
ВЕРХНИЕ КОРНЕВЫЕ

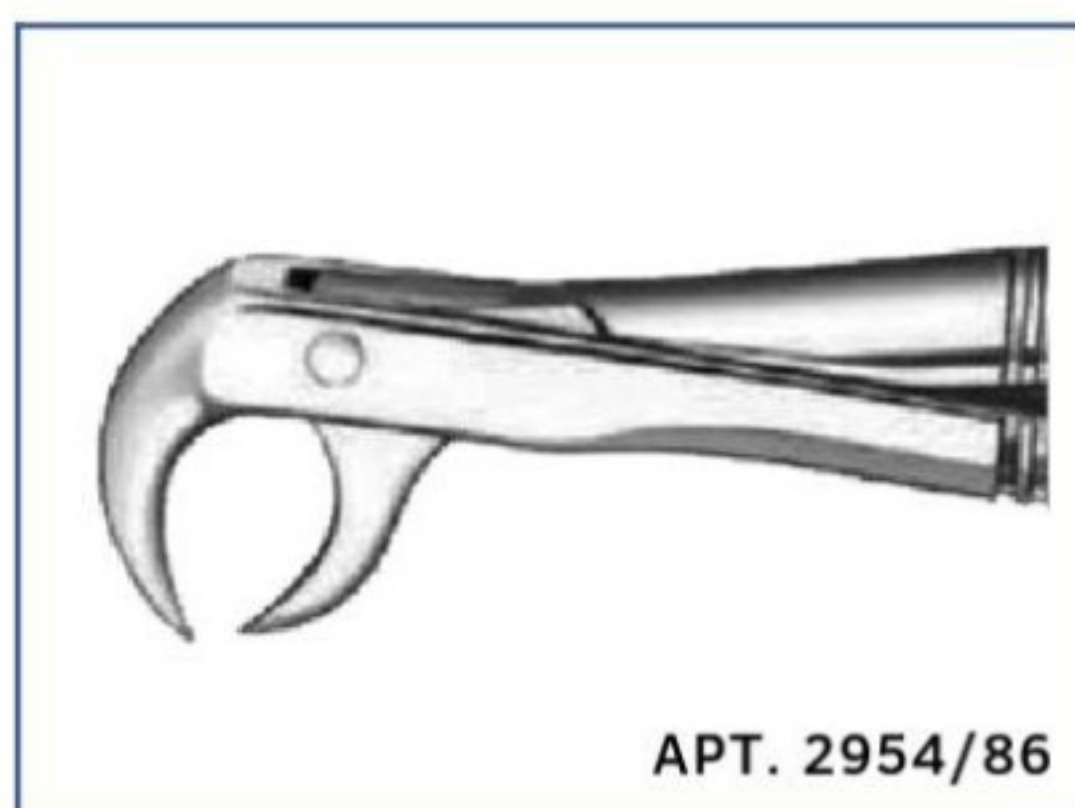


АРТ. 2954/86

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
НИЖНИЕ МОЛЯРЫ

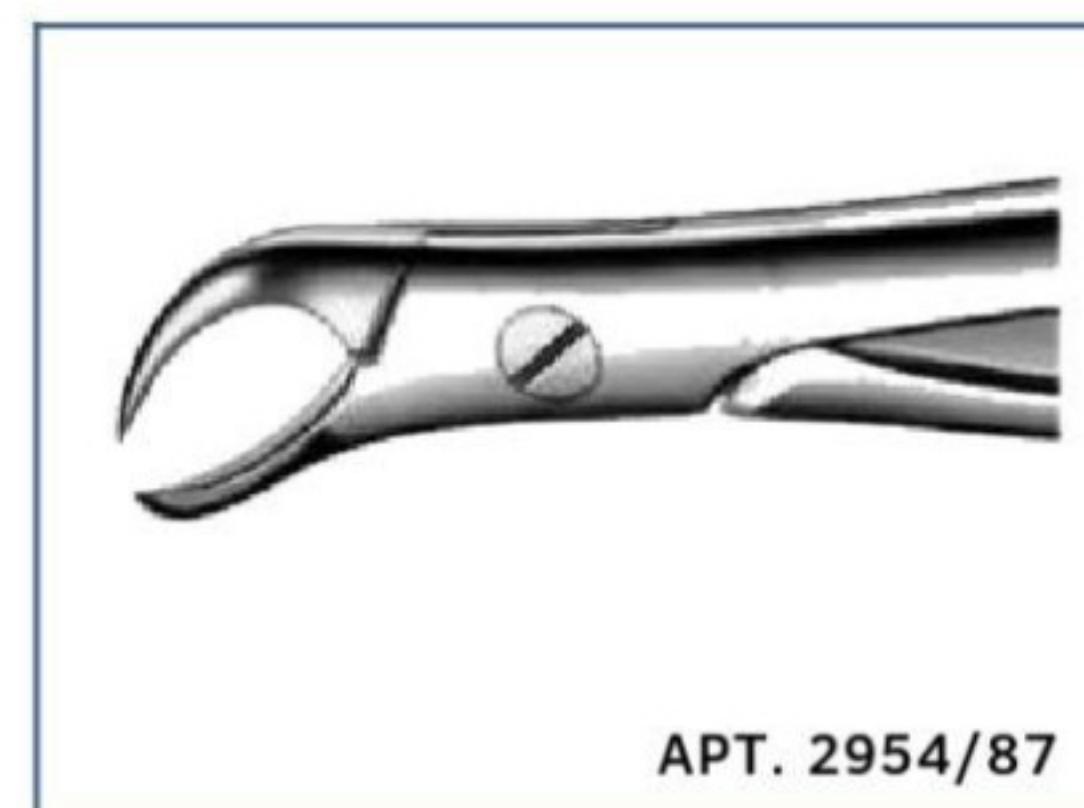


АРТ. 2954/87

СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
НИЖНИЕ МОЛЯРЫ

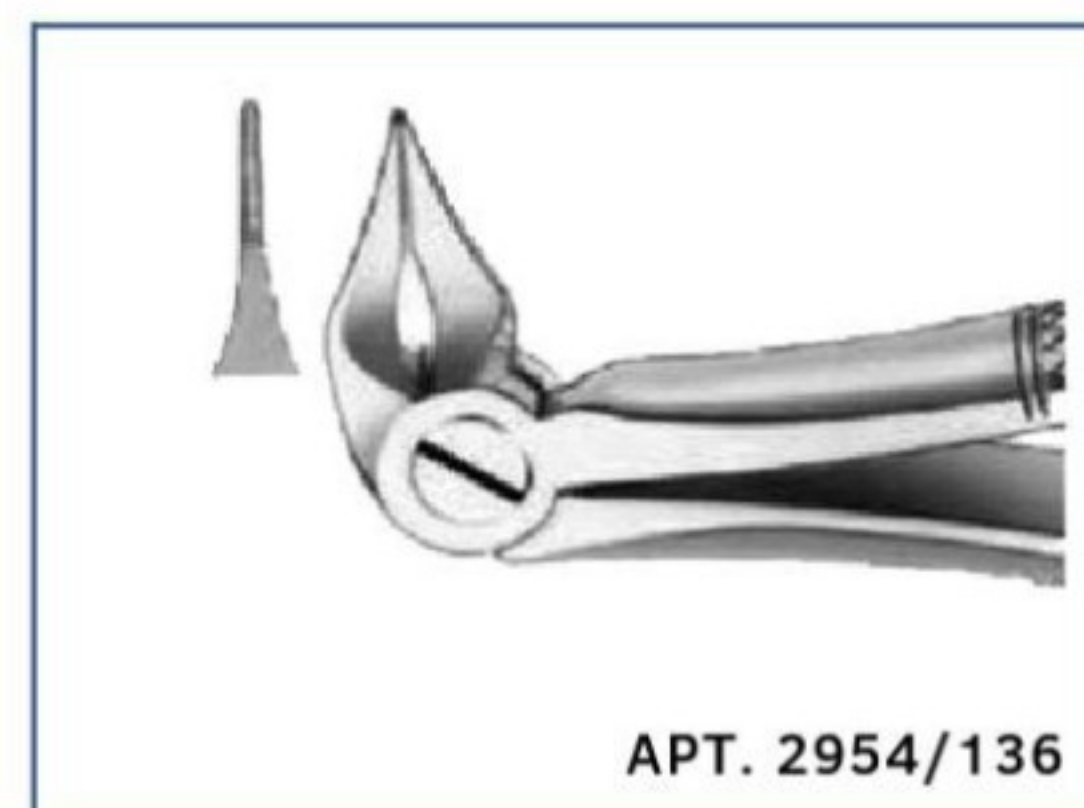

АРТ. 2954/136


СТАНДАРТНАЯ РУЧКА
НИЖНИЕ КОРНЕВЫЕ

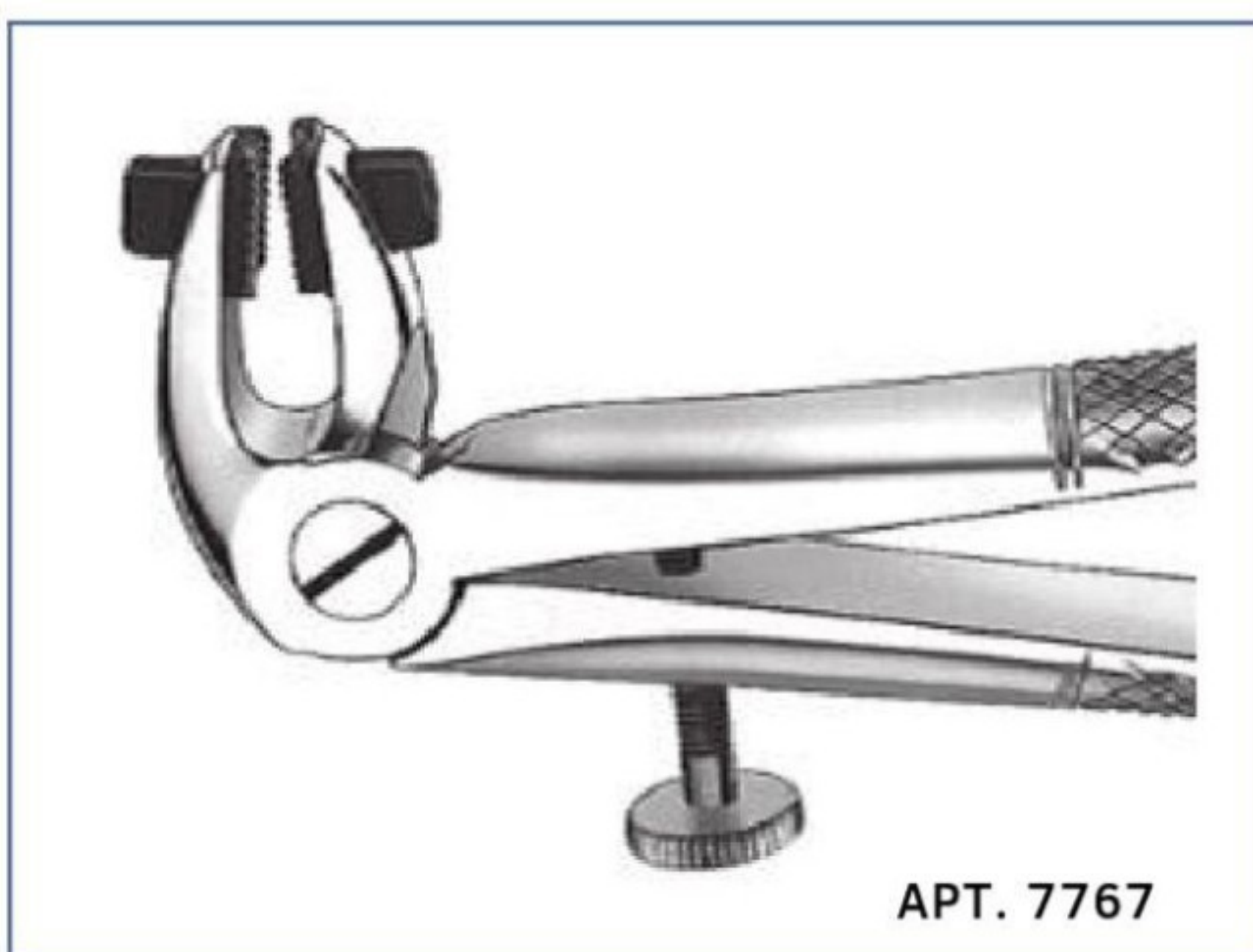

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НИЖНИХ КРОНОК



ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРОНОК И МОСТОВ
(СМЕННЫЕ ЧАСТИ)

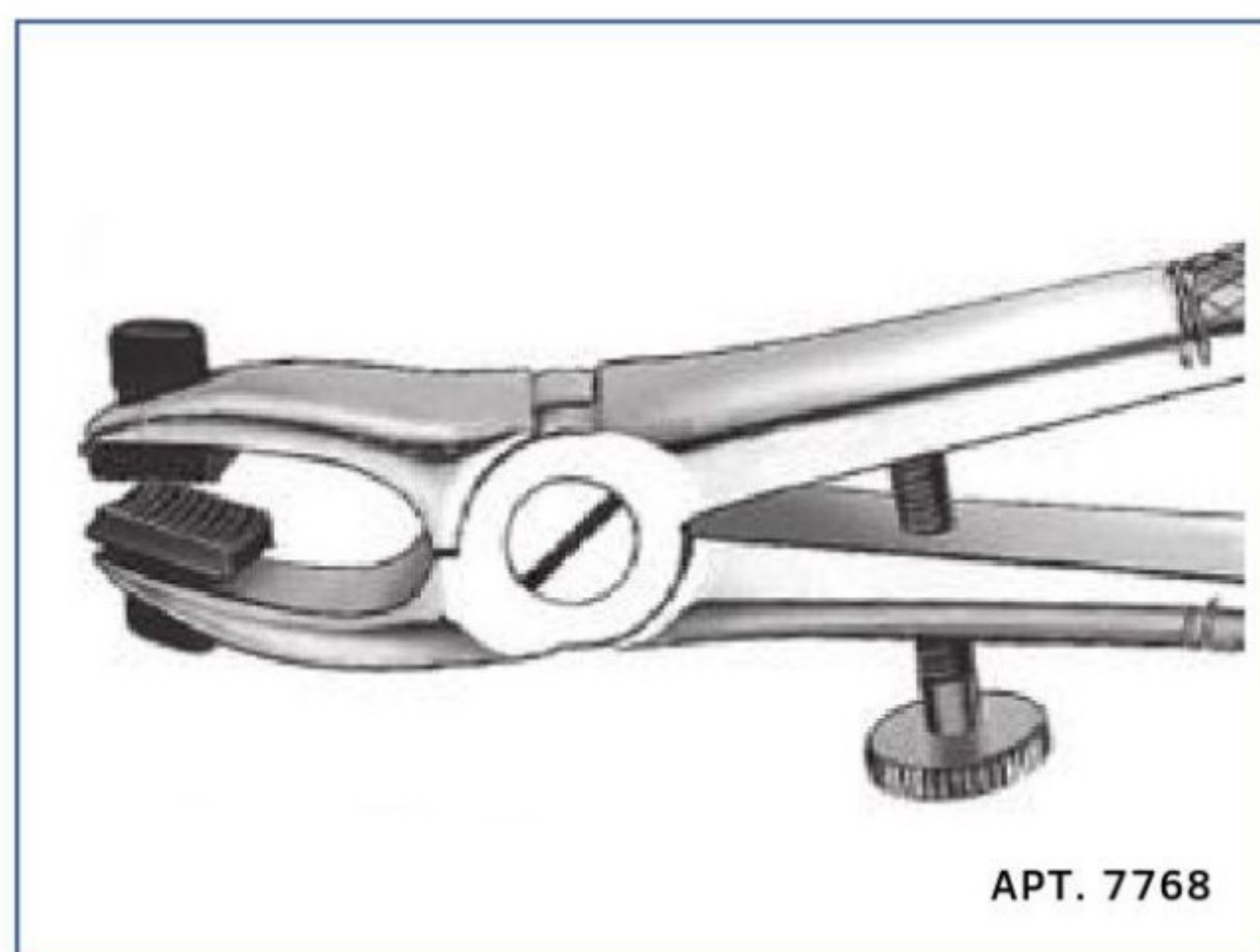


ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЕРХНИХ КРОНОК




ЩИПЦЫ ДЛЯ РАЗДВИЖЕНИЯ КРАЁВ КРОНКИ




ЗАЖИМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРОНОК

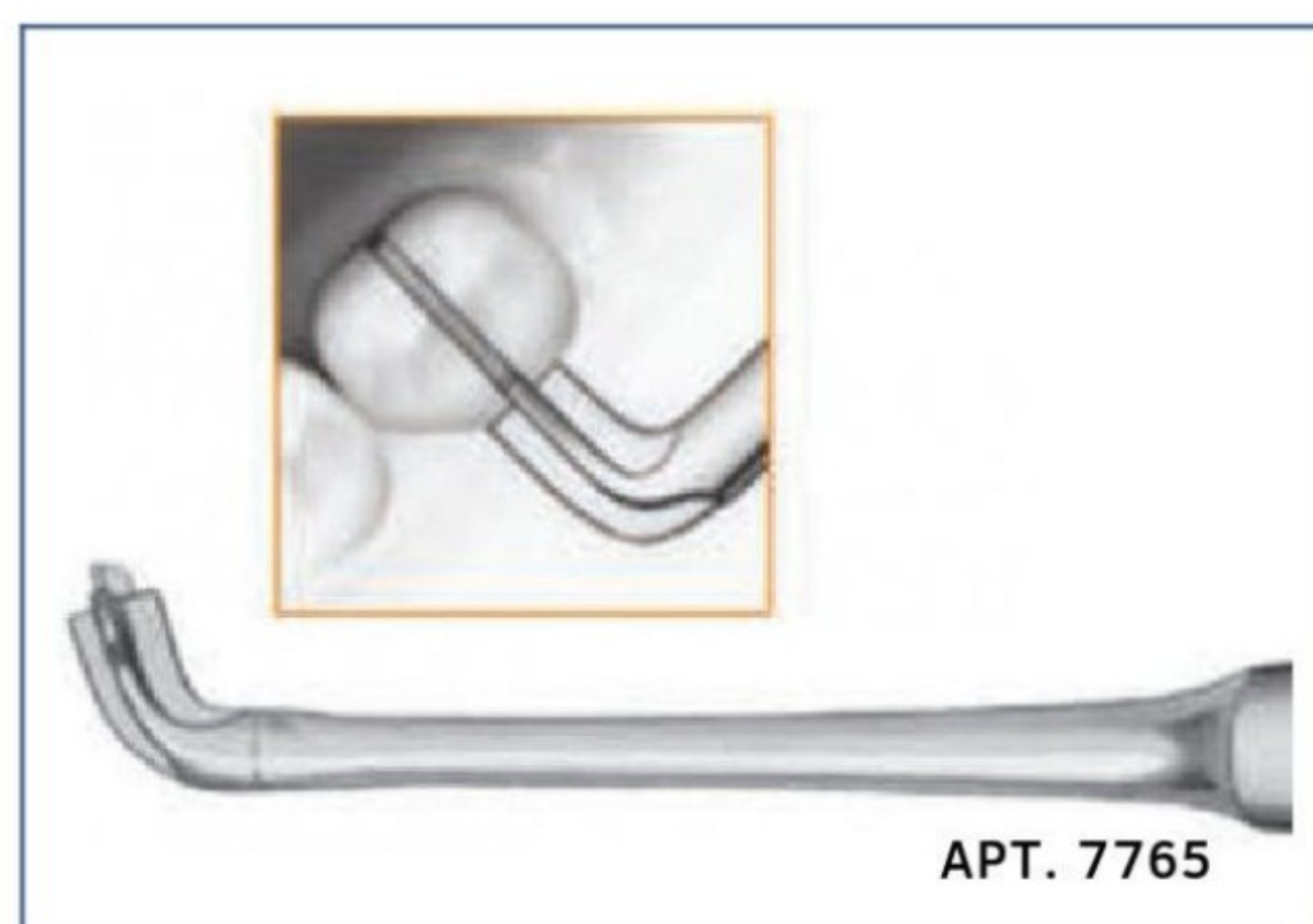


ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ КРОНОК

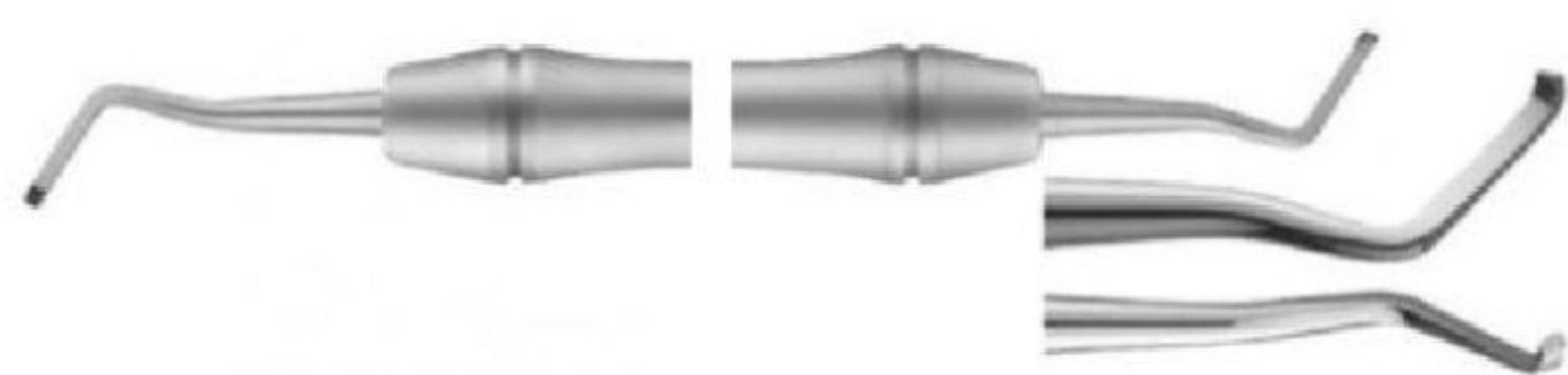

7737/161-62 Финишный
Эмалевый нож, мезиальный.

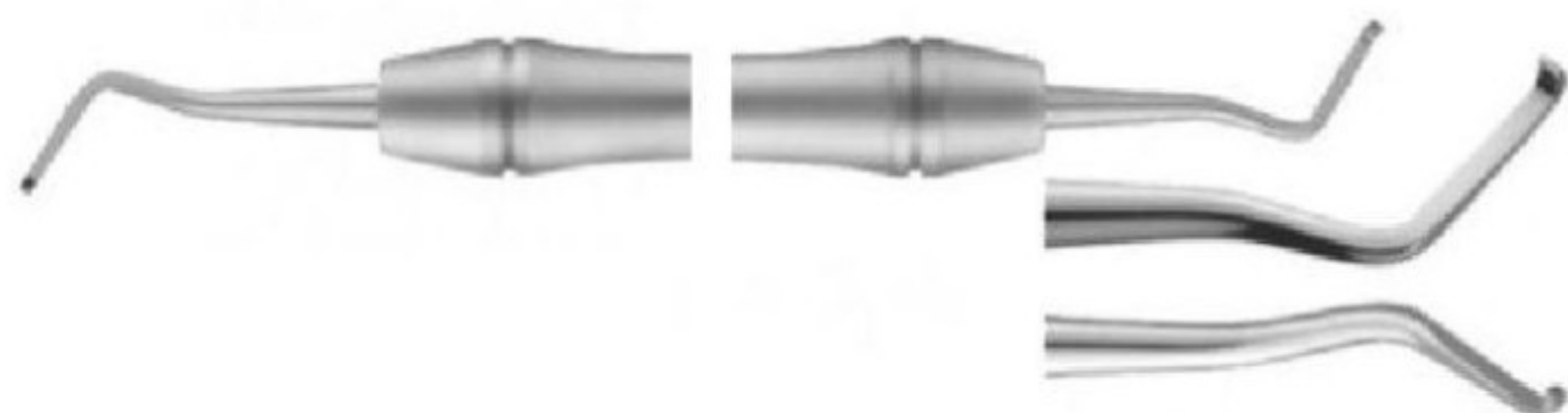

7437/165-66 Финишный
Эмалевый, дистальный нож.

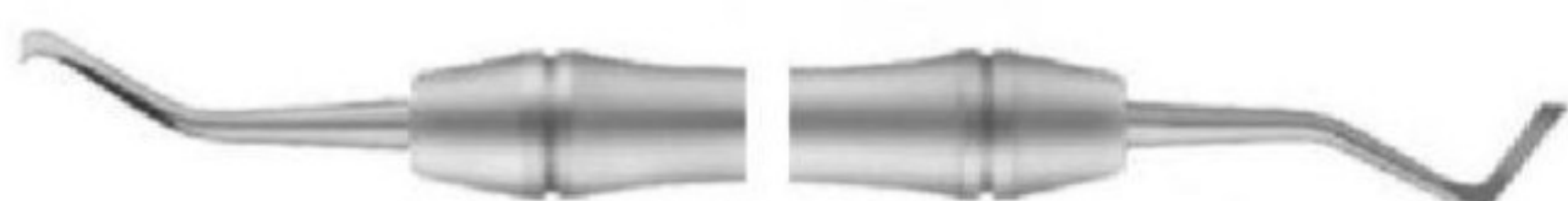

7436/26 Эмалевый нож
дистальный.



7436/27 Эмалевый нож
мезиальный.

АРТ. 6020 ЭМАЛЕВЫЙ НОЖ "ORBAN"



АРТ. 6016 ЭМАЛЕВЫЙ НОЖ "BUCK"



АРТ. 6017 ЭМАЛЕВЫЙ НОЖ "KRIKLAND"



АРТ. 2971 НАБОР ЭЛЕВАТОРОВ 9 ИНСТРУМЕНТОВ



АРТ. 2973 НАБОР ЭЛЕВАТОРОВ 8 ИНСТРУМЕНТОВ



АПТ. 2972 НАБОР ЭЛЕВАТОРОВ 10 ИНСТРУМЕНТОВ



ЭЛЕВАТОРЫ "BEIN"



АПТ. 2011

|2mm|



АПТ. 2011/1

|3mm|



АПТ. 2011/2

|4mm|



АПТ. 2011/3

|5mm|



АПТ. 2011/4

|2mm|



АПТ. 2011/5

|3mm|



АПТ. 2011/6

|4mm|




АПТ. 2011/7

|5mm|




АПТ. 2011/8

ЭЛЕВАТОРЫ "АРЕХО"

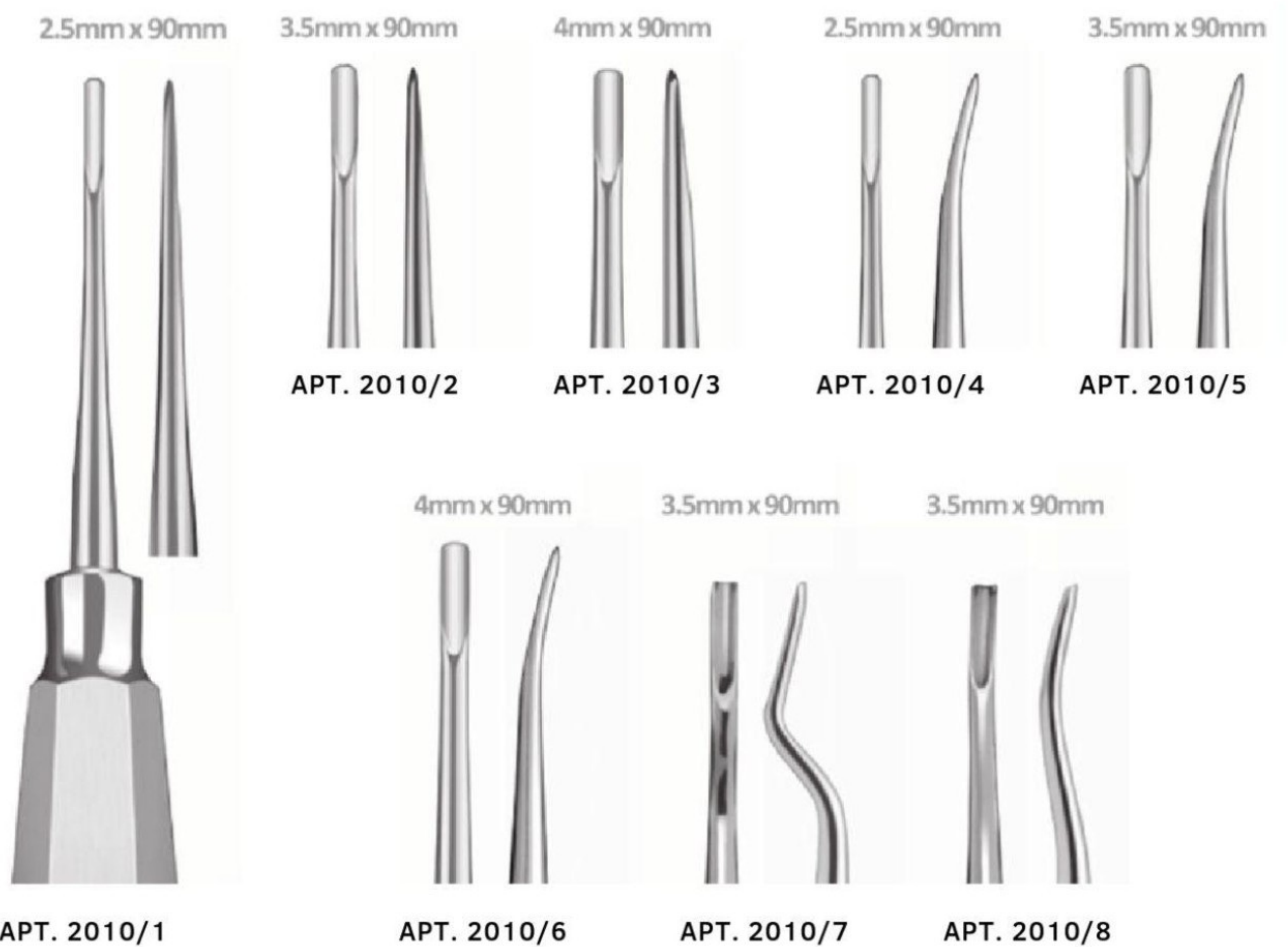



ЭЛЕВАТОРЫ "FLOHR"

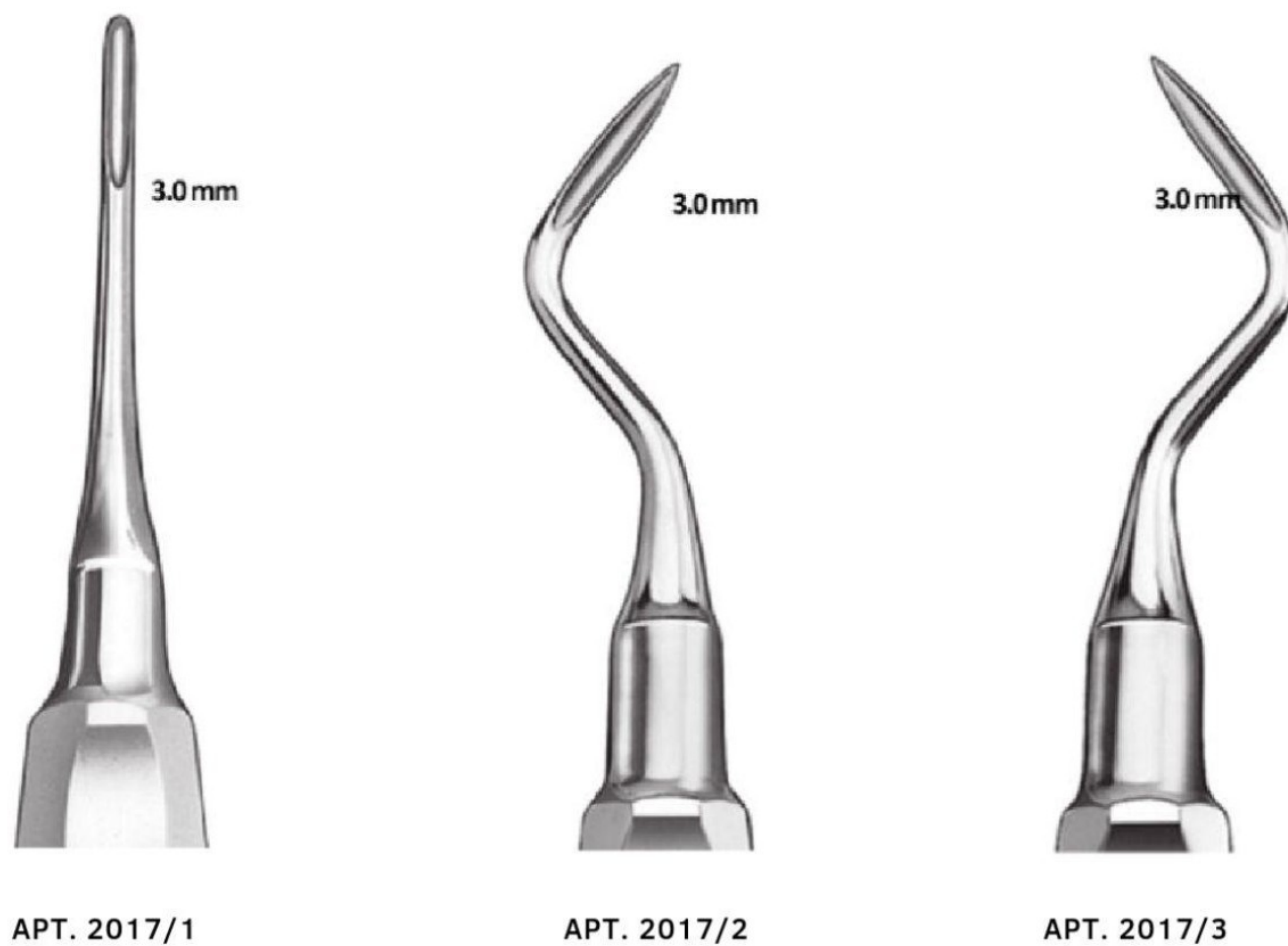

ЭЛЕВАТОРЫ "APICAL"



ЭЛЕВАТОРЫ "HYLIN"

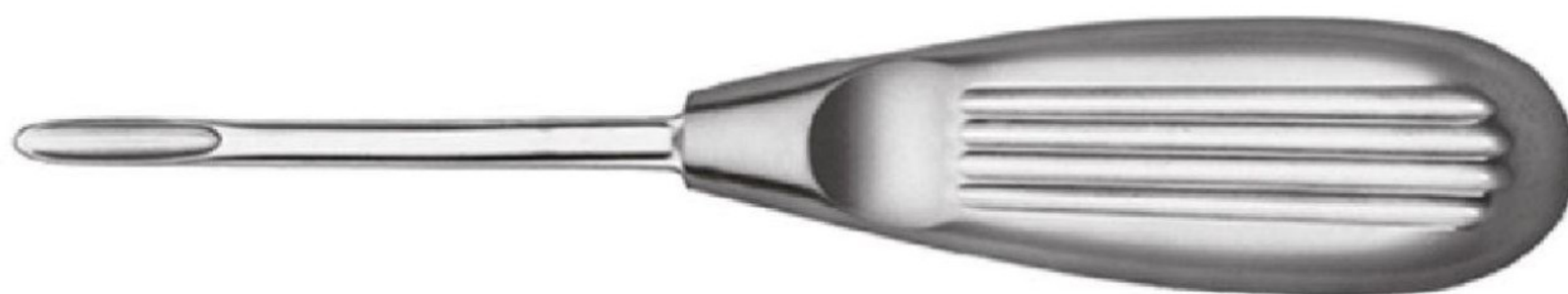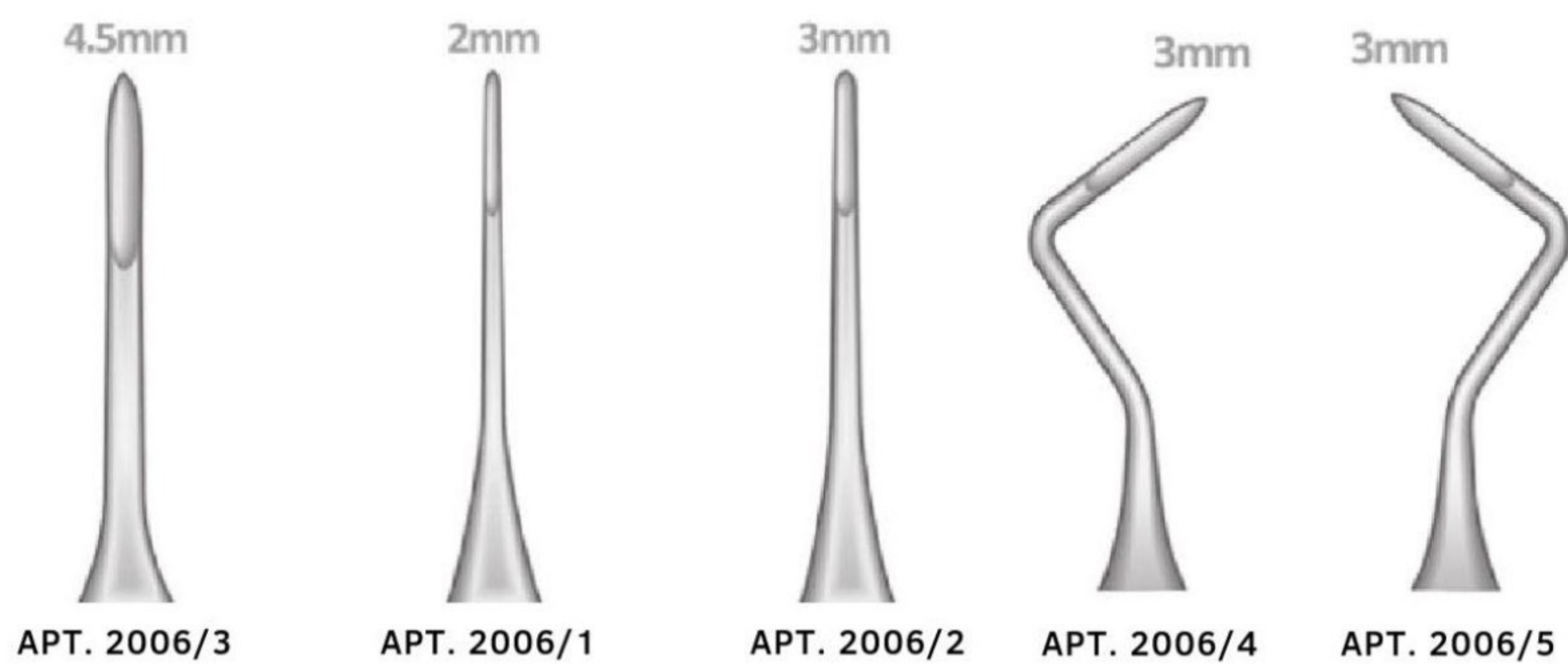

ЭЛЕВАТОРЫ "FRIEDMAN"

APT. 2007/1



APT. 2007/2



APT. 2008/1



APT. 2008/2



APT. 2008/3



ЭЛЕВАТОРЫ "SELDIN"

APT. 2045/4R



APT. 2045/4L



ЭЛЕВАТОРЫ "CRYER"

APT. 2041/25



APT. 2041/26



ЭЛЕВАТОРЫ "BERNARD"




APT. 2018/1




APT. 2018/2

ЭЛЕВАТОРЫ "BERTEN"

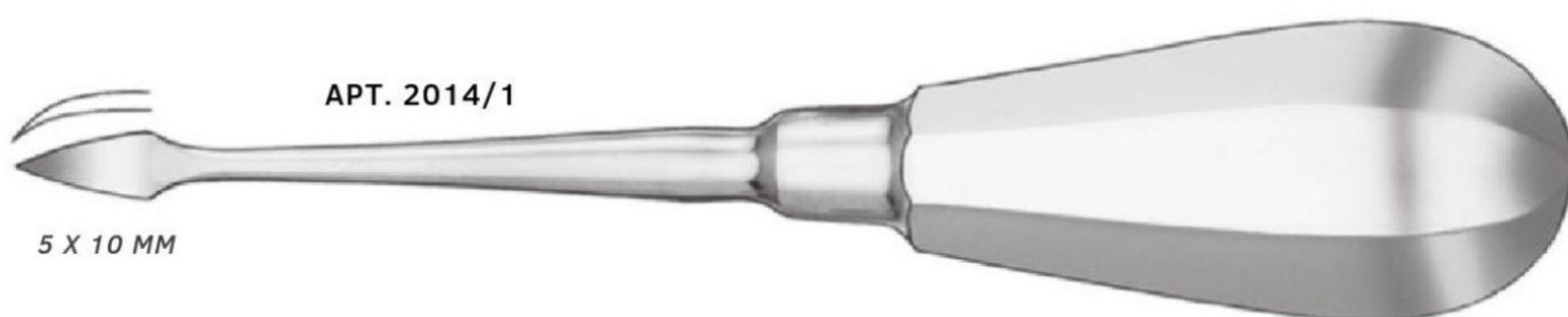

APT. 2014/1

5 X 10 MM

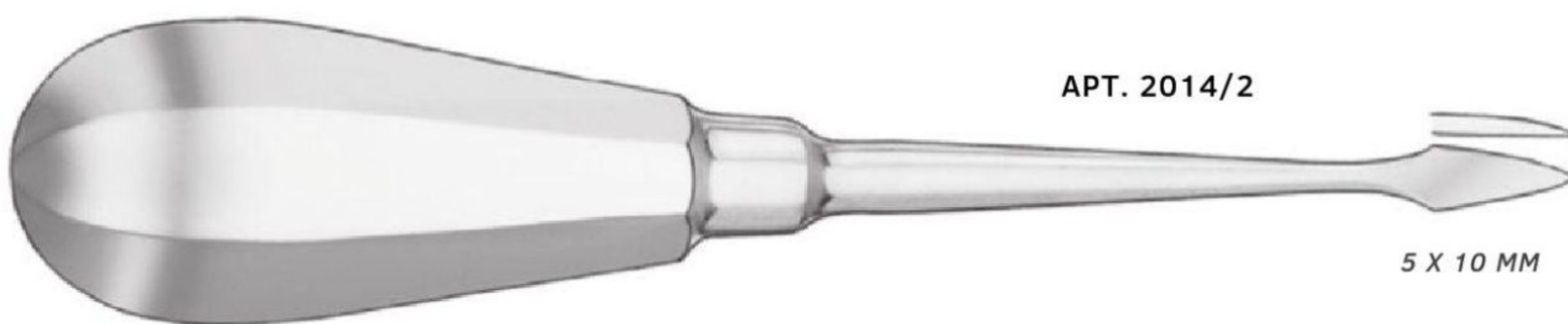

APT. 2014/2

5 X 10 MM

ЭЛЕВАТОРЫ "BERNARD"



APT. 2012/1



APT. 2012/2



ЭЛЕВАТОРЫ "KOOP"

4mm



APT. 2013/1

4mm



APT. 2013/2

3mm



APT. 2013/3

3mm



APT. 2013/4

ЭЛЕВАТОРЫ "LONDON HOSPITAL"

4.0mm



APT. 2015/2

5.0mm



APT. 2015/1

4.0mm



APT. 2015/3

ЭЛЕВАТОРЫ "WINTER"



APT. 2020/14L



APT. 2020/14R

ЭЛЕВАТОРЫ "KOOP"

4mm



APT. 2013/1

4mm



APT. 2013/2

3mm



APT. 2013/3

3mm



APT. 2013/4

ЭЛЕВАТОРЫ "LONDON HOSPITAL"

4.0mm



APT. 2015/2

5.0mm



APT. 2015/1

4.0mm



APT. 2015/3

ЭЛЕВАТОРЫ "WINTER"




APT. 2020/14L




APT. 2020/14R

АРТ. 2931 НАБОР ЛЮКСАТОРОВ С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ 10 ШТ.

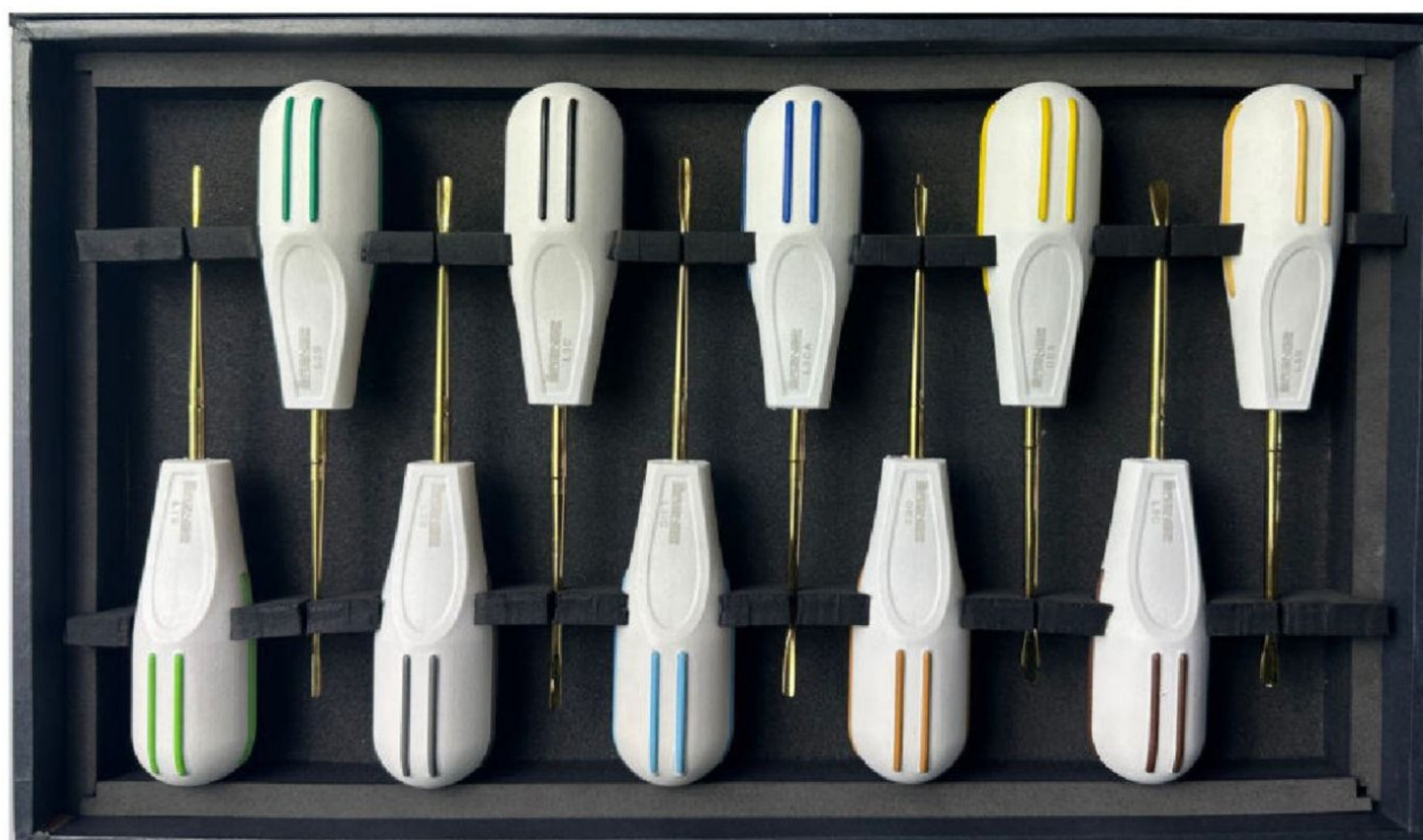

АРТ. 2932 НАБОР ЛЮКСАТОРОВ С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ 4 ШТ.

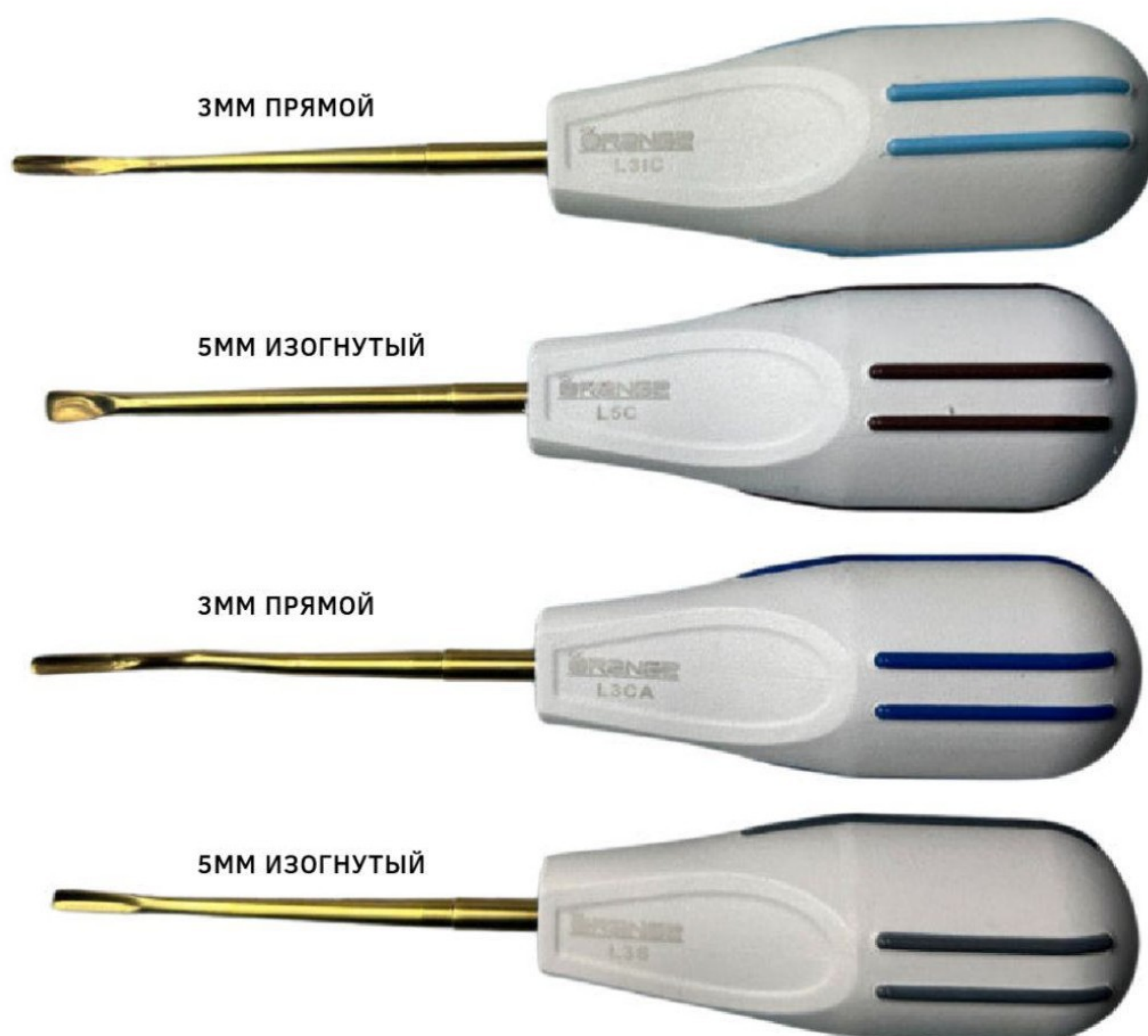

АРТ. 2053 НАБОР ЛЮКСАТОРОВ 4 ШТ. С КЮРЕТОЙ




АРТ. 2053 ЛЮКСАТОРЫ В АССОРТИМЕНТЕ




- арт. 2053/1 - люксатор прямой 2.5 mm
- арт. 2053/2 - люксатор прямой 3 mm
- арт. 2053/3 - люксатор прямой 4 mm
- арт. 2853/4 - люксатор прямой 5 mm
- арт. 2053/5 - люксатор изогнутый 2.5 mm
- арт. 2053/6 - люксатор изогнутый 3 mm
- арт. 2053/7 - люксатор изогнутый 4 mm
- арт. 2053/8 - люксатор изогнутый 5 mm

АРТ. 2054 НАБОР ЛЮКСАТОРОВ "POWER" 4 ШТ.

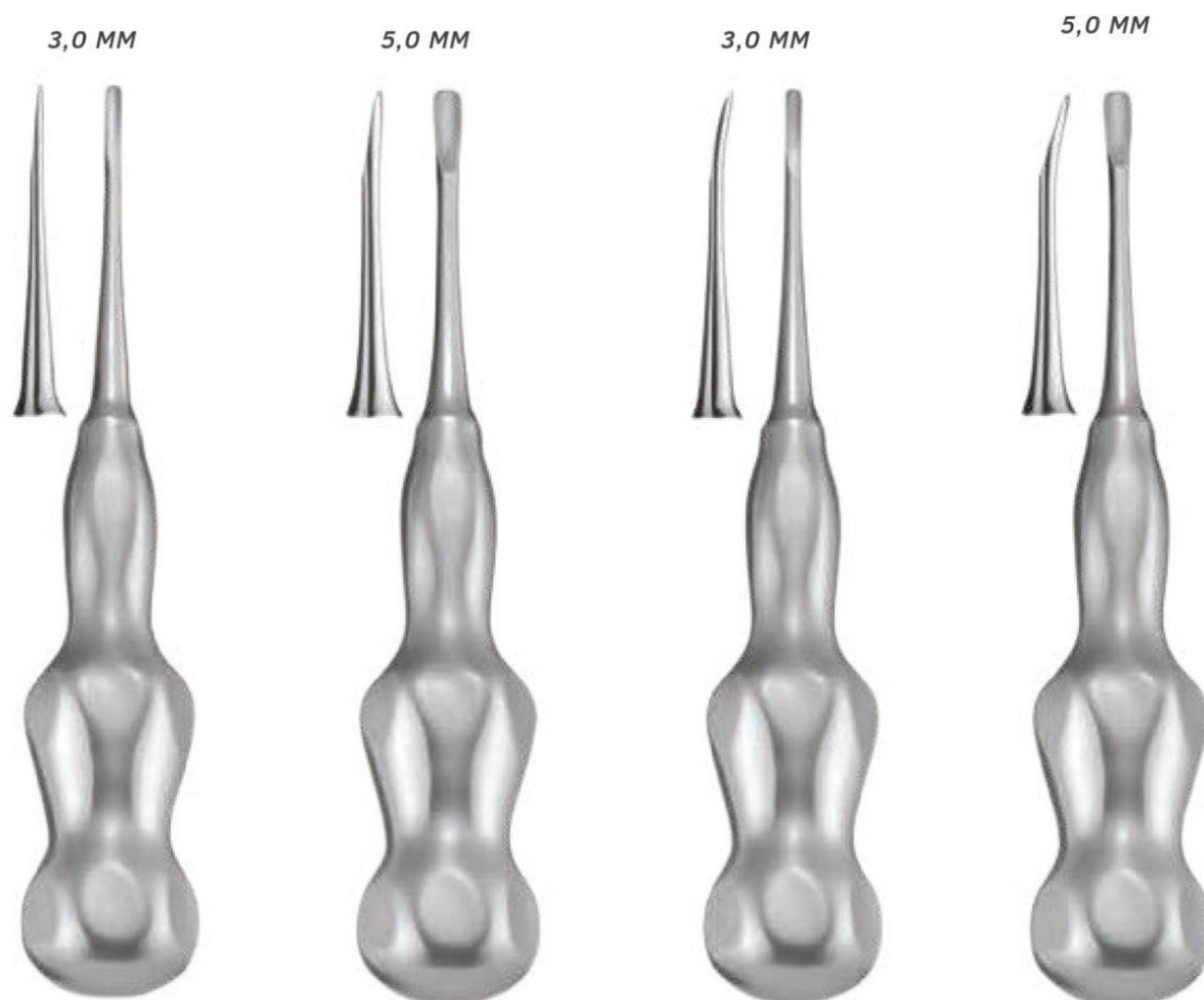


ЛЮКСАТОРЫ В АССОРТИМЕНТЕ

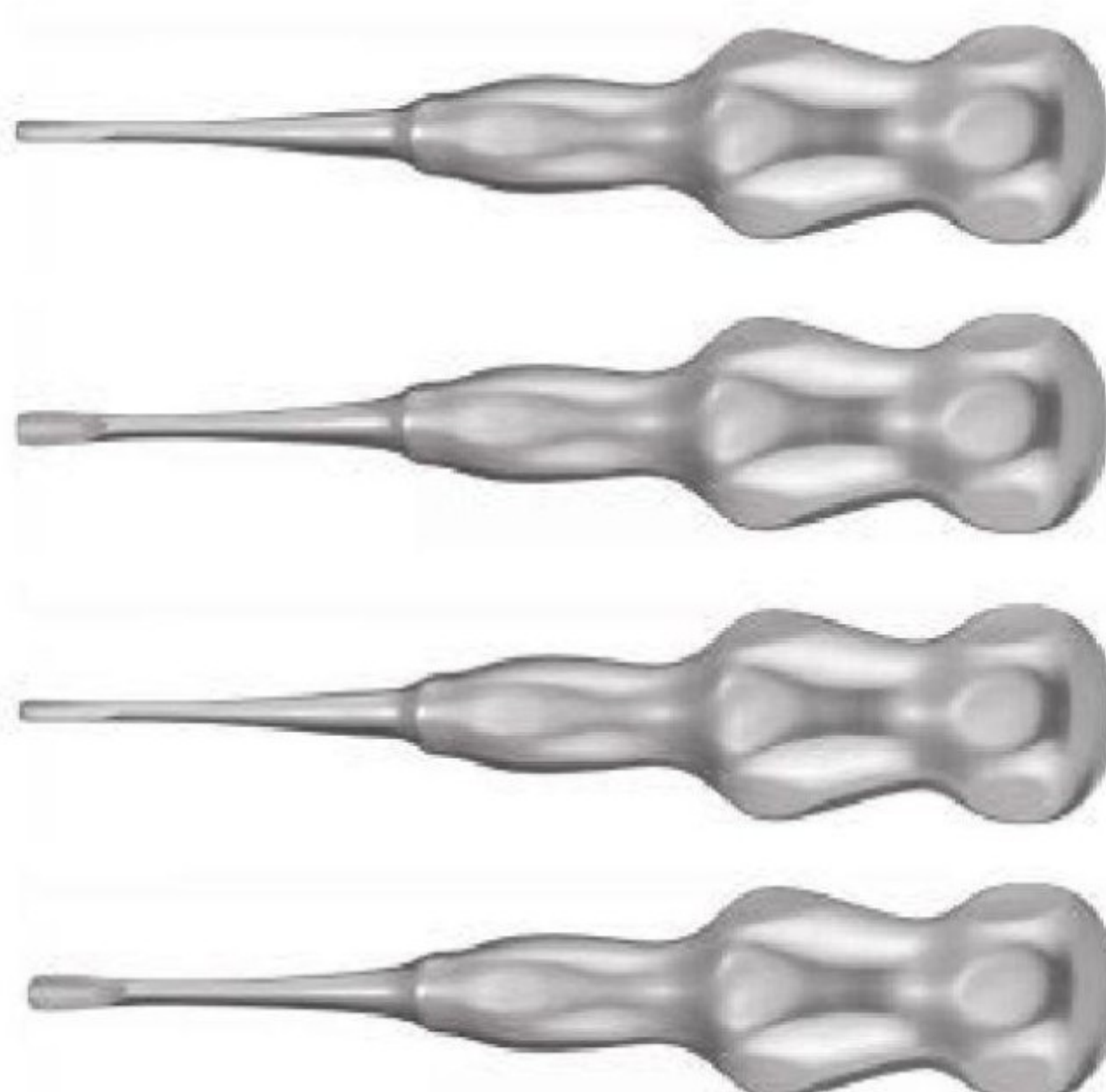

- арт. 2054/1 - прямой с синей ручкой 3 mm
- арт. 2054/2 - прямой с синей ручкой 5 mm
- арт. 2054/3 - изогнутый с синей ручкой 3 mm
- арт. 2054/4 - изогнутый с синей ручкой 5 mm

АРТ. 2841 НАБОР ЛЮКСАТОРОВ "POWER EX" 15 ШТ. В КАССЕТЕ

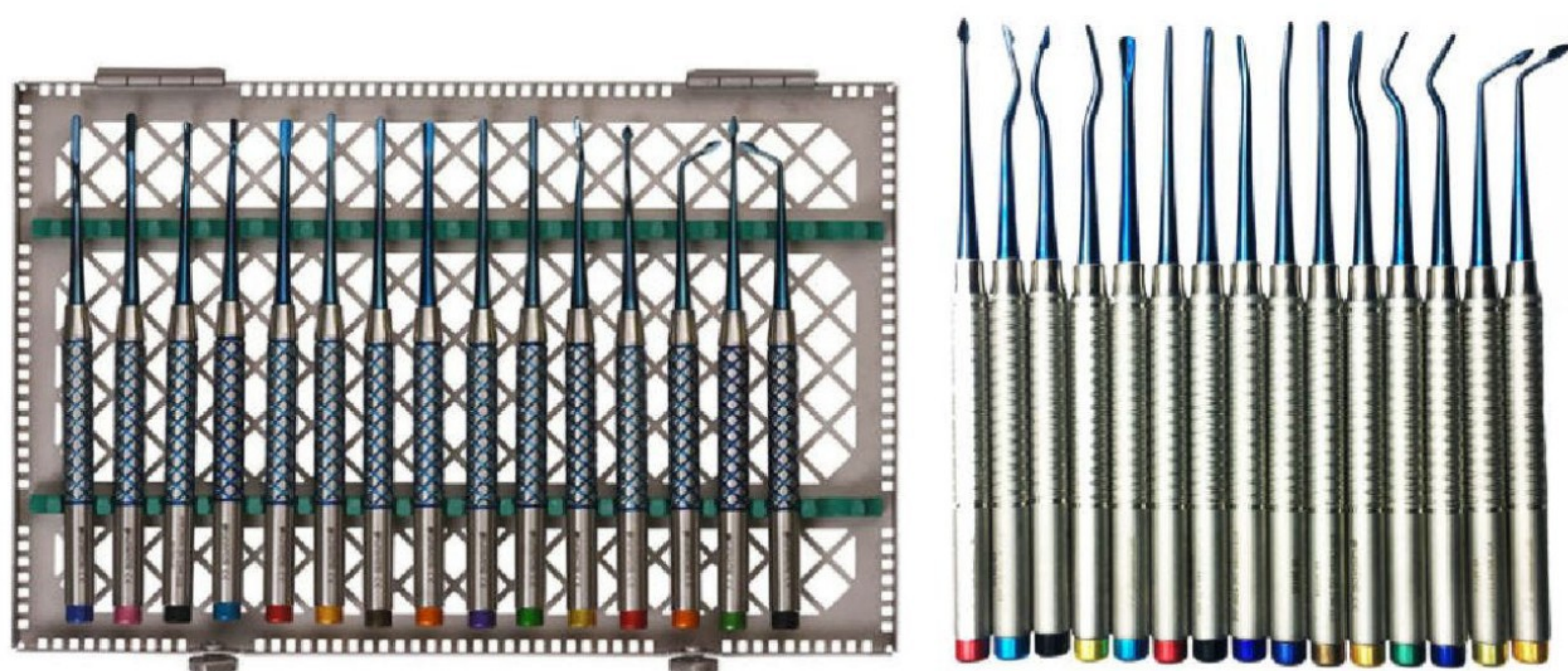

ЛЮКСАТОРЫ "POWER EX" В АССОРТИМЕНТЕ



OR 2841/02

OR 2841/04

OR 2841/10

OR 2841/08

OR 2841/07

OR 2843/3

OR 2843/2

OR 2843/1

OR 2843/5

OR 2843/4

OR 2841/09

OR 2841/05

OR 2841/01

OR 2841/03

OR 2841/06



СТЕРИЛИЗАЦИЯ (кассеты, боксы)



АПТ. 9962 КАССЕТА 16 ИНСТРУМЕНТОВ,
262MM*229MM*32MM



АПТ. 9971 КАССЕТА 8 ИНСТРУМЕНТОВ,
175MM*130MM*22MM



АПТ. 9952 КАССЕТА 10 ИНСТРУМЕНТОВ,
200MM*160MM*25MM



АПТ. 9951 КАССЕТА 5 ИНСТРУМЕНТОВ,
190MM*83MM*25MM



АПТ. 9961 КАССЕТА 16 ИНСТРУМЕНТОВ,
282MM*183MM*25MM



АПТ. 9963 КАССЕТА 16 ИНСТРУМЕНТОВ,
282MM*183MM*25MM



KAVO
Dental Excellence


НАБОР ДЛЯ БЕЗУДАРНОЙ ФИКСАЦИИ МЕМБРАН

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Наконечник KAVO (SMARTMATIC S53)
- Пинодержатель (короткий или длинный)
- Кассета для стерилизации и хранения пинов
- Упаковка пинов 0.6 mm (в упаковке 25 шт.)

ПИНЫ НА ВЫРОР:

- Высота рабочей части пина: 2,0 mm; 2,7 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7mm; 8mm; 10mm - с диаметром стержня пина: 0,6 mm и 0,8 mm.

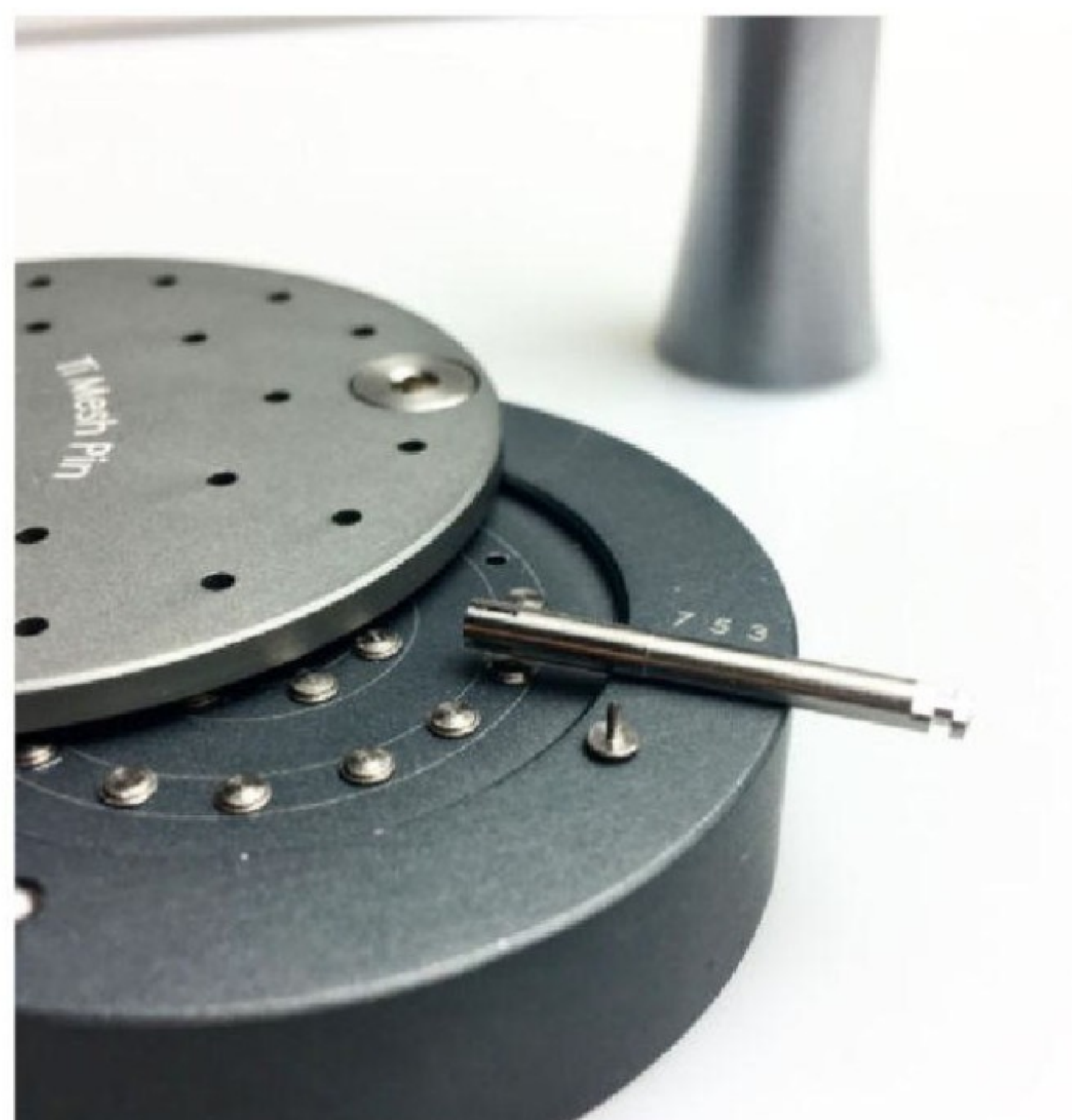

Набор разработан для простой и удобной фиксации мембран на кости. Универсальный дизайн безударных пинов, позволяет использовать их в любой, даже самой сложной клинической ситуации. Благодаря конструкции происходит лучшая фиксация пина в костной ткани, и простое его удаление при необходимости. Безударные пины изготавливаются из титанового сплава, поэтому они биосовместимы. Прочный стержень и острый кончик пина позволяют работать с плотной костью. Подходят для фиксации коллагеновых, PTFE и титановых мембран. Новый метод фиксации безударных пинов 0.6мм при помощи углового наконечника имеет ряд преимуществ:

- Пациент избегает ударов молотком в челюсть, в отличие от работы с обычными пинами;
- Установка безударного пина с язычной стороны очень удобна;
- Одна рука свободна, безударные пины устанавливаются при помощи наконечника;
- Мембрана не наматывается на пин как при фиксации винтом;
- Установка одного пина занимает от 2 до 7 секунд;
- Фиксируется в любом типе кости;
- Протокол установки рекомендует выставить на физиодиспенсоре 300-500 оборотов, с торком 30Н/см.



ТИТАНОВЫЕ ПИНЫ ДЛЯ БЕЗУДАРНОЙ ТЕХНИКИ

- диаметр стержня пина: 0,6 mm
- диаметр шляпки пина: 2,5 mm
- высота шляпки пина: 0,5 mm
- высота рабочей части пина: 2,0 mm; 2,7 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7mm; 8mm; 10mm - с диаметром стержня пина: 0,6 mm и 0,8 mm.
- по 10 шт. в упаковке
- по 25 шт. в упаковке

* при покупке от 50 шт. действует специальное предложение



ПИНОДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УГЛОВОГО НАКОНЕЧНИКА "KAVO"

- короткий - 12 mm
- длинный - 18 mm

С помощью пинодержателя осуществляется простой и контролируемый захват пина из кассеты, а также точное и надежное позиционирование пина в нужном месте на кости. Отсоединить пинодержатель от пина после установки так же просто, он легко отщелкивается при наклоне.



КАССЕТА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЯ ПИНОВ

- вместимость на 25 шт.

Позволяет проводить обработку под воздействием высоких температур. После стерилизации пины остаются внутри кассеты, что предотвращает их контакт с окружающей средой и сохраняет стерильность. Кассета - удобна для транспортировки и переноса. Использование кассет для пинов помогает обеспечить безопасность пациентов.



КАССЕТА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ВИНТОВ НА 70 ШТ.

- для винтов D 90mm

Стерилизация пинов — один из ключевых этапов в работе любого врача. В стоматологии эта процедура проводится для уничтожения всех микроорганизмов с поверхности инструментов. Рекомендуем вам придерживаться норм стерилизации, чтобы инструменты служили долго.



УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК KAVO "SMARTMATIC PROPHY S53"

SMARTmatic S53 - угловой осциллирующий наконечник, 8:1 KaVo (Германия) - обладает многими технологическими особенностями такими как: высококачественная нержавеющая сталь, малогабаритная головка, сбалансированность. Угловой наконечник S53 можно устанавливать на все микромоторы INTRAmatic (LUX) и микромоторы с разъемом, соответствующим ISO 3964/DIN 13940.



ТИТАНОВЫЕ ПИНЫ ДЛЯ УДАРНОЙ ТЕХНИКИ

- Пины изготовлены из биорезистентного сплава (Ti-6Al-4V);
- в упаковке 25 штук;
- легко установить в костной ткани любой плотности при помощи прямого или изогнутого пинодержателя;
- извлекается при помощи шестигранной отвертки;
- стерилизуются автоклавированием в стерилизационной кассете.

*при покупке от 50 шт. действует специальное предложение



ПИНОДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ УДАРНОЙ ТЕХНИКИ

Осуществляет простой и контролируемый захват пинов, что позволяет точно и надежно позиционировать их на кости. Снять пинодержатель с пина так же просто - он легко отщелкивается при наклоне.

- Изогнутый или прямой на выбор



ВИНТЫ САМОНАРЕЗНЫЕ ДЛЯ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ

Универсальный самонарезающий винт для костной пластики, предназначен для фиксации титановых сеток, резорбируемых и нерезорбируемых мембран, пластики костными блоками (реверс-блоки, пластика по методу Кюри), стабилизации костных блоков (винирная техника). Особенность: жесткая и надежная фиксация самонарезающего винта на жале отвертки по типу шарикового аттачмента в целях безопасности пациента.

- Ø1,5x3 mm / Ø1,5x4 mm / Ø1,5x5 mm / Ø1,5x7 mm



ВИНТЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЛЯ БЛОКОВ И МЕМБРАН

- Ø1,5 x 7 mm
- Ø1,5 x 9 mm
- Ø1,5 x 11 mm
- Ø1,5 x 13 mm



ВИНТЫ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ЛИГАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ

- Ø1,6 x 9 mm
- Ø1,6 x 11 mm
- Ø1,6 x 13 mm
- Ø2,0 x 9 mm
- Ø2,0 x 11 mm
- Ø2,0 x 13 mm
- Ø2,0 x 15 mm



ОТВЕРТКА ДЛЯ УГЛОВОГО НАКОНЕЧНИКА ПОД ВИНТЫ

- для цилиндрических винтов
- для самонарезных винтов



ОТВЕРТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИНТОВ

- обеспечивает легкую и безопасную установку винтов в кость любой плотности.
- съемное жало, длиной 60mm



ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ОТКРЫТОГО СИНУС-ЛИФТИНГА

- Ø 6 mm - малый
- Ø 8 mm - большой



АЛМАЗНЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ЗАКРЫТОГО СИНУС-ЛИФТИНГА

- Ø 2.9 mm - малый
- Ø 3.5 mm - средний
- Ø 3.8 mm - большой



АЛМАЗНЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ОТКРЫТОГО СИНУС-ЛИФТИНГА

- Ø 6*25.3 mm - малый
- Ø 8*26.4 mm - большой



АРТ. 4006

ФРЕЗА ДЛЯ ЗАБОРА КОСТИ 4mm

- Имеет фиксацию стоппера от 1 mm до 4 mm с шагом 1 mm



АРТ. 4006

ФРЕЗЫ ДЛЯ РАСЩЕПЛЕНИЯ ГРЕБНЯ КОСТИ

- Ø 2.5 mm / Ø 3 mm / Ø 3.5 mm
- Ø 4 mm / Ø 4.5 mm / сверло,
- сепар. диск, адаптер





АРТ. 2260


ВИНТ ВНУТРИКАНАЛЬНЫЙ 3 мм

- арт.2259 - 2 mm

Нерезорбируемые титановые мембраны (Ti-6Al-4V) для аугментации костных дефектов резидуального гребня. Перфорация способствует высокой пролиферации сосудов, препятствуя образованию серотом и прорастанию соединительной ткани. Несмотря на наличие перфорации, мембрана имеет высокие барьерные свойства. При небольшой толщине мембраны обладают достаточной жесткостью для сохранения формы профиля реконструируемого участка, минимизируя нагрузку на переостальный лоскут, практически, исключая риск прорезывания. Мембрана может фиксироваться при помощи пинов или винтов. Наличие специального перфоративного отверстия позволяет фиксировать мембрану при помощи винта-заглушки на имплантат или спейсер.

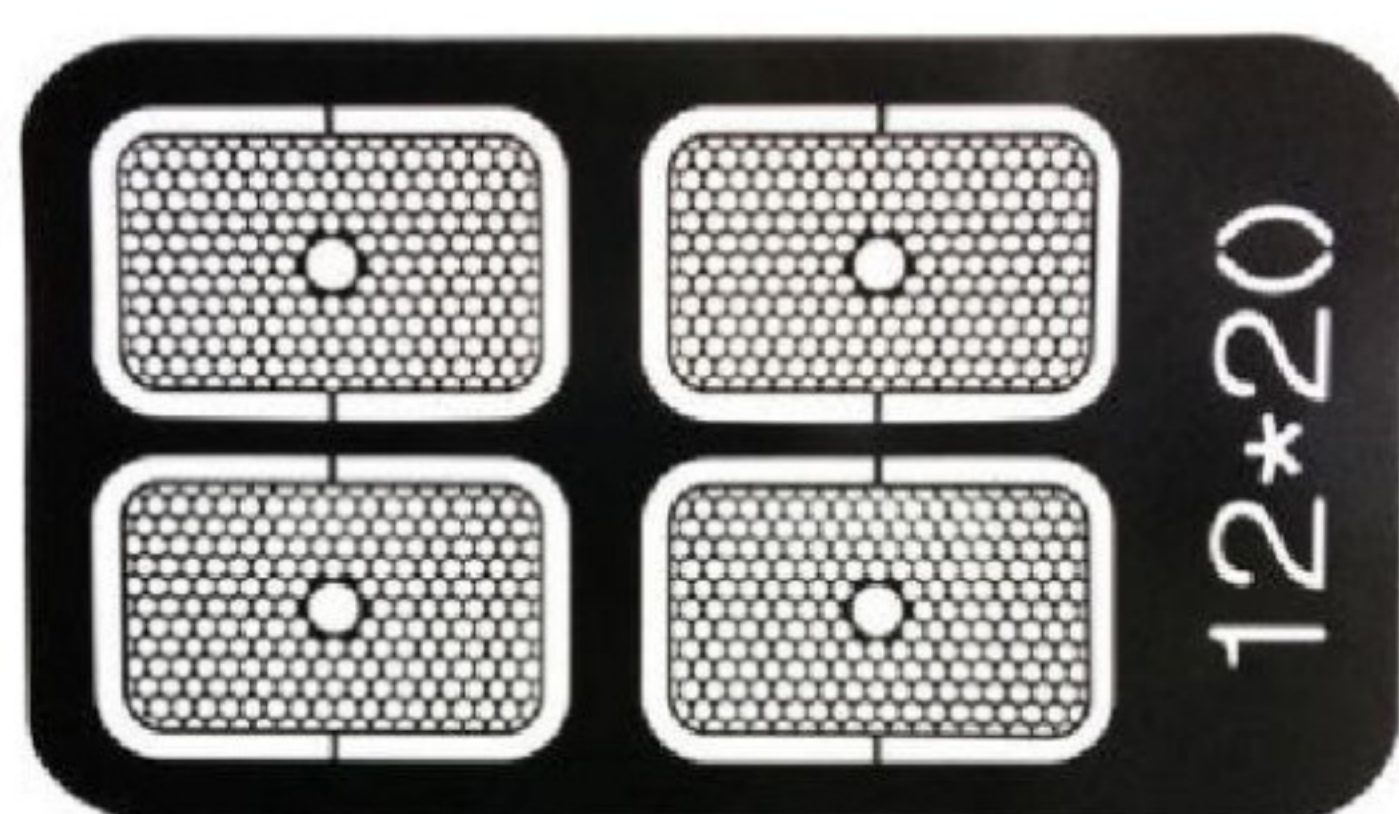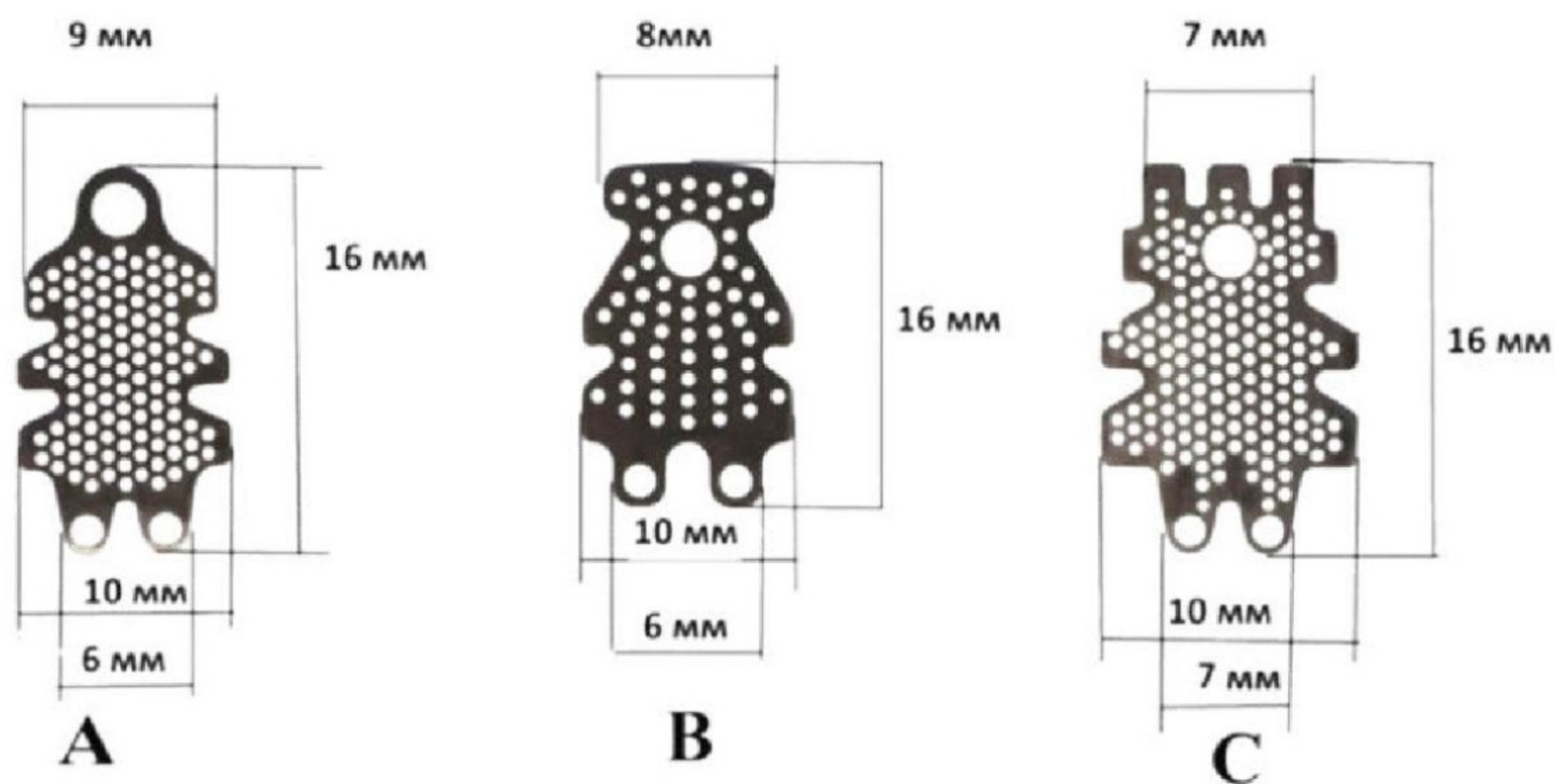

МЕМБРАНА 12*20

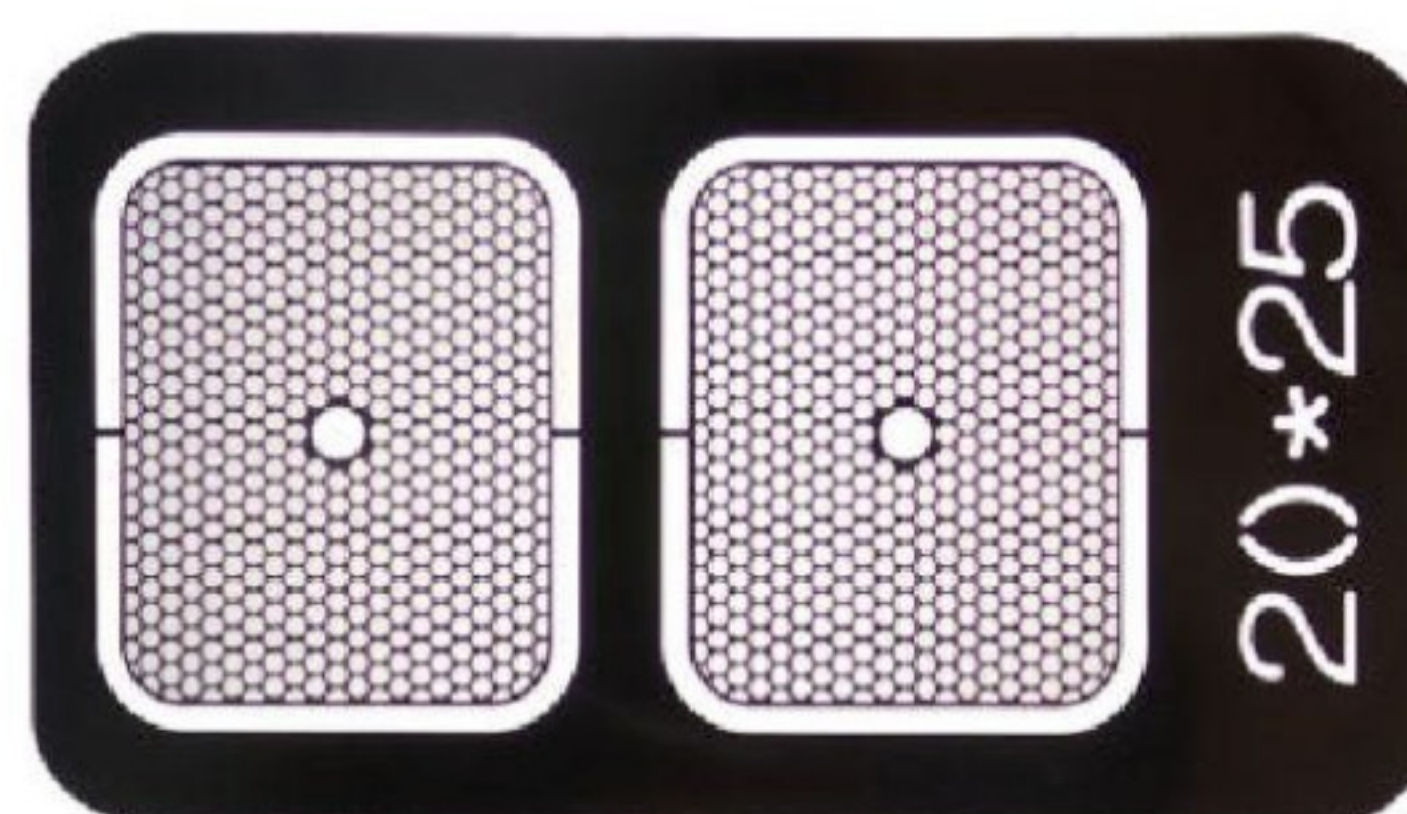

МЕМБРАНА 20*25



МЕМБРАНА 35*50





АРТ. 4001 НАБОР ТРЕПАНОВ 8 ШТ.

- Ø 3 mm / Ø 4 mm / Ø 5 mm / Ø 6 mm
- Ø 7 mm / Ø 8 mm / Ø 9 mm / Ø 10 mm



АРТ. 4002 НАБОР ТРЕПАНОВ 3 ШТ.

- Ø 4.8 mm / Ø 5.5 mm / Ø 6.3 mm



АРТ. 4003 НАБОР МУКОТОМОВ 3 ШТ.

- Ø 4.5 mm / Ø 5.2 mm / Ø 5.8 mm



АРТ. 4004 НАБОР МУКОТОМОВ 4 ШТ.

- Ø 4 mm / Ø 5 mm
- Ø 6 mm / Ø 7 mm

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ В АССОРТИМЕНТЕ



СМЕННЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ОТВЕРТОК 4/6/8-ГРАННЫМ СЕЧЕНИЯМИ



НАБОР ДЛЯ СБОРА КОСТИ "BONE COLLECTOR KIT"

- 4 костных сборщика - 3 mm / 3.7 mm / 4.4 mm / 5 mm
- 4 стопера длиной - 5 mm и 10 mm



ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ НАБОР ОТВЕРТОК

- Регулируемый торк от 20 до 60 N-m. Набор включает в себя отвертки для следующих систем имплантации :
- Xive Friadent, Biomet 3i, Osstem, MeDENT, Astra Tech, Implantium, Dentium, Mis, AlphaBio, Biohorizons, Adin, Zimmer;
- Nobel Nobel Replace, Nobel Conical Connection, Straumann Straumann Bone Level, Straumann SynOcta, 1,0 Ankylos;
- Динамометрический ключ - 1 шт.



ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ НАБОР РУЧНОЙ

- отвертки ручные - 16 шт.
- динамометрический ключ - 1 шт.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ "VERIDENT"

VERIDENT (США) — производитель стоматологических материалов. Гибридный композит светового отверждения, композит химического отверждения, гели для протравливания — самого высокого качества и степени надежности, так как каждая линейка товаров соответствует международным стандартам ISO.

- Материал композитный стоматологический светового отверждения VERIDENT (Light Cure Hybrid Composite) - отлично полируемый, жидкотекучий композит с 71% наполнением с рабочими и эстетическими характеристиками, наиболее предпочитаемыми стоматологам.
- Материал композитный стоматологический химического отверждения VERIDENT (Chemical Cure Composite) - имеет в своей основе полимер BIS-GMA и неорганический наполнитель в виде частичек с диаметром 5-10 микрон.
- Материал композитный стоматологический светового отверждения жидкотекучий VERIDENT (Light Cure Composite Flowable) в комплекте: шприцы с композитной массой, насадки для шприца - разработан на основе бисфенол А глицидилметакрилатной смолы и частиц неорганического наполнителя с средним диаметром 1,4 микрон.



Материал композитный стоматологический светового отверждения VERIDENT (Light Cure Hybrid Composite)

- РУ № ФСЗ 2007/00499

Материал композитный стоматологический химического отверждения VERIDENT (Chemical Cure Composite)

- РУ № ФСЗ 2007/00497



Материал композитный светового отверждения жидкотекучий VERIDENT (Light Cure Composite Flowable)

Цвет: A1; A2; A3; A3.5

- РУ № ФСЗ 2007/00498

ПОЛИМЕРНЫЕ ЗУБЫ VERIDENT "SYNTHETIC POLYMER TEETH SUPER"

Двухслойные акриловые зубы поставляются в бобине (20 полных гарнитур). Также поставляются в бобине - жевательные зубы (40 полных гарнитур), производства "Verident Synthetic Polymer Teeth Super". Превосходное качество, гипоаллергенные материалы с прекрасными техническими характеристиками и высокими показателями прочности.




Зубы «Verident Synthetic Polymer Teeth» представляют полную имитацию естественных зубов. Удовлетворяют требованиям анатомической формы, как фронтальных так и окклюзионных поверхностей боковых зубов с учетом теории артикуляции. Жевательные поверхности поставляемых современных компонентов зубов сформированы таким образом, чтобы соответствовать требуемым артикуляционным движениям. Не подвергаются растрескиванию, окклюзионная поверхность с глубиной - 2мм дополнительно упрочнена и не имеет микропор. Зубы "Verident Super" устойчивы к стиранию или износостойкости, обладают высокой способностью к полированию и имеют флюоресцирующим эффект, присущим естественным зубам (сохраняют его как при естественном, так и при искусственном освещении). Микротвердость материала до 27 МПа или 264 кгс/мм², прочная связь зубов с базисом протеза 31 МПа или 36 кгс/см². Удобная упаковка в бобинах, которая состоит из 4-х легкоъемных секций – две секции с фронтальными зубами (120 фронтальных верхних и 120 зубов фронтальных нижних) и две секции с боковыми зубами (160 верхних жевательных и 160 нижних жевательных зубов).

ТАБЛИЦА ФАСОНОВ АКРИЛОВЫХ ЗУБОВ «VERIDENT SUPER»

Цвет: A1; A2; A3; A3,5 Размер: 30 Фасон: 419 Форма: U25	419	30
	U25	
Цвет: A1; A2; A3; A3,5 Размер: 32 Фасон: 425 Форма: U37	425	32
	U37	
Цвет: A1; A2; A3; A3,5 Размер: 32 Фасон: 438 Форма: U38	438	32
	U38	
Цвет: A1; A2; A3; A3,5 Размер: 34 Фасон: 468 Форма: U67	468	34
	U67	

СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ АКРИЛОВЫХ ЗУБОВ «VERIDENT SUPER»

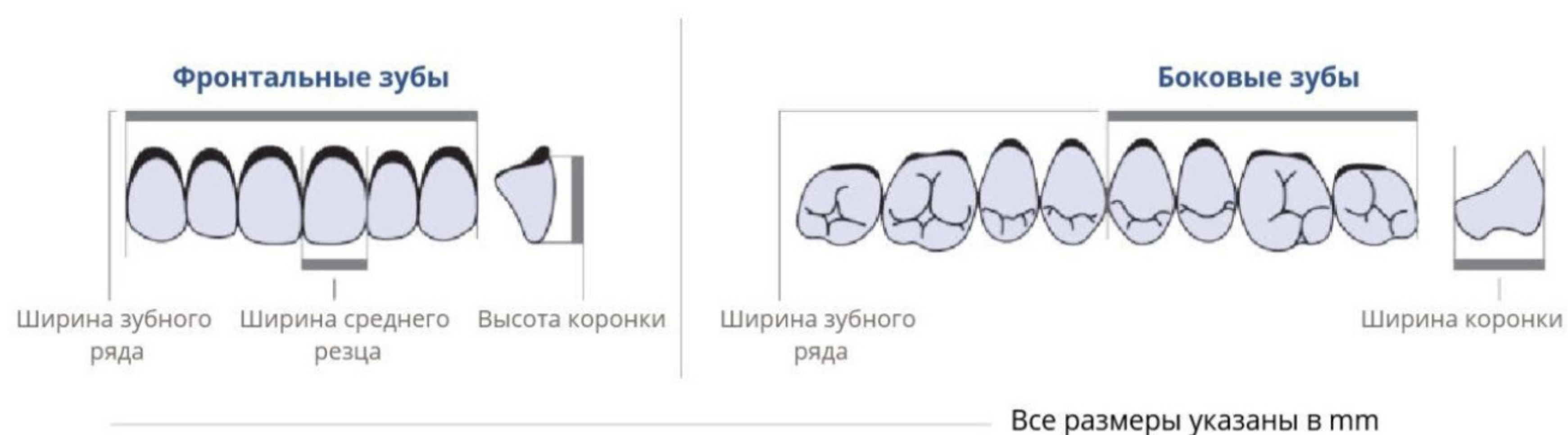

ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕМБРАНЫ

Остеопластические материалы (трансплантаты) — являются основой для формирования объема костной ткани при проведении остеопластической операции. Трансплантаты служат биосовместимой матрицей для построения костной ткани в период ее регенерации и полностью заменяются собственной костной тканью.

БИОИМПЛАНТАТЫ "LYOPLAST"

Остеопластические материалы и мембраны ТМО от Лиопласт — это продукция российского производства, максимально адаптированная по своему биохимическому составу к человеческому организму. Биоимплантаты LyoPlast при изготовлении проходят глубокую очистку (ультразвук и вакуум), при этом применение химических реагентов сведено к минимуму, а 25 лет применения врачами хирургами из более, чем тысячи лечебных учреждений клинически доказано, что костная ткань пациентов полностью восстанавливается в 100% случаях.



ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННЫЙ КОСТНЫЙ ПОРОШОК

Измельченный костный препарат натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал. Субстанция белого цвета с желтоватым оттенком, размером частиц 0,1 - 0,25 мм, однородная без включений.

- арт. ЛИО 35 - 0,5 мл/0.89 грамма
- арт. ЛИО 36 - 1,0 мл/1.78 грамма



АЛЛОГЕННЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК КОМПОНЕНТ КОСТИ

Субстанция белого цвета с желтоватым оттенком, размером частиц 0,01 - 0,02 мм, однородная без включений. Кроме солей кальция и фосфора содержит все микроэлементы костной ткани, коллаген и глюкозаминогликаны (хондроитина сульфат) в тех же пропорциях, в каких они находятся в костной ткани человека. Точное содержание установлено масс-спектрометрическим методом. арт.

- арт. ЛИО 49 - 0,5 мл/0.89 грамма



ПОРОШОК МИНЕРАЛИЗОВАННЫЙ СПОНГИОЗНЫЙ

Субстанция белого цвета с желтоватым оттенком, размером частиц 0,5 - 1,5 мм, однородная без включений.

- арт. ЛИО 104 - 5,0 мл/4.45 грамма
- арт. ЛИО 105 - 1,0 мл/1.78 грамма
- арт. ЛИО 106 - 0,5 мл/0.89 грамма



ПОРОШОК МИНЕРАЛИЗОВАННЫЙ КОРТИКАЛЬНЫЙ

Субстанция белого цвета с желтоватым оттенком, размером частиц 0,5 - 1 мм, однородная без включений.

- арт. ЛИО 113 - 0,5 мл/4.45 грамма
- арт. ЛИО 115 - 0,5 мл/4.45 грамма
- арт. ЛИО 116 - 1,0 мл/1.78 грамма
- арт. ЛИО 117 - 5,0 мл/0.89 грамма



КРОШКА СПОНГИОЗНАЯ

Средне измельченный костный препарат натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал. Кусочек белого цвета с желтоватым оттенком, размером частиц 0,5 x 0,5 x 0,5 см, структура однородная без включений.

- арт. ЛИО 55 - 5,0 мл/4.45 грамма
- арт. ЛИО 56 - фасовка 1 фрагмент
- арт. ЛИО 57 - фасовка 4 фрагмента
- арт. ЛИО 59 - фасовка 4 фрагмента
- арт. ЛИО 78 - фасовка 1 фрагмент



ГУБЧАТО-КОРТИКАЛЬНЫЙ БЛОК

Фрагмент различной формы неоднородной поверхности без дополнительных включений и субстанций натурального или синтетического происхождения. По внешнему виду представляет собой пористый губчатый блок номинального размера.

- арт. ЛИО 68 - фрагмент 1 x 2 x 1 см
- арт. ЛИО 69 - фрагмент 3 x 3 x 1 см
- арт. ЛИО 73 - фрагмент 1 x 2 x 0,5 см



ПОЛОСКА ТВЕРДАЯ МОЗГОВАЯ ОБОЛОЧКА

Тканеподобный материал неоднородной поверхности без дополнительных включений и субстанций натурального или синтетического происхождения.

- арт. ЛИО 87 - 3 x 3 см
- арт. ЛИО 89 - 4 x 4 см
- арт. ЛИО 90 - 2 x 3 см
- арт. ЛИО 91 - 2 x 2 см
- арт. ЛИО 120 - 2 x 2 см



БИКОРТИКАЛЬНЫЙ БЛОК ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ (КЛИН)

Костный препарат натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал. Фрагмент различной формы неоднородной поверхности без дополнительных включений и субстанций натурального или синтетического происхождения. По внешнему виду представляет собой пористый губчатый блок номинального размера.

- арт. ЛИО 32 - фрагмент 4 x 2 x 1 см
- арт. ЛИО 33 - фрагмент 4 x 2 x 1 см
- арт. ЛИО 72 - фрагмент 2 x 2 x 1 см



МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ КОРТИКАЛЬНАЯ РАСПОРКА

Минерализованная кортикальная пластинка. Часть (фрагмент) костной ткани человека. Костный препарат натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал. Фрагмент различной формы однородной поверхности без дополнительных включений и субстанций натурального или синтетического происхождения. Структура фрагмента однородная.

- арт. ЛИО 30 - фрагмент 2 x 2 x 0,5 см
- арт. ЛИО 39 - фрагмент 1 x 2 x 0,5 см
- арт. ЛИО 114 - фрагмент 2 x 2 x 0,5 см

КОСТНОЗАМЕЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ "XENYS APATITE"

1. Xenys Matrix - с полностью сохраненным внеклеточным матриксом;
2. Xenys Dem - частично деминерализованный и гибкий;
3. Xenys Apatite - только с натуральным минералом кости.



- XYA-S001 - Xenys Apatite губчатые гранулы (0,5-1 мм) 0,5 куб.см 1 шт.
- XYA-S006 - Xenys Apatite губчатые гранулы (0,5-1 мм) 0,5 куб.см 6 шт.
- XYA-S001S - Xenys Apatite губчатые гранулы в шприце с фильтрующей крышкой (0,5-1 мм) 0,5 куб.см 1 шприц
- XYA-S003S - Xenys Apatite губчатые гранулы в шприце с фильтрующей крышкой (0,5-1 мм) 0,5 куб.см 3 шприца
- XYA-S011 - Xenys Apatite губчатые гранулы (0,5-1 мм) 1,0 куб.см 1 шт.
- XYA-S016 - Xenys Apatite губчатые гранулы (0,5-1 мм) 1,0 куб.см 6 шт.
- XYA-S021 - Xenys Apatite губчатые гранулы (0,5-1 мм) 2,0 куб.см 1 шт.
- XYA-S026 - Xenys Apatite губчатые гранулы (0,5-1 мм) 2,0 куб.см 6 шт.
- XYA-S041 - Xenys Apatite губчатые гранулы (0,5-1 мм) 4,0 куб.см 1 шт.
- XYA-S111 - Xenys Apatite губчатые чипсы (1-2 мм) 1,0 куб.см 1 шт.
- XYA-S116 - Xenys Apatite губчатые чипсы (1-2 мм) 1,0 куб.см 6 шт.
- XYA-S121 - Xenys Apatite губчатая крошка (1-2 мм) 2,0 куб.см 1 шт.
- XYA-S126 - Xenys Apatite губчатые чипсы (1-2 мм) 2,0 куб.см 6 шт.
- XYA-S141 - Xenys Apatite губчатые чипсы (1-2 мм) 4,0 куб.см 1 шт.

БАРЬЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ

Барьерные мембраны — это имплантаты для тканевой регенерации нового поколения. Созданы для применения в челюстно-лицевой хирургии, хирургической стоматологии, имплантологии и пародонтологии. Данные биоматериалы применяются для восполнения дефектов и регенерации костной ткани, мягких тканей, слизистой различной этиологии и локализации. Разработанная в тесном сотрудничестве с ведущими специалистами номенклатура позволяет выполнить пластику любого дефекта, в том числе в сложных клинических ситуациях.

БИОРЕЗОРБИРУЕМАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ МЕМБРАНА "BIOPLATE MEMBRANE CONTUR"




Состоит из коллагена I и III типа, имеет два слоя - серозный (гладкий) и фиброзный (ворсистый).

Эластичная, гибкая, легко адаптируется к любой форме дефекта, при этом прочная на разрыв, легко фиксируется пинами и микровинтами. Стабильно удерживает аугментат, обеспечивает оптимальные барьерные свойства даже при растяжении. Предназначена для направленной костной регенерации (НКР) и направленной тканевой регенерации (НТР).

- **Размер:** MBC-15 (15x20mm), MBC-25 (25x25mm), MBC-30 (30x40mm);
- **Толщина:** 0,3 мм; **Состав:** коллаген I и III типа;
- **Срок резорбции:** до 6 месяцев; **материал:** брюшина.

КОЛЛАГЕНОВАЯ МЕМБРАНА "COLLYGEN"

Коллагеновая мембрана Collygen — это новая рассасывающаяся мембрана для защиты области имплантации путем инфильтрации мягких тканей. Collygen — продукт высокой степени очистки, сделан из коллагена лошадиного происхождения, содержит большое количество коллагеновых волокон. Ее с легкостью можно разместить в области после костной пластики, без какой-либо фиксации. Коллагеновая 3D матричная структура эффективно адаптируется к поверхности костного трансплантата гарантируя оптимальную защиту и стабилизацию места операции. Она физиологически рассасывается примерно через 4-6 недель, доступен в широком диапазоне размеров, в одиночной и мульти упаковке.

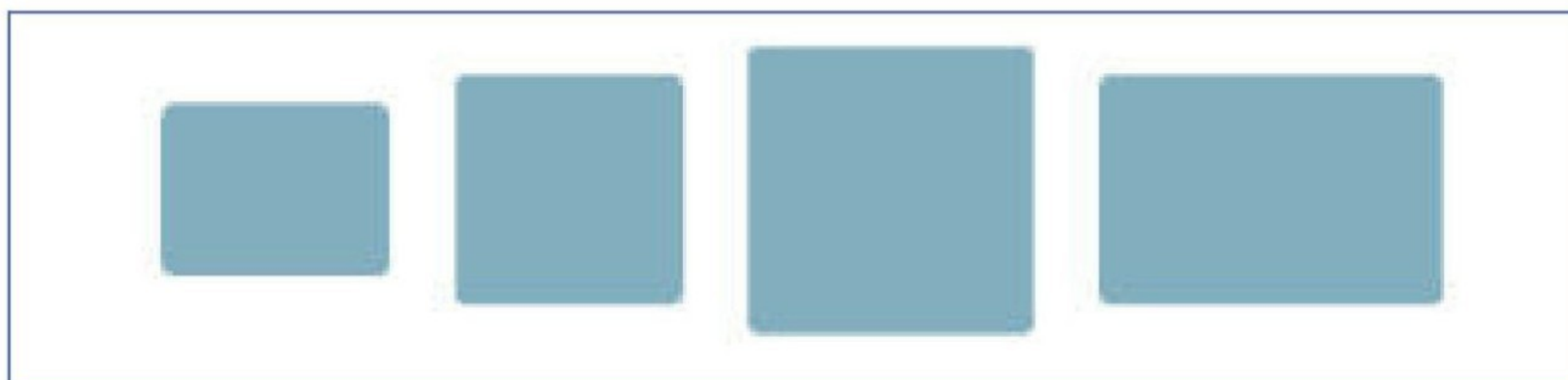

- **СУМ-15206** - Collygen-коллагеновая мембрана 15 x 20 x 0,2 мм 1 штука в коробке
- **СОМ-20206** - Collygen-коллагеновая мембрана 20 x 20 x 0,2 мм 1 штука в коробке
- **СОМ-25251** - Collygen-коллагеновая мембрана 25 x 25 x 0,2 мм 1 штука в коробке
- **СУМ-20301** - Collygen-коллагеновая мембрана 20 x 30 x 0,2 мм 1 штука в коробке

Показания к применению Collygen используется в комбинации с костнозамещающими материалами **SpherHA dense granules** или **SpherHA porous chips** в ситуациях, где требуется барьерная функция:

- Операции костной аугментации. Восстановление дефектов кости. Хирургическое лечение периимплантитов. Сохранение объема кости после удаления зуба. Синус-лифтинг.

Основные характеристики:

- Лошадиный коллаген I типа. Безопасный и биосовместимый материал. Хорошее заживление благодаря трехмерной волоконной структуре. Обеспечивает барьерную функцию. Время защиты от 4 до 6 недель.

ЛИНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ КОСТНЫХ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО БИОМИМЕТИЧЕСКОГО ГИДРОКСИАПАТИТА "SPHERHA"

SPHERHA ГРАНУЛЫ И ЧИПСЫ

Плотные гранулы и пористые чипсы выпускаются в двух различных формах (0,5-1 мм и 1-2 мм) и нескольких форматах (от 0,5 cc до 2 cc).

Плотные гранулы компактны и похожи на кортикальную кость человека; время их ремоделирования медленнее, чем у пористых чипсов, которые похожи на губчатую кость. Сферическая форма и равномерный размер сферических гранул позволяют оптимально заполнять крупные неравномерные дефекты и формировать однородные межзернистые поры, улучшая остеоинтеграцию и реконструкцию кости.

Указания к применению:

- Заполнение мелких и средних костных дефектов, верхнечелюстных синус-лифтингов, периимплантационных дефектов и постэкстракционных лунок.

SPHERHA ИНЪЕКЦИОННАЯ ПАСТА

Инъекционная паста с высокой плотностью, представляет из себя смесь нанокристаллов и микропорошка наноструктурированного гидроксиапатита, в фосфатно-буферном физиологическом растворе с физиологическим pH. Выпускается в широком диапазоне форматов (от 0,25 cc до 2 cc). Чтобы точно обеспечить возможность нанесения на месте, внутри упаковки имеется небольшой наконечник.

Указания к применению:

- Восполнение дефектов пародонта, периимплантационных дефектов, увеличение верхнечелюстной пазухи с помощью крестообразного доступа.

SPHERHA ФОРМОВОЧНЫЙ КРАНЧ

Формула кранча с добавлением микрогранул со специфической гранулометрией показывает более высокое количество наноструктурированного гидроксиапатита, чем инъекционная паста, что приводит к чрезвычайно удобной и стабильной смеси даже в условиях кровотока. Аппликатор позволяет дозировать продукт в цилиндрической форме, легко адаптируемой и соответствующей любому месту имплантации.

Указания к применению:

- Пломбирование пародонтальных, периимплантационных и постэкстракционных дефектов костей. Он также показан для синуслифтинга с вестибулярным доступом.



ПЛОТНЫЕ ГРАНУЛЫ

- SHA-D0501 SpherHA (0,5-1 мм) 1 btl. 0,5 cc
- SHA-D0506 SpherHA (0,5-1 мм) 6 btl. 0,5 cc
- SHA-D1001 SpherHA (0,5-1 мм) 1 btl. 1 cc
- SHA-D1006 SpherHA (0,5-1 мм) 6 btl. 1 cc
- SHAD 2001 SpherHA (0,5-1 мм) 1 btl. 2 cc
- SHAD 2006 SpherHA (0,5-1 мм) 6 btl. 2 cc
- SHA-D4001 SpherHA (0,5-1 мм) 1 btl. 2 cc
- SHA-D4006 SpherHA (0,5-1 мм) 6 btl. 2 cc
- SHA-D20201 SpherHA (1 -2 мм) 1 btl. 2 cc

ПОРИСТАЯ СТРУЖКА

- SHA-P0501 SpherHA (0,5-1 мм) 1 btl. 0,5 cc
- SHA-P0506 SpherHA (0,5-1 мм) 6 btl. 0,5 cc
- SHA-P050S1 SpherHA (0,5-1 мм) 1 syr 0,5 cc
- SHA-P050S3 SpherHA (0,5-1 мм) 3 syr 0,5 cc
- SHA-P1001 SpherHA (0,5-1 мм) 1 btl. 1 cc
- SHA-P1006 SpherHA (0,5-1 мм) 6 btl. 1 cc
- SHA-P20101 SpherHA (1-2 мм) 1 btl. 1 cc
- SHARP 20106 SpherHA (1-2 мм) 6 btl. 1 cc
- SHA-P20201 SpherHA (1-2 мм) 1 btl. 2 cc
- SHA-P20206 SpherHA (1-2 мм) 6 btl. cc



ИНЪЕКЦИОННАЯ ПАСТА

- SHA-PA0251 SpherHA 1 syr. 0,25 cc
- SHA-PA0253 SpherHA 3 syr. 0,25 cc
- SHA-PA0501 SpherHA 1 syr. 0,5 cc
- SHA-PA0503 SpherHA 3 syr. 0,5 cc
- SHA-PA01001 SpherHA 1 syr. 1 cc
- SHA-PA01003 SpherHA 3 syr. 1 cc
- SHA-PA2001 SpherHA 1 syr. 2 cc

ФОРМОВОЧНЫЙ КРАНЧ

- SHA-CR0051 SpherHA 1 syr. 0,5 cc
- SHA-CR0053 SpherHA 3 syrs. 0,5 cc
- SHA-CR0101 SpherHA 1 syr. 1 cc
- SHA-CR0103 SpherHA 3 syrs. 1 cc
- SHA-CR2001 SpherHA 1 syr. 2 cc

КОСТНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ

ТЕХНОЛОГИЯ

OSTEO~~M~~**ATRIX**[®]

BIO~~G~~**UARD**[®]

BIO~~G~~**AP**[®]

Травматология и ортопедия

Нейрохирургия

Стоматология

Спинальная хирургия

Офтальмология

Оториноларингология

Урология

Спортивная медицина

Пластическая хирургия



BIOGAR™

natural
bone
mineral

СООБЩЕСТВО ОРГАНИЗМОВ
117313, Москва
Савиловский переулок, 10
Тел: +7 495 517 1173
Факс: +7 495 517 1174
E-mail: info@bionatural.ru



BIOGAP[®]

BIOGUARD[®]

OSTEOMATRIX[®]

- ✓ Применимы во всех областях костной хирургии
- ✓ Стимулируют регенерацию и рост кости
- ✓ Приготовлены в асептических условиях
- ✓ Освобождены полностью от антигенов
- ✓ Гарантированно неизменная структура костной ткани
- ✓ Доказана высокая эффективность материала
- ✓ Содержат костные сГАГ в физиологических концентрациях

OsseoGuard® & OsseoGuard Flex®

коллагеновые резорбируемые мембраны

Endobon® Xenograft Granules

ксеногенный материал в гранулах



OsseoGuard Membrane

OsseoGuard Flex Membrane



Endobon Large Granules

Endobon Small Granules

BIOMET 3i™
PROVIDING SOLUTIONS - ONE PATIENT AT A TIME™

ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.

Ксено материал Endobon Xenograft

Артикул	Объём	Размер частиц
Мелкие гранулы		
ROX05	0,5 мл (см ³) ~ 0,25 г.	0,5-1 мм
ROX10	1,0 мл (см ³) ~ 0,5 г.	0,5-1 мм
ROX20	2,0 мл (см ³) ~ 1,0 г.	0,5-1 мм
Крупные гранулы		
ROXLG20	2,0 мл (см ³) ~ 1,2 г.	1-2 мм
ROXLG50 (5 чашечек по 1 мл.)	5,0 мл (см ³) ~ 3,0 г.	1-2 мм
ROXLG80 (8 чашечек по 1 мл.)	8,0 мл (см ³) ~ 5,0 г.	1-2 мм



Коллагеновая резорбируемая мембрана OsseoGuard

Артикул	Размер частиц
OG1520	15 x 20 мм
OG2030	20 x 30 мм
OG3040	30 x 40 мм

Коллагеновая резорбируемая мембрана OsseoGuard Flex

Артикул	Размер частиц
OGF1520	15 x 20 мм
OGF2030	20 x 30 мм
OGF3040	30 x 40 мм



BIOMET 3i™

ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.

Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
1-800-342-5454
Outside the U.S.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

BIOMET 3i
Dental Iberica S.L.
WTC Almeda Park, Ed.1, Planta 1a
Pl. de la Pau, s/n
08940, Cornellà de Llobregat
(Barcelona) Spain
Phone: +34-93-470-55-00
Fax: +34-93-371-78-49

СтомИнструмент
Санкт-Петербург
тел. +7-951-669-01-52
+7-981-847-40-20
stominstrument@mail.ru
<https://stominstrument.ru>



Ксеноматериал (бычий) Endobon в гранулах

Цена (руб.)

8 см³ (~5 гр.), гранулы 1-2 мм (ROXLG80) В упаковке 8 отдельных стерильных чашечек по 0,6 гр. в каждой.

34 500

5 см³ (~3 гр.), гранулы 1-2мм (ROXLG50) В упаковке 5 отдельных стерильных чашечек по 0,6 гр. в каждой.

23 200

2 см³ (~1,2 гр.), гранулы 1-2 мм (ROXLG20) одна чашечка

11 200

2 см³ (~1 гр.), гранулы 0,5-1 мм (ROX20) одна чашечка


13 100

1 см³ (~0,5 гр.), гранулы 0,5-1 мм (ROX10) одна чашечка

8 900

0,5 см³ (~0,25 гр.), гранулы 0,5-1 мм (ROX05) одна чашечка

5 800

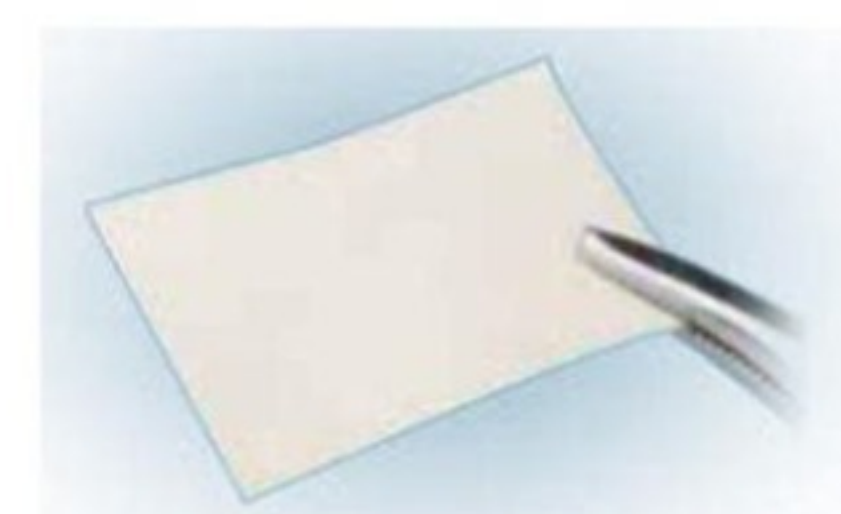

Резорбируемая коллагеновая мембрана OsseoGuard / OsseoGuard Flex (стандартная и эластичная)

Цена (руб.)

15×20 мм (OG1520 или OGF1520)

11 800

20×30 мм (OG2030 или OGF2030)

14 900

30×40 мм (OG3040 или OGF3040)

17 500

[СтомИнструмент](http://stominstrument.ru)

[тел.+7-951-669-01-52](tel:+79516690152)

[+7-981-847-40-20](tel:+79818474020)

doktor2017@yandex.ru

stominstrument@mail.ru

<https://stominstrument.ru>



BioMed Group GmbH Frankfurt am Main in Germany

ИМПЛАНТАТЫ "MeDENT Implants Systems" – инновационный комплекс титановых винтовых имплантатов, супраструктур и инструментов. Все составные части системы разработаны на основе новейших технологий с учетом накопленного опыта дентальной имплантации. В 2016 году был выпущен новый имплантат корневидной формы с конусным соединением имплантат-абатмент. При создании системы в основу был заложен особый дизайн имплантата, разработанный с помощью компьютерного моделирования распределения нагрузок. MeDENT Implants Systems один из первых использует нанотехнологии в обработке поверхности титанового имплантата, которая обеспечивает оптимальную интеграцию с костной тканью. Научные исследования по всему миру доказывают, что ключом к оптимальной остеоинтеграции является качество поверхности имплантата. Также доказано, что шероховатая поверхность титановых имплантатов способствует адсорбции белков, механическому прикреплению к поверхности материала волокон фибрина и коллагена, адгезии остеогенных клеток, фибро и остеобластов, а также синтезу специфических белков и факторов роста, что, в конечном итоге, позволяет достичь увеличения площади интегрирующихся поверхностей. Поверхность MeDENT Implants Systems подвергается струйной обработке частицами определенного размера и плотности, затем проходит обработку в низкоконцентрированной органической кислоте для достижения абсолютной чистоты поверхности. И, наконец, финишная обработка кислотой для создания упорядоченной структуры, что обеспечивает максимальную гидрофильность поверхности и способствует ускоренной остеоинтеграции имплантата.

MeDENT Implants Systems выпускаются в нескольких сериях Alpha, Beta, Delta, Delta Mini N, Gamma, Zeta которые отличаются типом конструкции и соответственно предназначены для установки в различных клинических ситуациях.



ИМПЛАНТАТ
MEDENT ALPHA



ИМПЛАНТАТ
MEDENT BETA



ИМПЛАНТАТ
MEDENT DELTA



ИМПЛАНТАТ
MEDENT DELTA MINI N



ИМПЛАНТАТ
MEDENT GAMMA



ИМПЛАНТАТ
MEDENT ZETA

ОПИСАНИЕ ИМПЛАНТАЦИОННЫХ СИСТЕМ MEDENT IMPLANTS SYSTEMS

MeDENT Implants Systems серия Alpha - универсальный инвазивный имплантат с внутренним шестигранником и соединением Конус Морзе 11 градусов на единой платформе. Обработка поверхности SLA. Гарантированная чистота и гидрофильность поверхности. Оптимальная морфология: Комбинация углубления и кратера, поверхностная шероховатость: Ra 2,5–3,0 мкм. Раннее заживление костной ткани. Заглушка в комплекте. Возможно использование в различных клинических случаях, высокая первичная стабилизация в любом типе кости. Удобство установки: Установка проводится при помощи Физиодиспенсора. Оптимальный дизайн и двойная резьба сокращает время установки (1,6 мм за одно вращение). Угол прецервикального расширения позволят добиться хорошей первичной стабилизации (до 60 н/см). Апекс имеет размер меньше диаметра имплантата на 0,8 мм. Широкий типоразмерный ряд: диаметр от 3,6 мм до 7 мм/длина от 7 мм до 14 мм. Изготовлен из титана Ti Grade 4.

MeDENT Implants Systems серия Beta - конический спиралевидный имплантат с внутренним шестигранником. Дизайн тела имплантата позволяет осуществлять плотную и точную посадку в кость, а также легкую контролируемую установку. Имплантат имеет дополнительную межвитковую микрорезьбу для увеличения площади остеоинтеграции между телом имплантата и костью. Beta — самонарезающий имплантат конденсирующего типа. Рекомендуются для кости типа D3 и D4, возможна установка в D1 и D2 тип. Применяется при немедленной нагрузке. Обработка поверхности SLA. Изготовлен из титана Ti Grade 5.

MeDENT Implants Systems серия Gamma - универсальный инвазивный имплантат с внутренним шестигранником и соединением Конус Морзе 11°. Немецкий имплантат с высокой первичной стабилизацией в любом типе кости. Оптимальный дизайн и двойная резьба сокращает время установки (1,6 мм за одно вращение). Коническая форма тела и глубокая резьба обеспечивают анатомическую конвергентность. Угол прецервикального расширения позволят добиться хорошей первичной стабилизации (до 60 н/см). Апекс имеет размер меньше диаметра имплантата на 0,7 мм. Обработка поверхности имплантата SLA обеспечивает максимальную чистоту и гидрофильность поверхности. Оптимальная морфология: комбинация углубления и кратера, поверхностная шероховатость: Ra 2.5–3.0 мкм. Раннее заживление костной ткани. Широкий типоразмерный ряд: диаметр от 3,5 мм до 7 мм / длина от 7 мм. Заглушка в комплекте. Изготовлен из титана Ti Grade 4.

MeDENT Implants Systems серия Delta - универсальный инвазивный имплантат с внутренним шестигранником и соединением Конус Морзе 11 градусов. Высокая первичная стабилизация в любом типе кости. Двойная резьба с шагом 0,8 мм делает вкручивание имплантата более быстрым (1,6 мм за одно вращение). Поверхность RBM. Площадь поверхности увеличивается вследствие пескоструйной обработки частицами Бета-Трикальций фосфата. Характеризующегося высокой биосовместимостью. Оптимальная морфология: Комбинация углубления и кратера, поверхностная шероховатость: Ra 2,5–3,0 мкм. Коническая форма и нижняя глубокая резьба имплантата увеличивают стабильность и делают возможной немедленную нагрузку. При установке имплантата режущая кромка винтового типа увеличивает самонарезающую способность и минимизирует сопротивление кости. Апекс имеет размер меньше диаметра имплантата на 0. 7 мм. Широкая линейка компонентов протетики. Раннее заживление костной ткани. Широкий типоразмерный ряд: диаметр от 3,0 мм до 7 мм/длина от 7 мм до 15 мм. Заглушка в комплекте. Изготовлен из титана Ti Grade 5.

MeDENT Implants Systems серия Delta mini N - линейка инвазивных дентальных имплантатов с внутренним конусным соединением 11° mini. Дизайн имплантата позволяет добиться высокой первичной стабилизации в любом типе кости. Особенности дизайна (узкое тело и широкая агрессивная резьба конической направленности) обеспечивают высокую площадь поверхности имплантата, позволяющую сократить сроки остеоинтеграции. Достаточная стабильность в период препаративного остеогенеза делают имплантат незаменимым для немедленной нагрузки. Особая конусная экспансивная резьба в нижней трети имплантата способна внедряться в трабекулы компактного слоя кости, создавая, таким образом, надежную макрофиксацию. Конусная форма с самонарезающей резьбой позволяет имплантату легко ввинчиваться, создавая латеральную конденсацию кости, что способствует первичной стабилизации имплантата. Специальная декомпрессионная борозда позволяет не только снизить компрессию кости, но и увеличивает площадь поверхности внутрикостной части имплантата. При установке имплантата, в нижней его части собираются костные опилки. Пассивная апикальная часть дает возможность имплантату щадяще внедряться в кость, уменьшая ее травматизацию. Благодаря подобной форме, давление на костные опилки распределяется равномерно. Этим обеспечивается полноценное кровоснабжение во всем объеме молодой кости, предотвращая некроз и дезинтеграцию имплантата.

MeDENT Implants Systems серия Zeta - разработан для имплантации в клинической ситуации с узким альвеолярным гребнем, а также для одиночных реставраций с малым расстоянием между зубами. Одноэтапный имплантат, объединенный с супраструктурой. Материал: Titanium Ti Grade 4. Покрытие: SLA.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ MeDENT Implants Systems

Инструменты, применяемые на хирургическом этапе имплантации, выпускаются наборами MeDENT Implants Systems. Все наборы эргономичны по дизайну и универсальны. Расположение инструментов в наборе интуитивно понятное для простой и удобной установки имплантатов. Инструменты зафиксированы в боксе с помощью силиконовых держателей. Бокс набора выполнен из пластика. Пластиковый боксы можно стерилизовать в автоклаве.



ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОР "FULL STOP ALPHA"



ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОР "FULL STOP DELTA"



ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОР "FULL STOP GAMMA"



ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОР "FULL STOP GAMMA"
+ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ



ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОР ДЛЯ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ



ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОР
"FULL STOP GAMMA SMALL "

Большой хирургический набор для навигационной хирургии

- Создан для работы со всеми линейками имплантационной системы MeDENT.
- Может быть использован с другими системами.
- Экономичный — содержит все необходимые инструменты, при этом доступнее навигационных наборов других производителей!
- Прост и удобен в использовании, что делает его идеальным вариантом для начинающих хирургов.



Состав хирургического набора:

Tissue Punch (Мукотом)	1
Initial Drill (Начальное сверло)	1
Drill (Направляющее сверло)	25
Drill Stopper (Стопорные кольца 2 мм)	4
Pin Drill (Сверло для пинов)	2
Pin (Пин для крепления шаблона)	4
Extractor (Выталкиватель имплантопроводов)	1
Adapter (Наконечник – имплантовод)	1
Screwdriver (Отвертка ручная)	1
Square Adaptor (Машинный имплантовод-ручной имплантовод)	1
Screwdriver (Отвертка с адаптером ручная)	1
Narrow (Имплантовод машинный Conical Mini)	1
Regular (Имплантовод машинный Conical Reg) MeDENT Alpha; MeDENT Gamma Reg.; Astra Tech 3.5/ 4.0	1
Hex (Имплантовод машинный MeDENT) MeDENT Beta; Mis; Alpha Bio	1
Extender (Удлинитель имплантовода)	1
Extender (Короткий удлинитель имплантовода)	1
Guide Screw Hex (Направляющая для Бон-профайлера 4,0/4,8 мм) MeDENT Beta; Alpha Bio; Mis и др. (стальной цвет)	4
Guide Screw Conical R (Направляющая для Бон-профайлера 4,0/4,8 мм) MeDENT Delta Reg.; MeDENT Gamma Reg.; MeDENT Alpha.; Osstem Reg.; Dentium и др. (синий цвет)	4
Bone Mill (Бон-профайлер) 4,0/4,8 мм	1
Bone Mill Conical (Бон-профайлер) 3.5/4.0 мм	1
Guide Screw Conical Narrow (Направляющая для Бон-профайлер 3.5/4.0 мм) Astra Mini 3.0 (золотистый цвет)	2
Guide Screw Conical Mini G. (Направляющая для Бон-профайлер Conical Mini G) Astra Tech 3,5 mm.; Delta Mini; Delta Mini N и др. (фиолетовый цвет)	3
IMPL.Mount Hex (Имплантовод навигационной хирургии Hex) MeDENT Beta; Alpha Bio; Mis и др. (стальной цвет)	5
IMPL.Mount Conical Reg. (Имплантовод навигационной хирургии Conical Reg) MeDENT Delta Reg.; MeDENT Gamma Reg.; MeDENT Alpha.; Osstem Reg. Dentium, и др. (синий цвет)	5
IMPL.Mount Conical Narrow (Имплантовод навигационной хирургии Conical Narrow 12 гранный) Astra Tech 3.0 (золотистый цвет)	2
IMPL.Mount Conical Mini G (Имплантовод навигационной хирургии Conical Mini G) Delta Mini, Delta Mini N, и др. (фиолетовый цвет)	3
Динамометрический Ключ	1
Бокс для стерилизации	1

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ ИМПЛАНТАТОВ G-DIFF



О КОМПАНИИ ACH MEDICAL CO., LTD

ACH Medical Co., Ltd - основана в 2008 году. Производитель премиальных продуктов для стоматологических и медицинских изделий. Главным приоритетом является гарантия качества, разработка более передовых продуктов в сотрудничестве с ведущими мировыми научно-исследовательскими институтами и университетами. Мы стремимся развивать надежную компанию, которая предлагает инновационные товары и услуги для укрепления здоровья пациентов.

Dit (DONG IL Technology) была основана в 1986 году, смысл миссии позволил DIT вырасти из скромного старта, чтобы стать мировым лидером в области решений EMI/EMC. В соответствии с непрерывным технологическим развитием, компания DIT расширяет свою производственную линейку и объем рынка, вкладывая значительные инвестиции в НИОКР и модернизацию производственных мощностей.

ПАТЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ



CE 2292



FDA



ISO 13485



Certificate of Manufacturer



Venture Business



Global IP star



Patent
Drill for Operating Implant




Patent
Dental Implant Fixture



Patent
Dental Implant Package

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Мы поставляем нашим клиентам высококачественную продукцию, мы соблюдаем высокие стандарты качества наших продуктов и услуг.

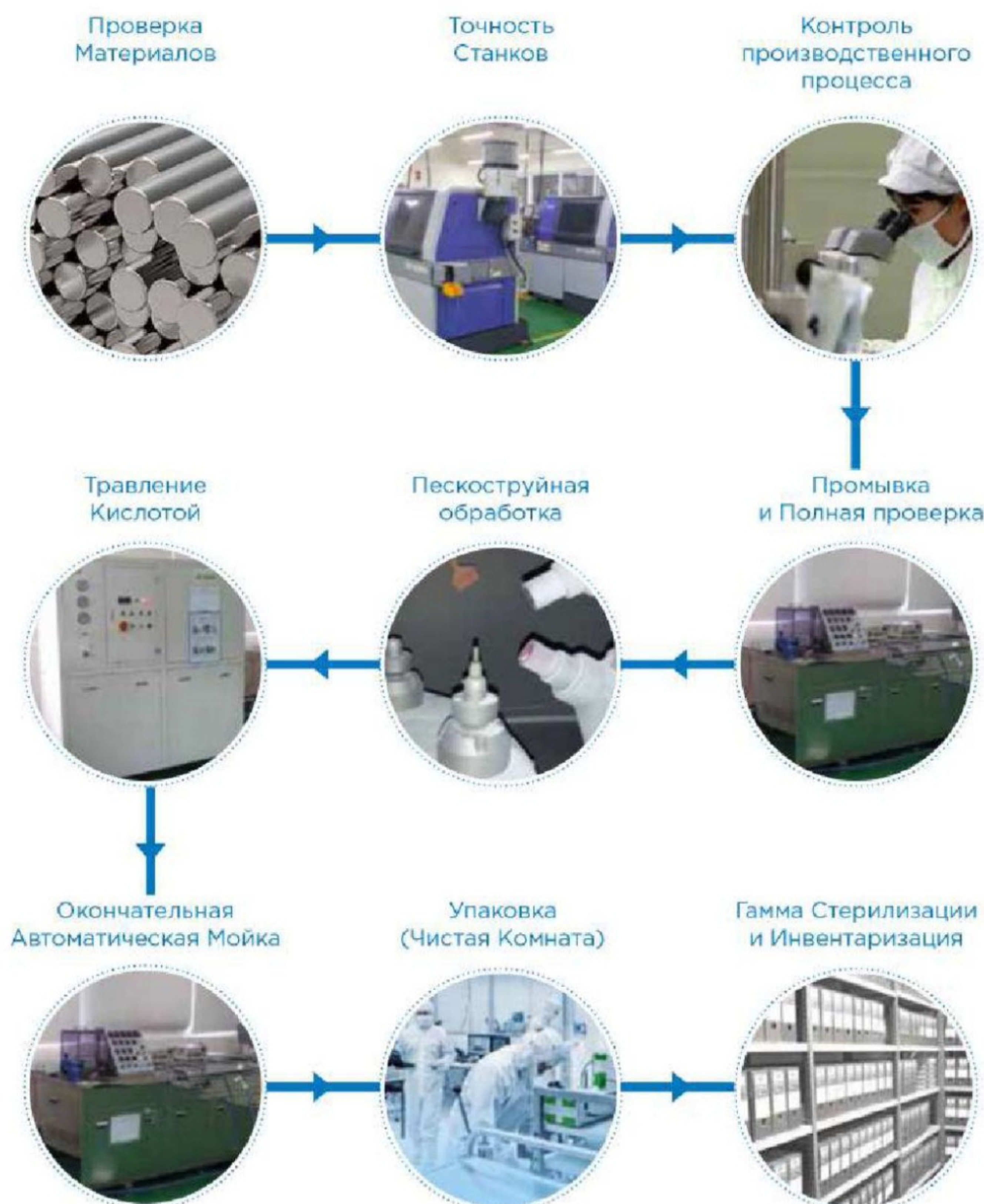




КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ С АНТИРОТАЦИОННЫМ ШЕСТИГРАННИКОМ

Опубликованные литературные данные показали, что коническое шестигранное соединение по сравнению с внешним шестигранником или стыковым соединением обеспечивает более высокую механическую и биологическую стабильность, лучшее распределение давления, большую герметизирующую способность, адекватную стабильность гребня мягких тканей и костного гребня, повышенную универсальность протезирования и лучший эстетический результат. ACH Medical адаптировала 11-градусное коническое шестигранное соединение имплантат/абатмент с внутренним антиротационным шестигранником с 2008 года.




ПОВЕРХНОСТЬ S.L.A.

Как следует из публикации Wennerberg & Albrektsson (Гётеборгский университет, Швеция) в 2009 году, оптимальные результаты достигаются в узком диапазоне для умеренно шероховатых поверхностей со значениями Ra/Sa 1,0 2,0 мкм. Поверхность ACH Medical Co., Ltd - это умеренно шероховатая поверхность (1,5~1,8 мкм), которая оптимальна для наращивания кости в поверхность имплантата - ускоряя остеоинтеграцию.

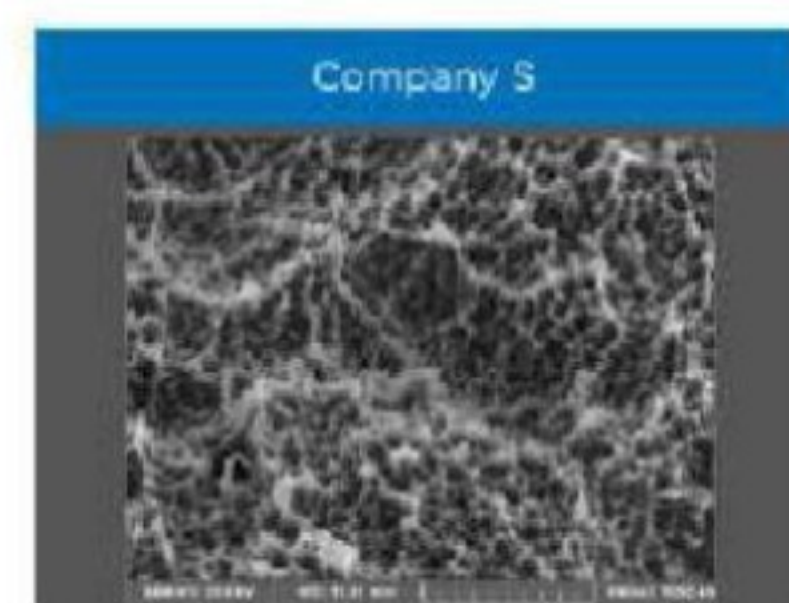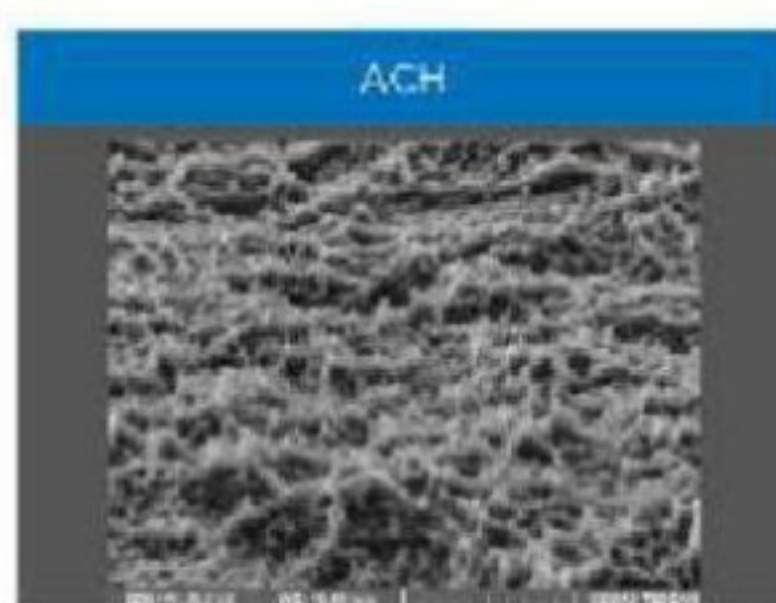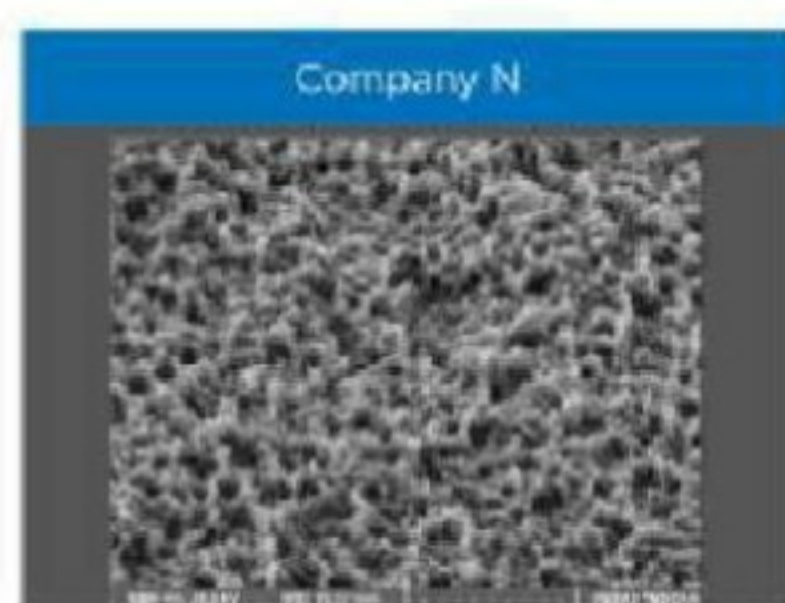

G-DIFF SYSTEM FIXTURE LINE-UP

IB T

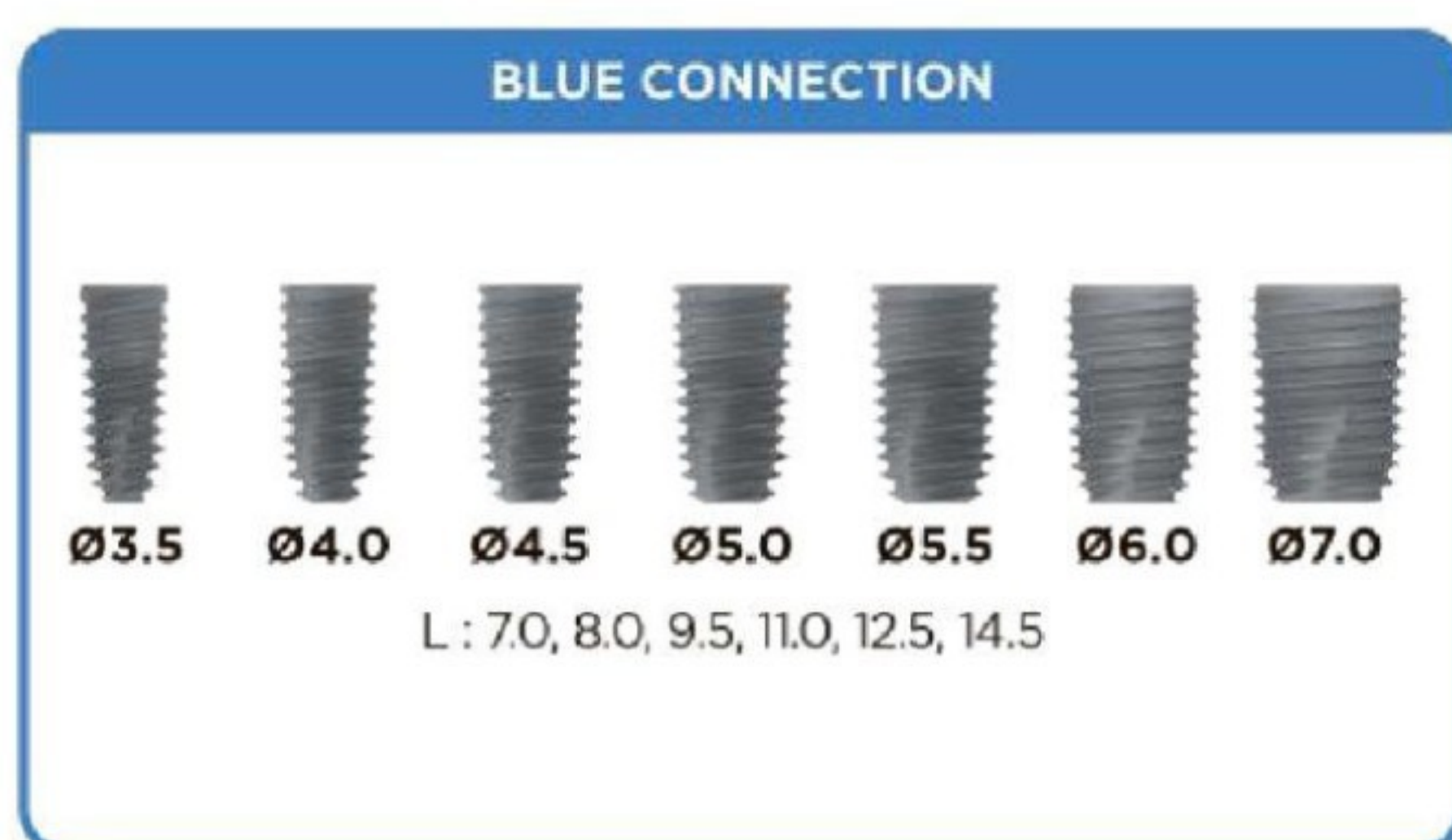

IB mini



G-DIFF
GENUINE DIFFERENCE



КРАТКИЕ ОТЧЕТЫ О ДОЛГОСРОЧНОМ КЛИНИЧЕСКОМ СЛУЧАЕ ЗА 7+ ЛЕТ

Информация О Пациенте. : Женщина, 56 лет




Предоперационная Картина
2012 год. Сен. 26



Установка имплантатов
2012.Окт. 10




2 год F / U
2014. Июл. 14

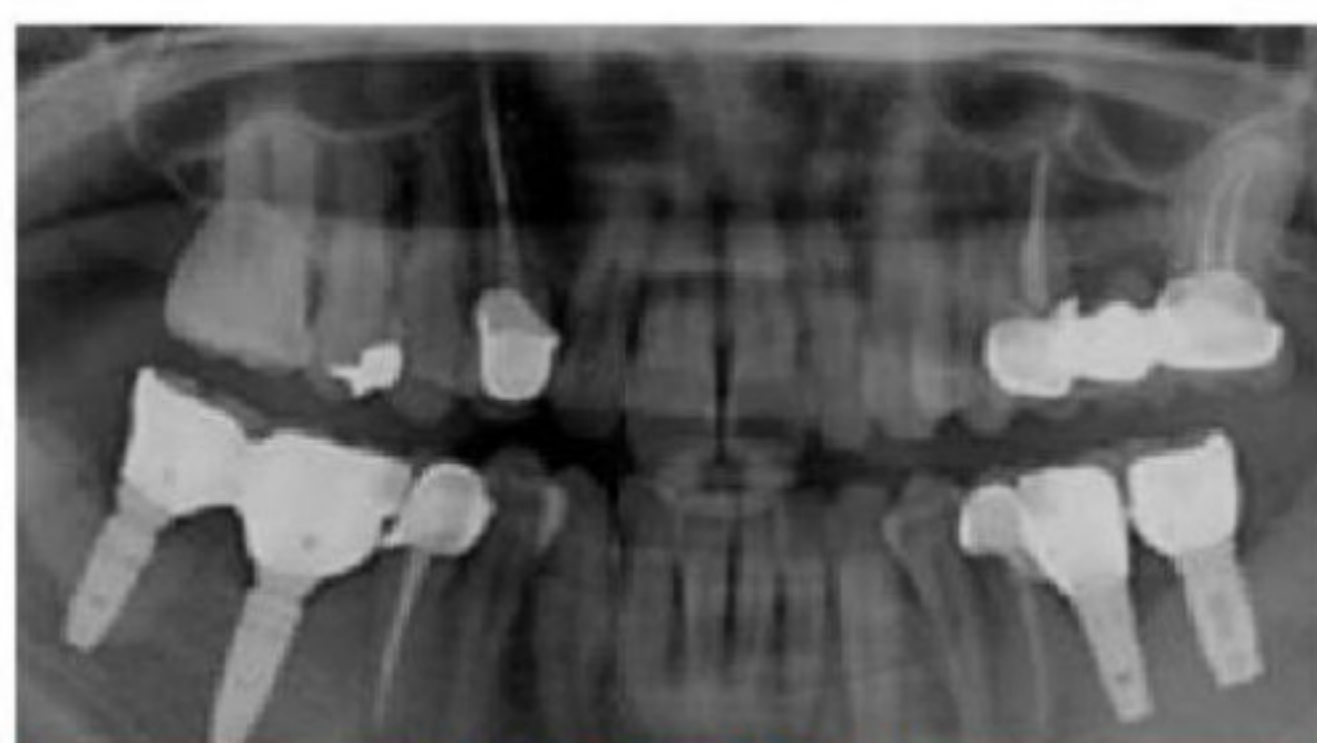

4 года F / U
2016. Июл. 04



6 год F / U
2018. Апр. 05

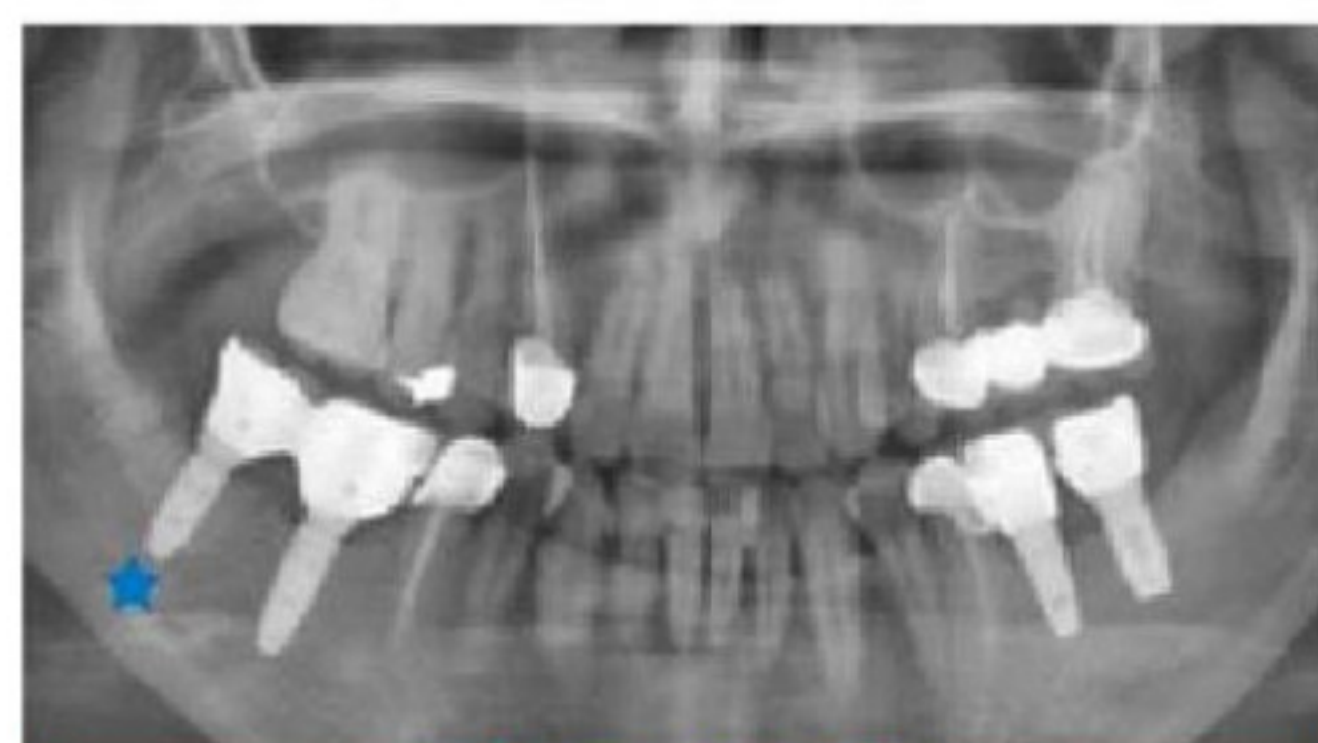

7 год F / U
2019. Февраль. 25

Информация О Пациенте. : Женщина, 43 года



Предоперационный
2012 год. Авг. 17



Установка имплантатов
2012. Сен. 14



Финальный Протез
2013 Года. Янв. 29



2 год F / U
2014. Ноя. 05



5 лет F / U
2017. Дек. 12



8 year F/U
2019. Июл. 06

ИМПЛАНТАТЫ INTERNAL BONE LEVEL - TAPERED IB T SYSTEM

ПЕРЕХОДНАЯ ПЛАТФОРМА

Значительно способствует сохранению маргинальной кости и прикреплению мягких тканей. Снижает риск воспалительной клеточной инфильтрации.


ГИБРИДНАЯ ФОРМА

Передаёт нагрузку на вершину имплантата. Обеспечивает отличную первичную стабильность, особенно в мягких костях.



ТРЕХГРАННАЯ САМОНАРЕЗАЮЩАЯ КРОМКА

Обеспечивает плавное, атравматическое введение имплантата. Куполообразная верхушка имплантата снижает риск перфорации и точечной компрессии.

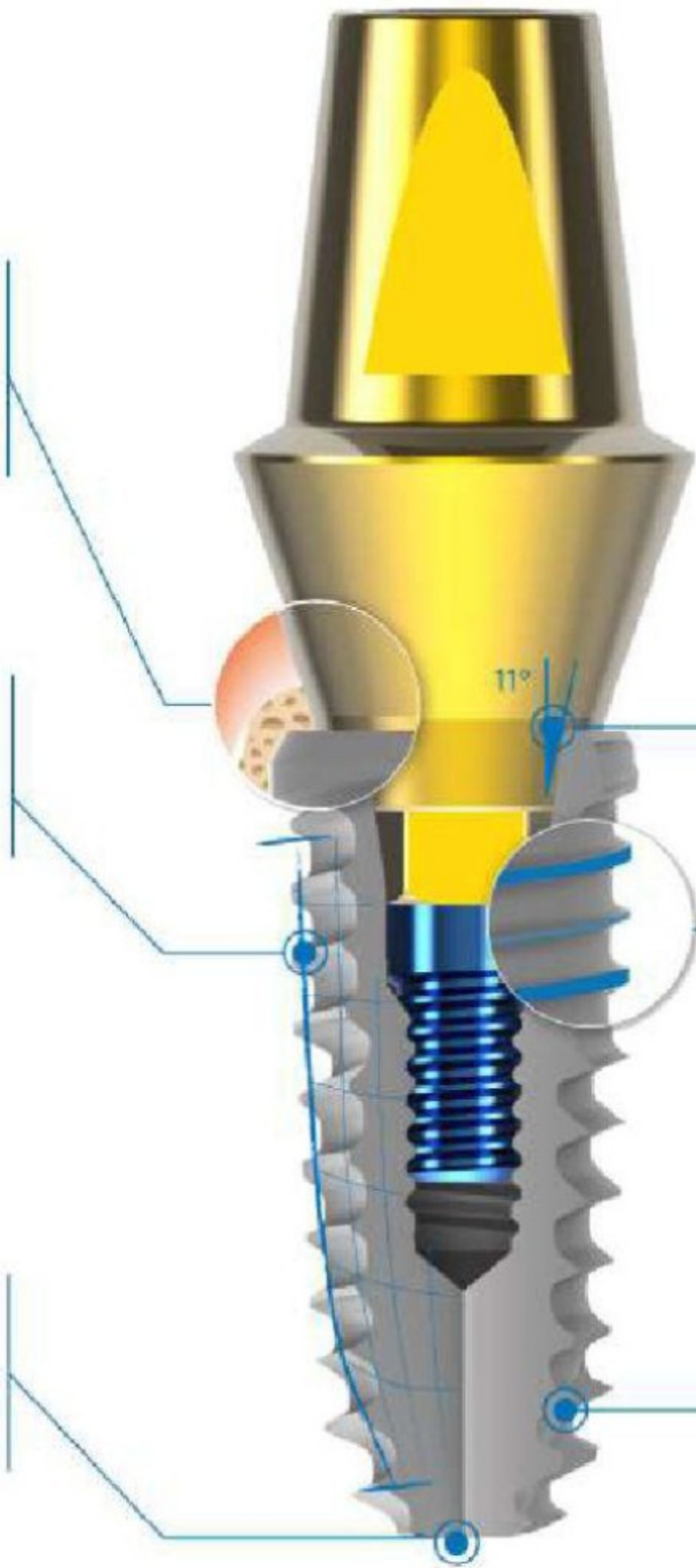


КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ С АНТИРОТАЦИОННЫМ ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ

Внутреннее 11° коническое соединение имплантат/абатмент — надёжное, самозатягивающееся, герметичное соединение, равномерное распределение нагрузки и минимизация микро - подвижности.

ГИБРИДНАЯ ДВОЙНАЯ РЕЗЬБА

Позволяет проще и быстрее устанавливать имплантат в различные типы кости. Уменьшает стресс подлежащей кости во время введение и остеоинтеграции.

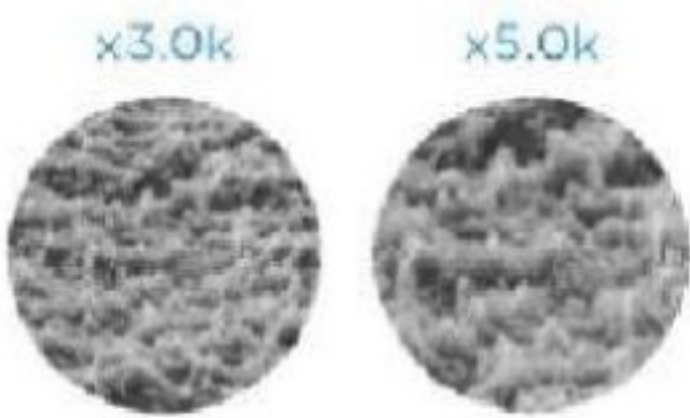

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ S.L.A.


Пескоструйная обработка и кислотное травление, наиболее исследованные и проверенные технологии обработки поверхности.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ TAPERED IB T SYSTEM



* Рекомендуемый крутящий момент при установке (для предотвращения каких-либо повреждений)


- Имплантат : менее 50 Ncm
- Винт Зашлущка : 8 HCM

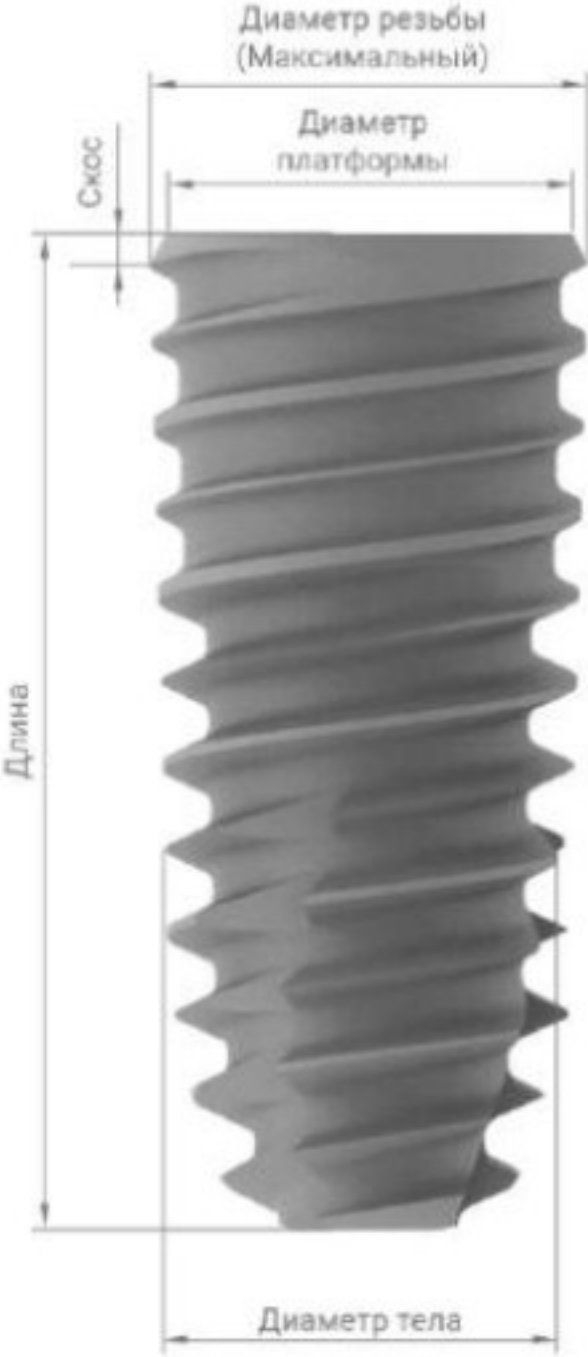

Имплантат	Ø3.5	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.0	Ø5.5	Ø6.0	Ø7.0
Соединения	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
Диаметр тела	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
Диаметр резьбы (Максимальный)	3.9	4.2	4.6	5.1	5.5	6.0	7.0
Диаметр платформы	3.7	3.9	4.3	4.8	5.2	5.5	6.5
Длина скоса	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6
Длина имплантата	7.0 / 8.0 / 9.5 / 11.0 / 12.5 / 14.5						

** длина 14,5 мм недоступна для диаметров 6,0 мм и 7,0 мм

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ TAPERED IB T SYSTEM

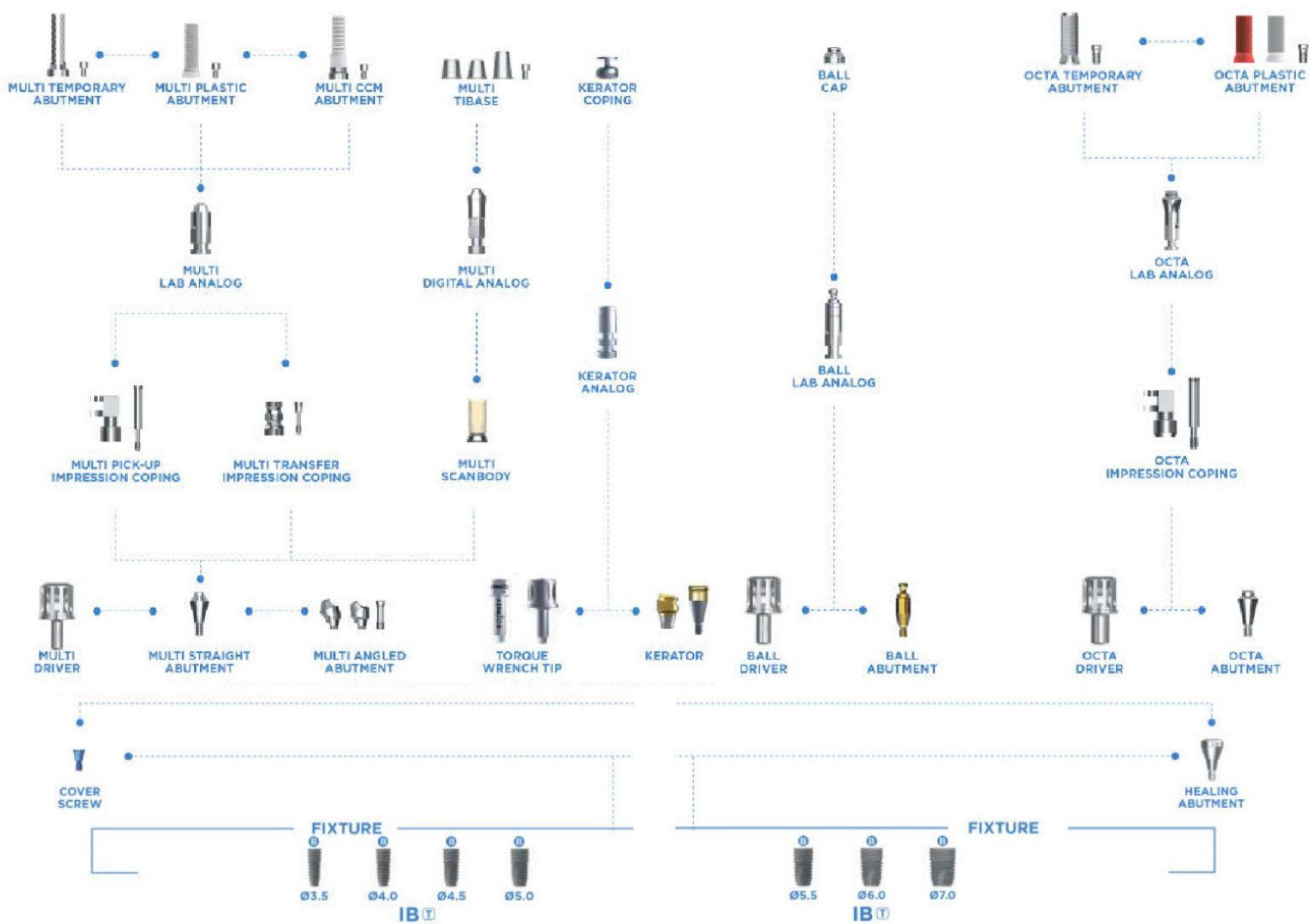

G-DIFF
GENUINE DIFFERENCE



ИМПЛАНТАТЫ INTERNAL BONE LEVEL - IB MINI SYSTEM

ПЕРЕХОДНАЯ ПЛАТФОРМА

Значительно способствует сохранению маргинальной кости и прикреплению мягких тканей к поверхности имплантата. Снижает риск воспалительной клеточной инфильтрации.

МАЛЕНЬКИЙ, НО ПРОЧНЫЙ

Передаёт нагрузку на вершунку имплантата. Обеспечивает отличную первичную стабильность, особенно в мягких костях

ТРОЙНАЯ РЕЖУЩАЯ КРОМКА

Обеспечивает плавное введение с минимальным разрушением кости. Округлая вершина имплантата снижает риск перфорации кости.

КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ С АНТИРОТАЦИОННЫМ ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ

11-ти градусное конусное соединение имплантат/абатмент. Надёжное, самозатягивающееся, герметичное соединение, равномерно распределяет нагрузку на имплантат и минимизирует микроподвижность

ГИБРИДНАЯ ДВОЙНАЯ РЕЗЬБА

Позволяет проще и быстрее устанавливать имплантат в различные типы кости. Уменьшает стресс кости во время введения и процесса остеоинтеграции.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ S.L.A.

Пескоструйная обработка и кислотное травление, наиболее исследованные и проверенные технологии обработки поверхности

x3.0k

x5.0k

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДИАМЕТРА TAPERED IB MINI SYSTEM



IB mini



mini

Mini Size




GREEN

CONNECTION

GREEN CONNECTION


Ø3.0

Body Ø3.0 | Thread(Maximum) Ø3.2

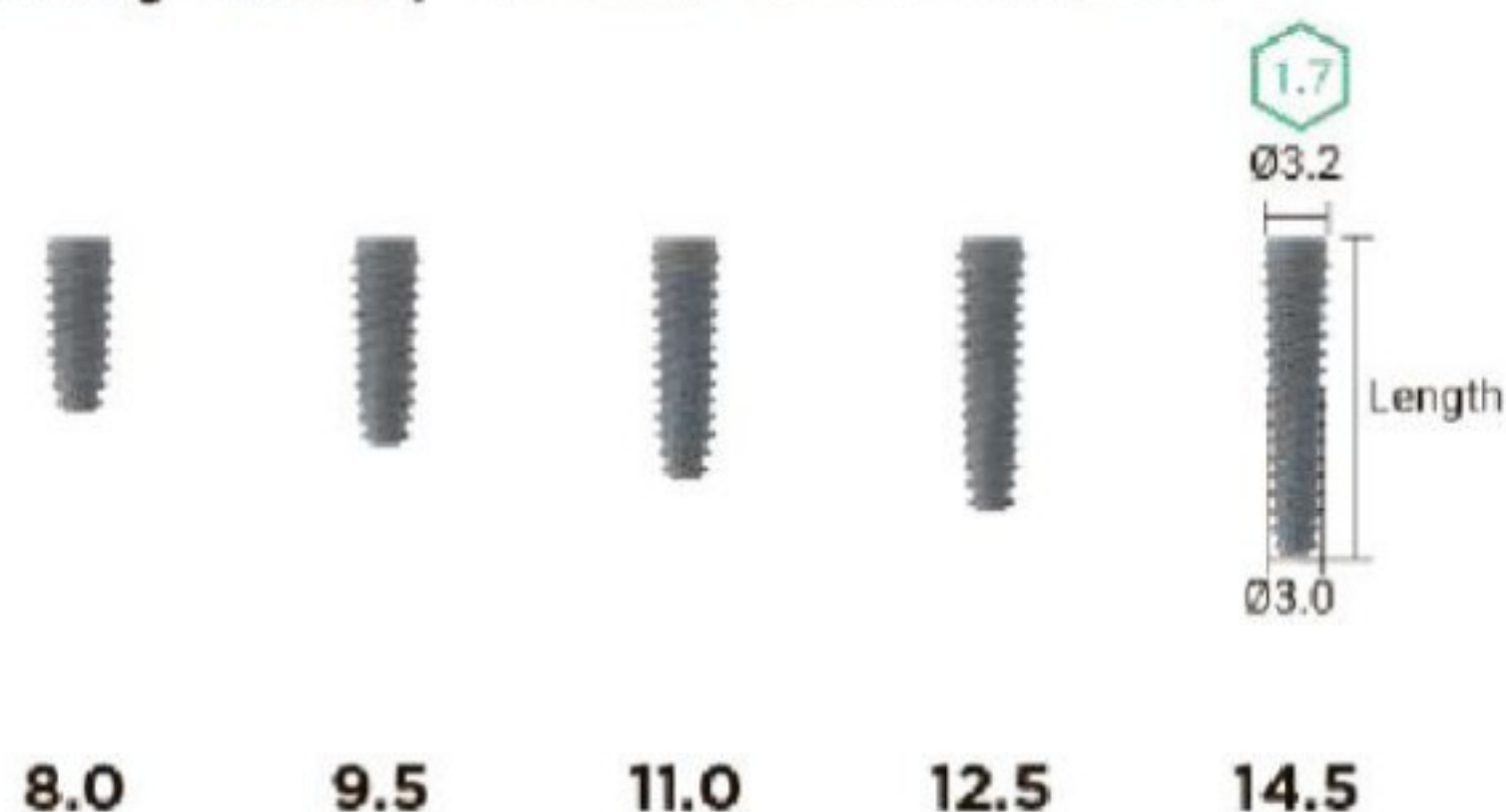


* Рекомендуемый крутящий момент размещения: менее 40 НСМ (для предотвращения каких-либо повреждений)

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЭТАП TAPERED IB MINI SYSTEM

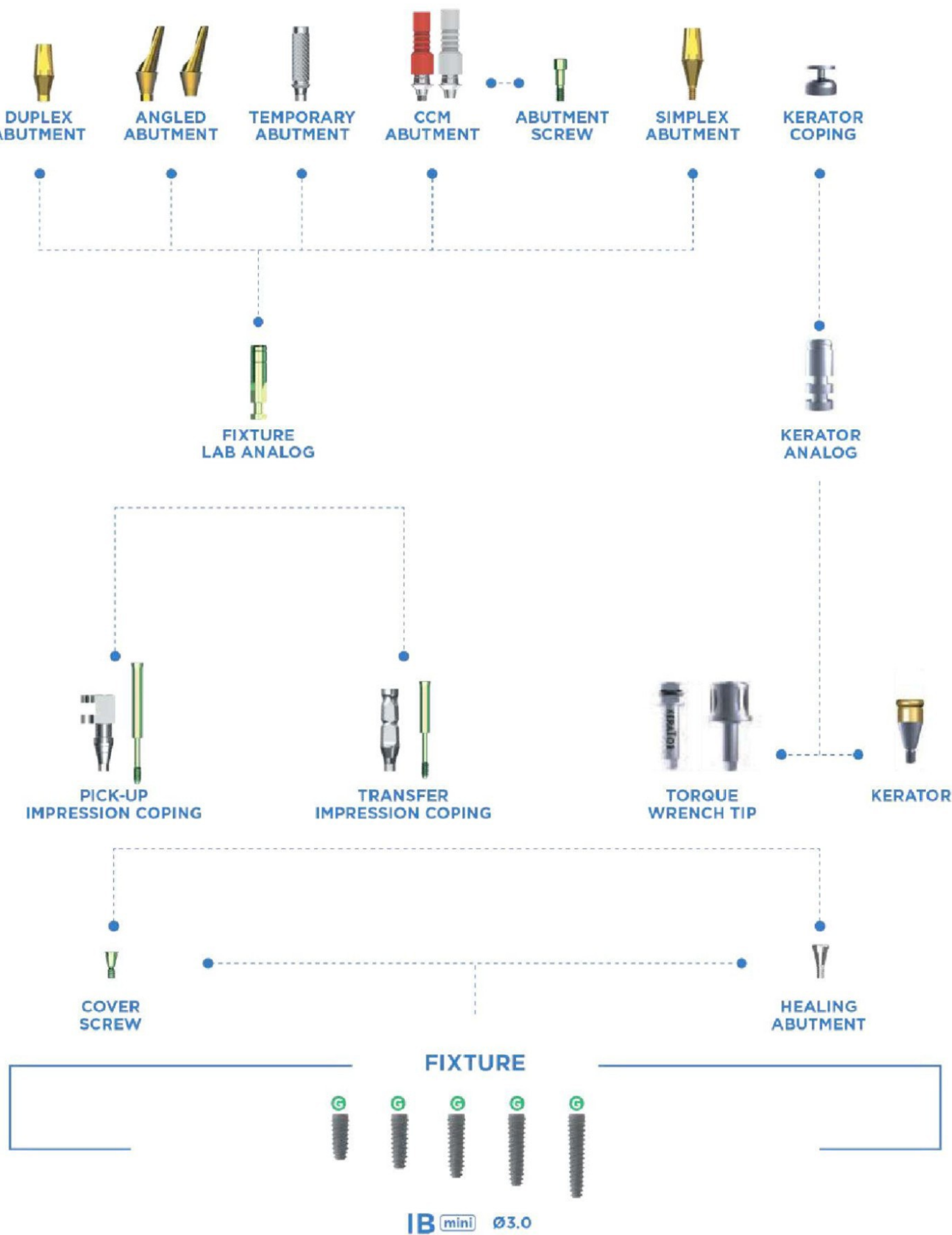

IB mini SYSTEM

ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР G-DIFF SYSTEM IB T SERIES СТАНДАРТНЫЙ

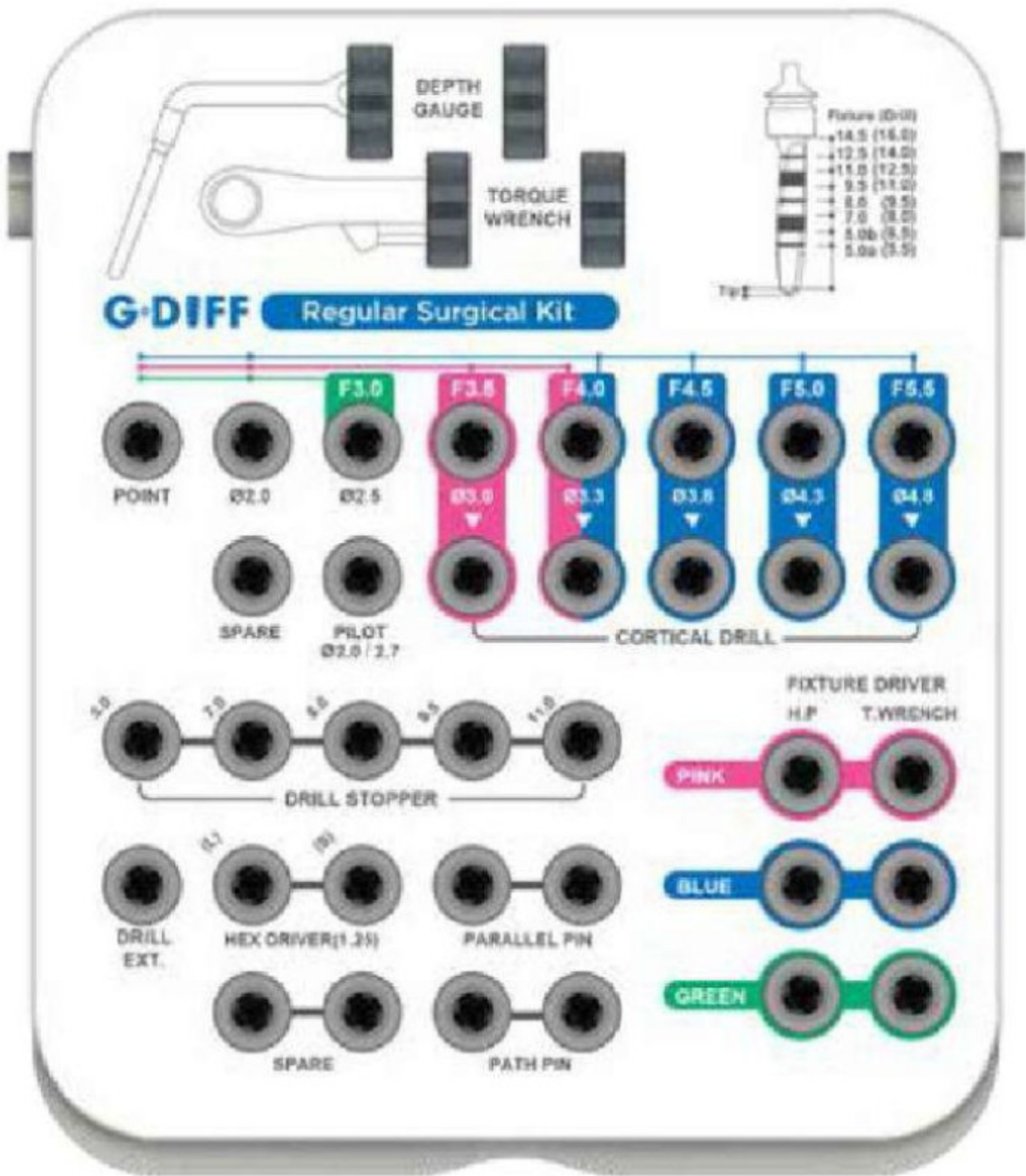



















Состав набора

- Копьевидная Фреза
- Спиральная Фреза (Ø2.0, Ø2.5, Ø3.0, Ø3.3, Ø3.8, Ø4.3, Ø4.8)
- Пилотная Фреза
- Кортикальная Фреза (Ø3.7, Ø4.2, Ø4.6, Ø5.0, Ø5.5)
- Ограничитель Фрезы (L5.0, L7.0, L8.0, L9.5, L11.0)
- Имплантовод (наконечник)
- Имплантовод (Динамометрический Ключ)
- Шестигранный Ключ (1.25) (Длинный, Короткий)
- Удлинитель Фрезы

- Пин Параллельности
- Пин Параллельности для Имплантата
- Глубиномер
- Динамометрический Ключ

- * Опции
- Фреза для бокового сверления
 - Установочный адаптер (наконечник)
 - Установочный адаптер (динамометрический ключ)

ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ G-DIFF SYSTEM IB T SERIES

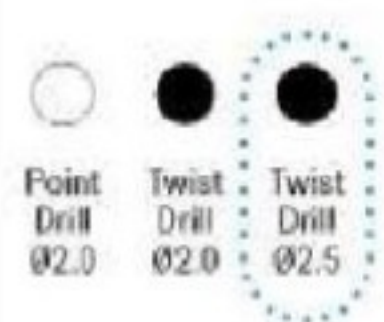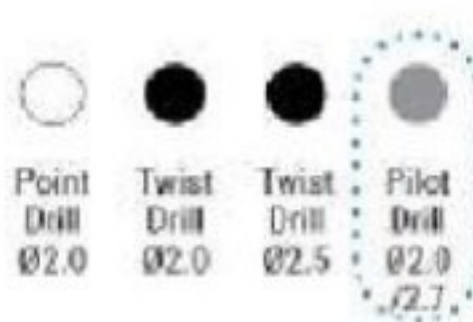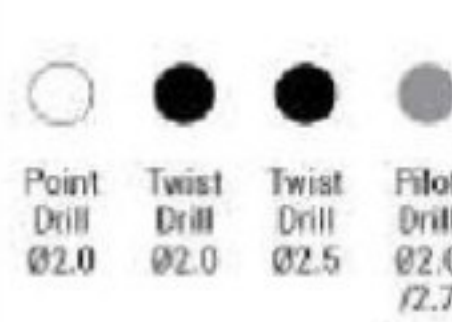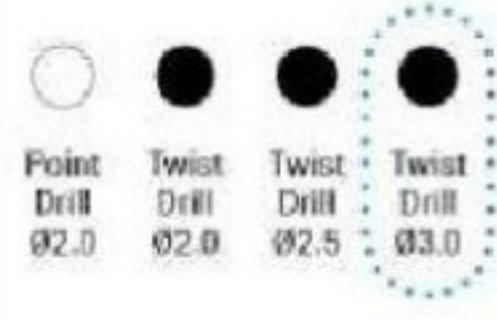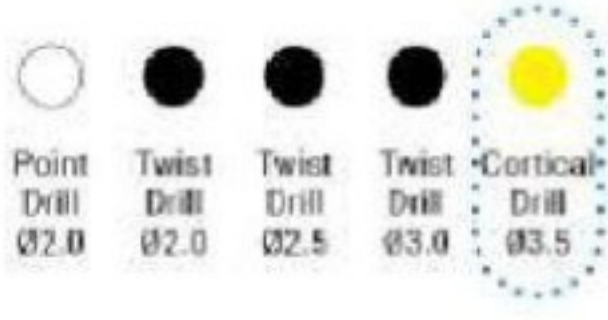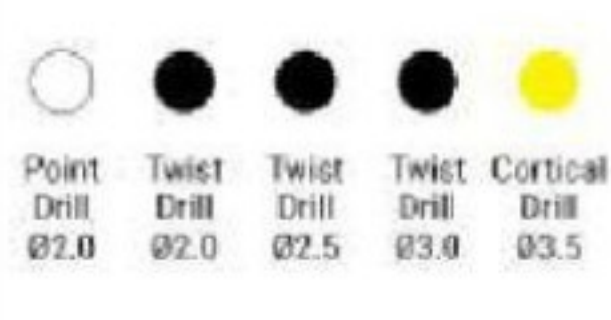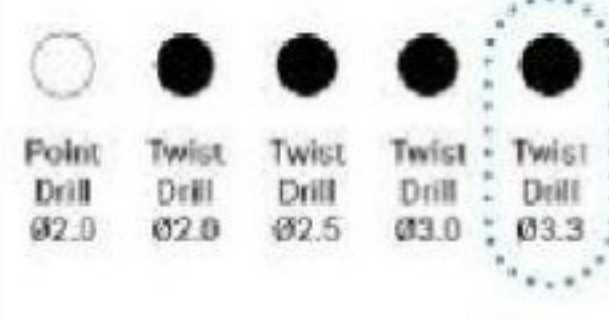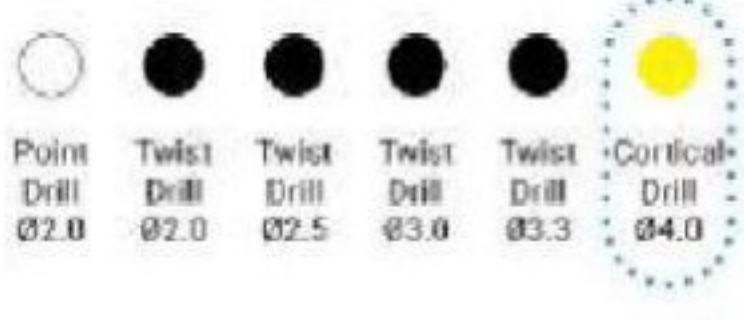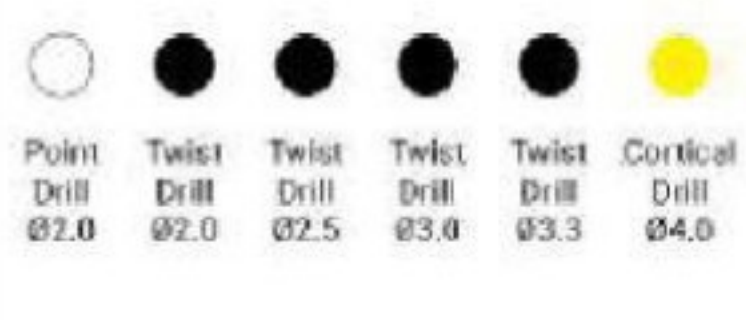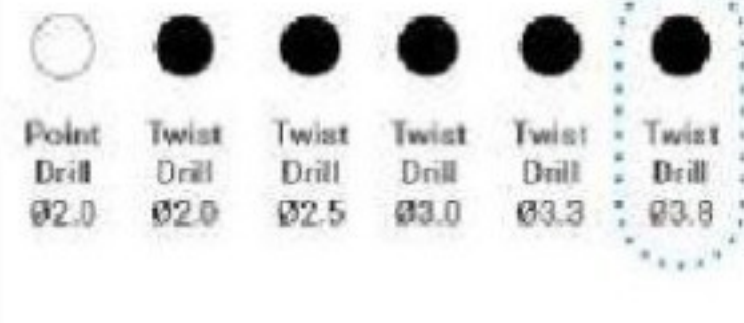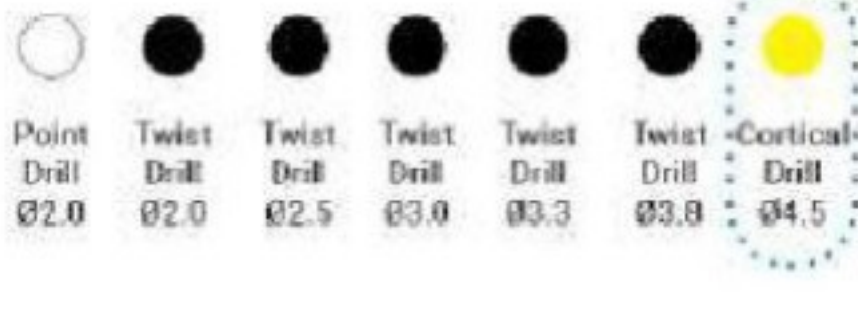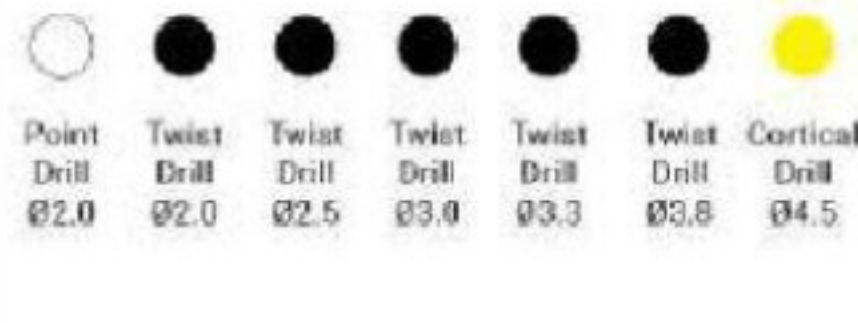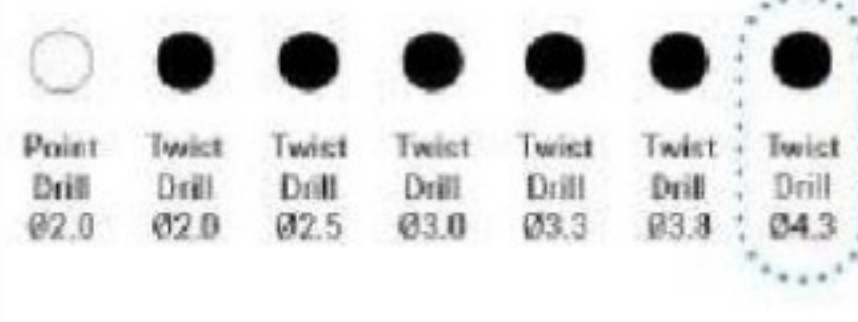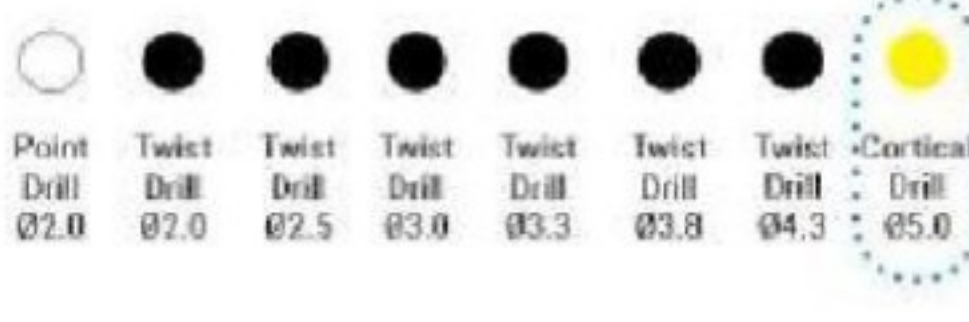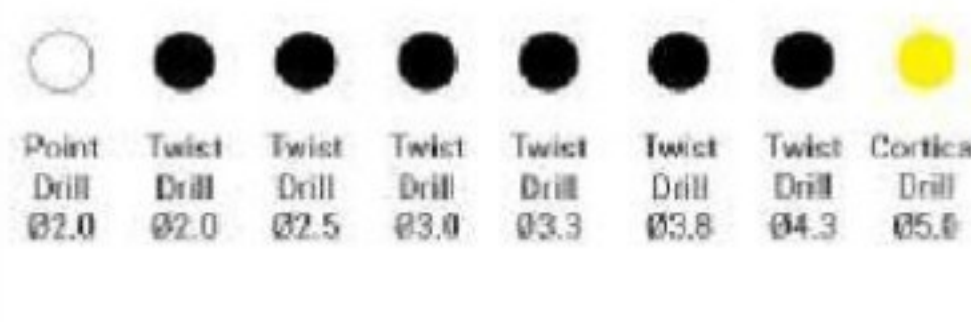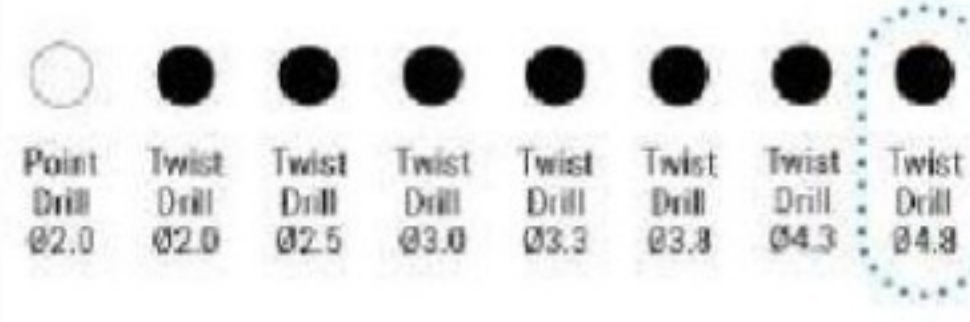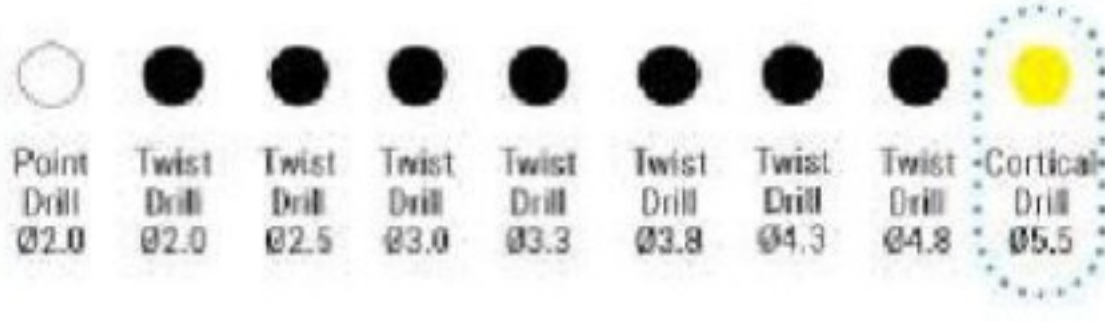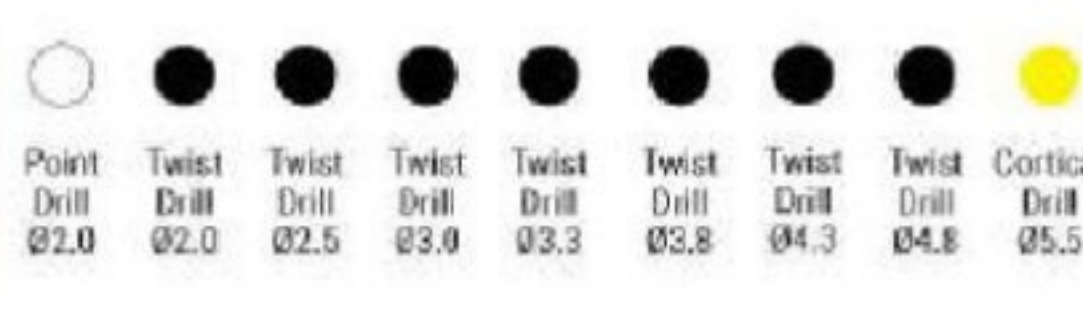Имплантаты	Протокол Сверления Мягкая Кость	Протокол Сверления Стандартная Кость	Протокол Сверления Плотная Кость
 IB mini Ø3.0 x 9.5mm	 Point Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.5	 Point Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.5 Pilot Drill Ø2.0/2.7	 Point Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.5 Pilot Drill Ø2.0/2.7
 IB T Ø3.5 x 9.5mm	 Point Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.5 Twist Drill Ø3.0	 Point Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.5 Twist Drill Ø3.0 Cortical Drill Ø3.5	 Point Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.5 Twist Drill Ø3.0 Cortical Drill Ø3.5
 IB T Ø4.0 x 9.5mm	 Point Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.5 Twist Drill Ø3.0 Twist Drill Ø3.3	 Point Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.5 Twist Drill Ø3.0 Twist Drill Ø3.3 Cortical Drill Ø4.0	 Point Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.5 Twist Drill Ø3.0 Twist Drill Ø3.3 Cortical Drill Ø4.0
 IB T Ø4.5 x 9.5mm	 Point Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.5 Twist Drill Ø3.0 Twist Drill Ø3.3 Twist Drill Ø3.8	 Point Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.5 Twist Drill Ø3.0 Twist Drill Ø3.3 Twist Drill Ø3.8 Cortical Drill Ø4.5	 Point Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.5 Twist Drill Ø3.0 Twist Drill Ø3.3 Twist Drill Ø3.8 Cortical Drill Ø4.5
 IB T Ø5.0 x 9.5mm	 Point Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.5 Twist Drill Ø3.0 Twist Drill Ø3.3 Twist Drill Ø3.8 Twist Drill Ø4.3	 Point Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.5 Twist Drill Ø3.0 Twist Drill Ø3.3 Twist Drill Ø3.8 Twist Drill Ø4.3 Cortical Drill Ø5.0	 Point Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.5 Twist Drill Ø3.0 Twist Drill Ø3.3 Twist Drill Ø3.8 Twist Drill Ø4.3 Cortical Drill Ø5.0
 IB T Ø5.5 x 9.5mm	 Point Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.5 Twist Drill Ø3.0 Twist Drill Ø3.3 Twist Drill Ø3.8 Twist Drill Ø4.3 Twist Drill Ø4.8	 Point Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.5 Twist Drill Ø3.0 Twist Drill Ø3.3 Twist Drill Ø3.8 Twist Drill Ø4.3 Twist Drill Ø4.8 Cortical Drill Ø5.5	 Point Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.0 Twist Drill Ø2.5 Twist Drill Ø3.0 Twist Drill Ø3.3 Twist Drill Ø3.8 Twist Drill Ø4.3 Twist Drill Ø4.8 Cortical Drill Ø5.5

*Примечание:  в зависимости от плотности костной ткани, фрезы могут не использоваться.



СтомИнструмент
 тел. +7-951-669-01-52, +7-981-847-40-20
stominstrument@mail.ru
<https://stominstrument.ru>



IB MT



G•D•FF
GENUINE DIFFERENCE

Линейка имплантатов **IB MT**

Internal Bone Level - Micro Thread **IB MT Fixture Line-Up**



IB-MT



MICRO THREAD



CONNECTION

Переходная платформа

Снижает риск инфильтрации воспалительных клеток. В значительной степени способствует сохранению краевой кости и прикреплению мягких тканей.


Коническое соединение

Независимо от диаметра IB-MT имплантаты (3,5мм-5,0 мм) имеют одинаковое внутреннее шестигранное соединение.



Трехгранная самонарезающая кромка

Обеспечивает плавное, атравматическое введение имплантата. Закругленная вершина имплантата снижает риск перфорации кости.

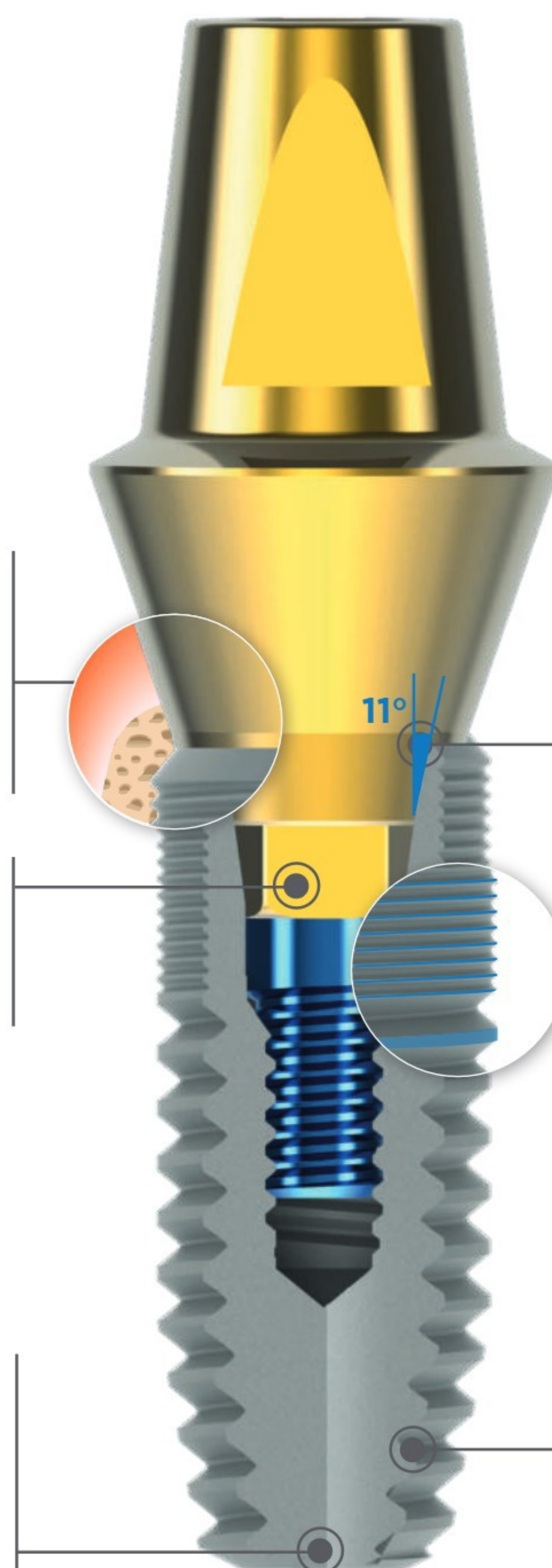


Шестигранное соединение Конус Морзе

Равномерно распределяет нагрузку на конструкцию и помогает уменьшить микродвижения.


Комбинация микро и макро резьбы

Увеличивает осевую жесткость имплантата, уменьшает напряжение сдвига в кортикальной части кости. Оптимально распределяет краевые усилия. Помогает снизить нагрузку на кость во время установки.

x3.0k

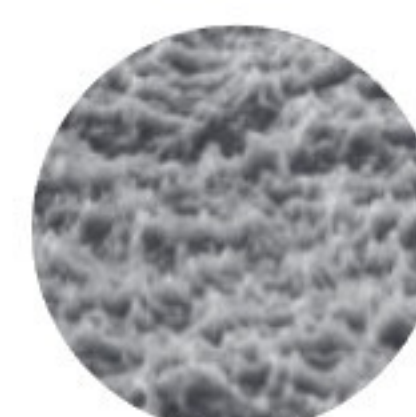

x5.0k

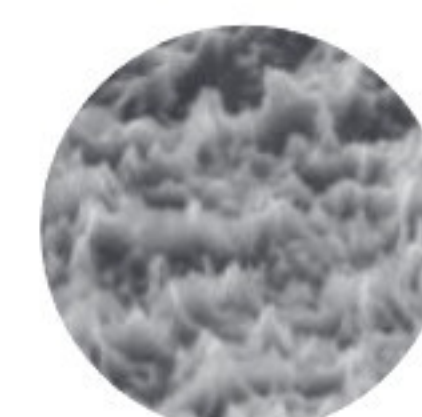


Обработка поверхности S.L.A.

Наиболее исследованная и зарекомендовавшая себя технология обработки поверхностей.


IB-MT

Body Ø3.5 **

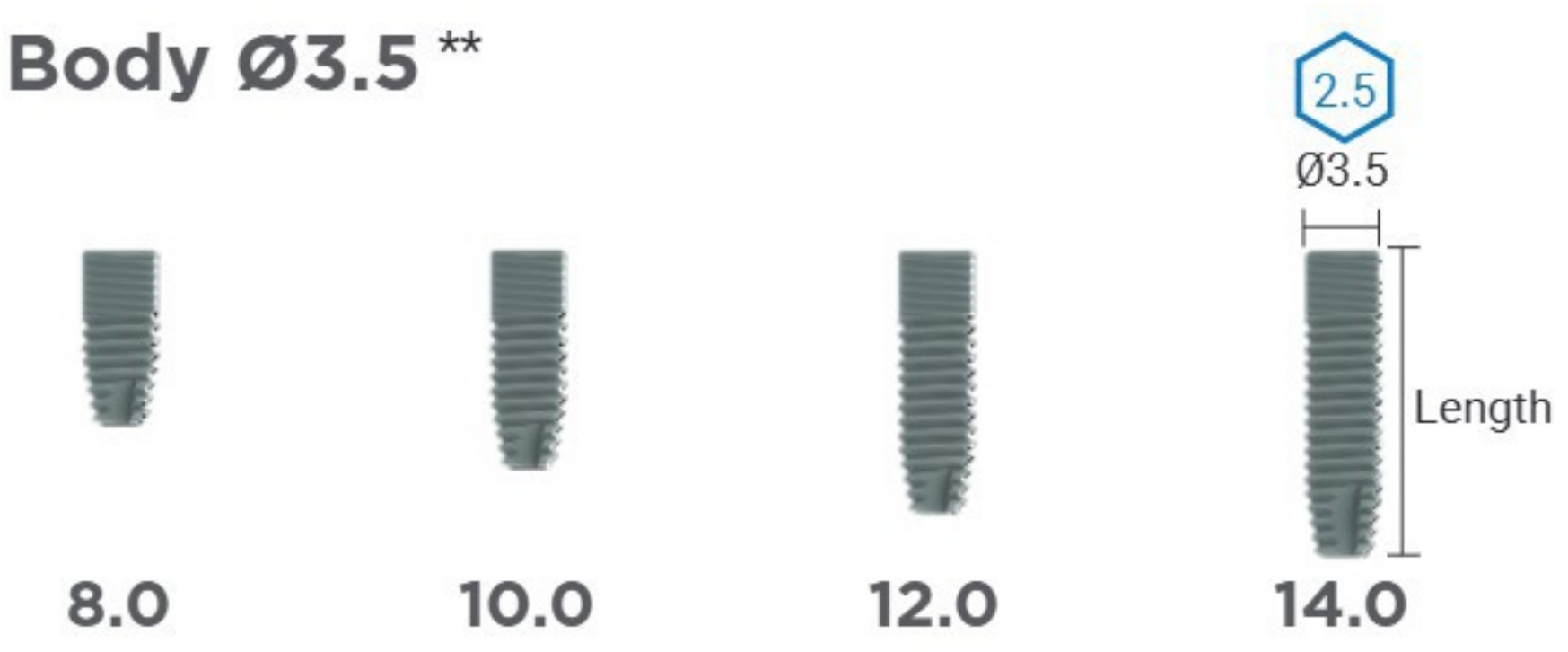


Connection	BLUE
Length	REF NO.
8.0	AT 35 08 SA
10.0	AT 35 10 SA
12.0	AT 35 12 SA
14.0	AT 35 14 SA

Body Ø4.0

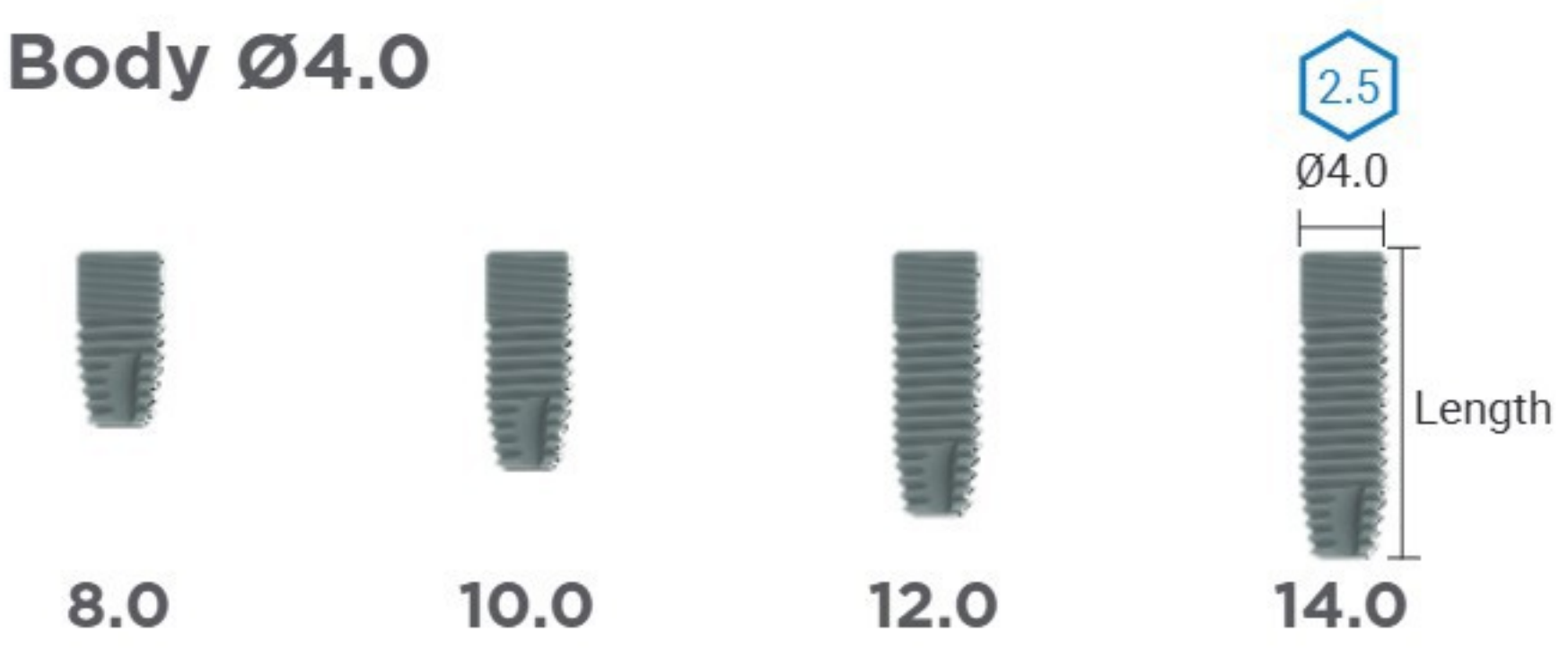


Connection	BLUE
Length	REF NO.
8.0	AT 40 08 SA
10.0	AT 40 10 SA
12.0	AT 40 12 SA
14.0	AT 40 14 SA

Body Ø4.5

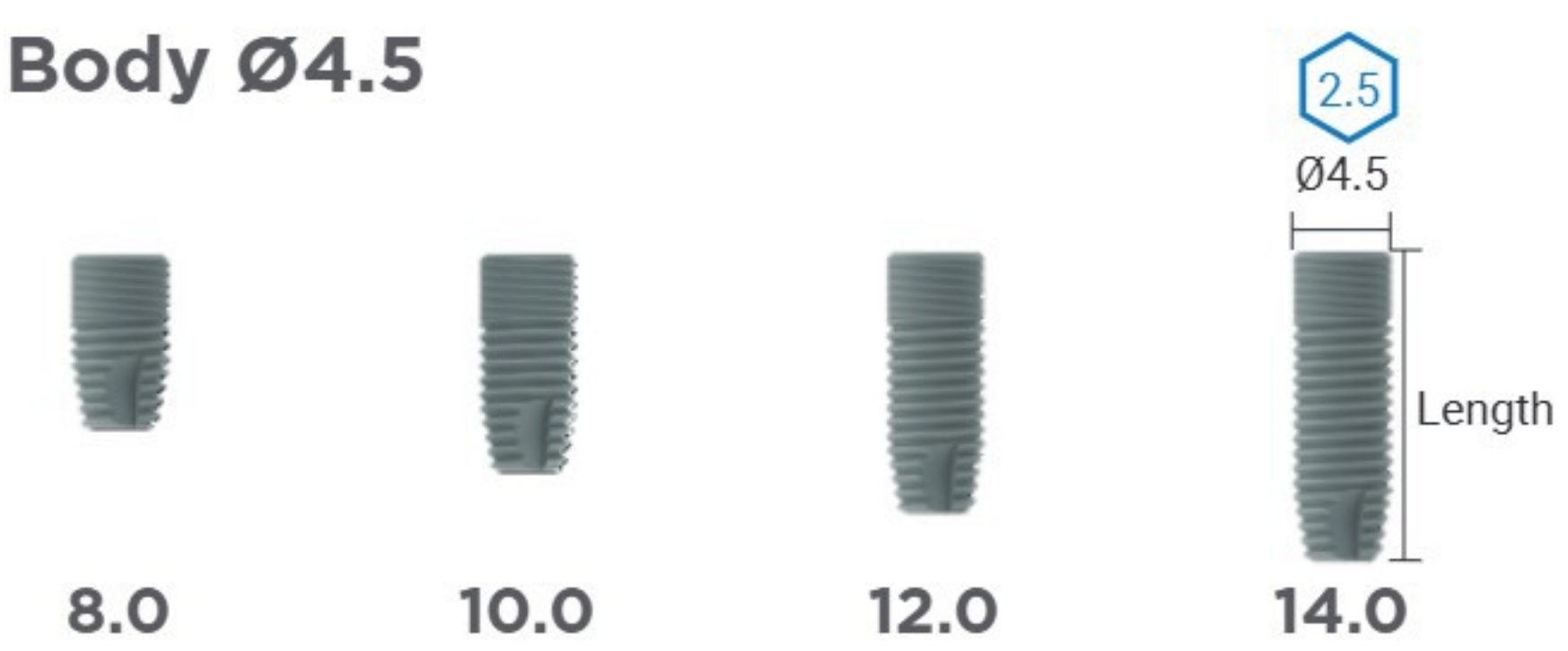

Connection	BLUE
Length	REF NO.
8.0	AT 45 08 SA
10.0	AT 45 10 SA
12.0	AT 45 12 SA
14.0	AT 45 14 SA


Body Ø5.0

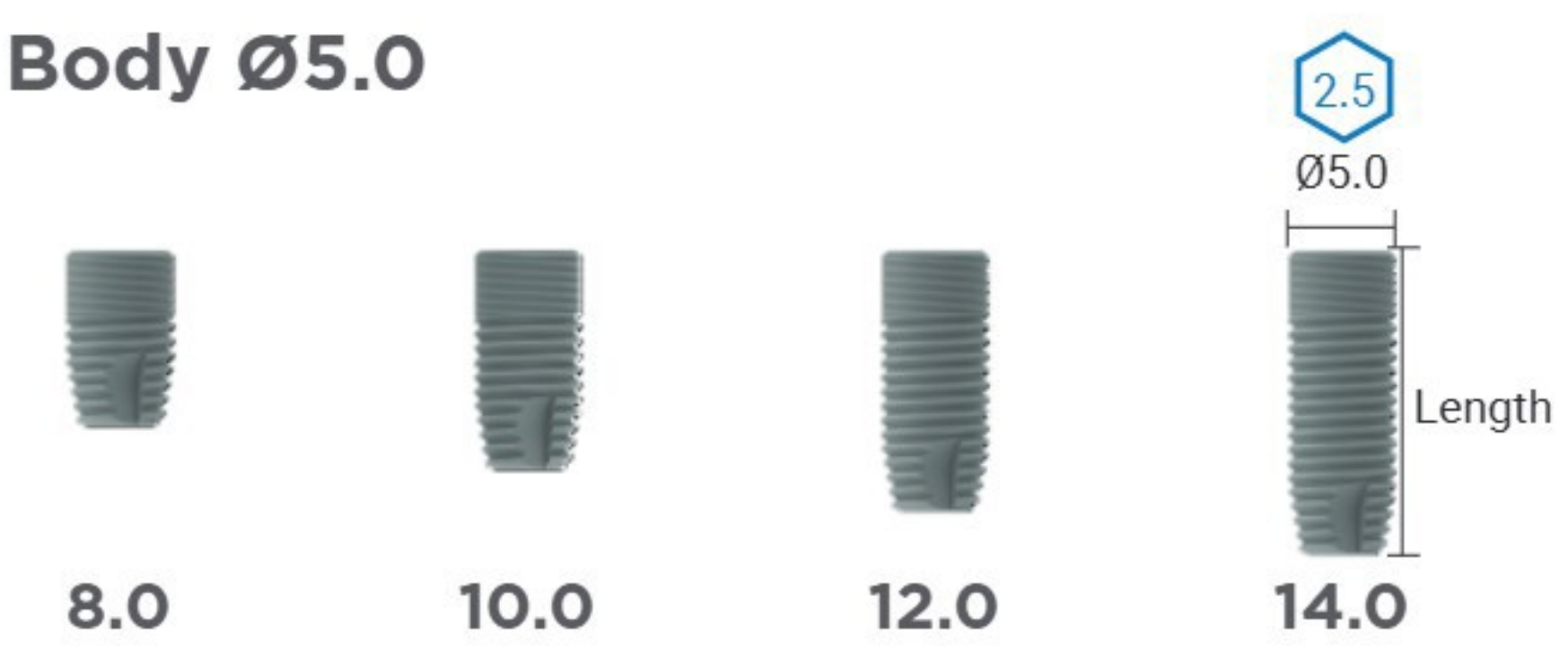

Connection	BLUE
Length	REF NO.
8.0	AT 50 08 SA
10.0	AT 50 10 SA
12.0	AT 50 12 SA
14.0	AT 50 14 SA

* В комплект входит заглушка **ATC 20M (Ø3,5)**, **ATC 20 R (Ø4,0-5,0)**.

** При соединении абатмента с имплантатом Ø3,5мм открытая часть абатмента остается открытой. На 0,5мм выше, чем при использовании других диаметров крепления.

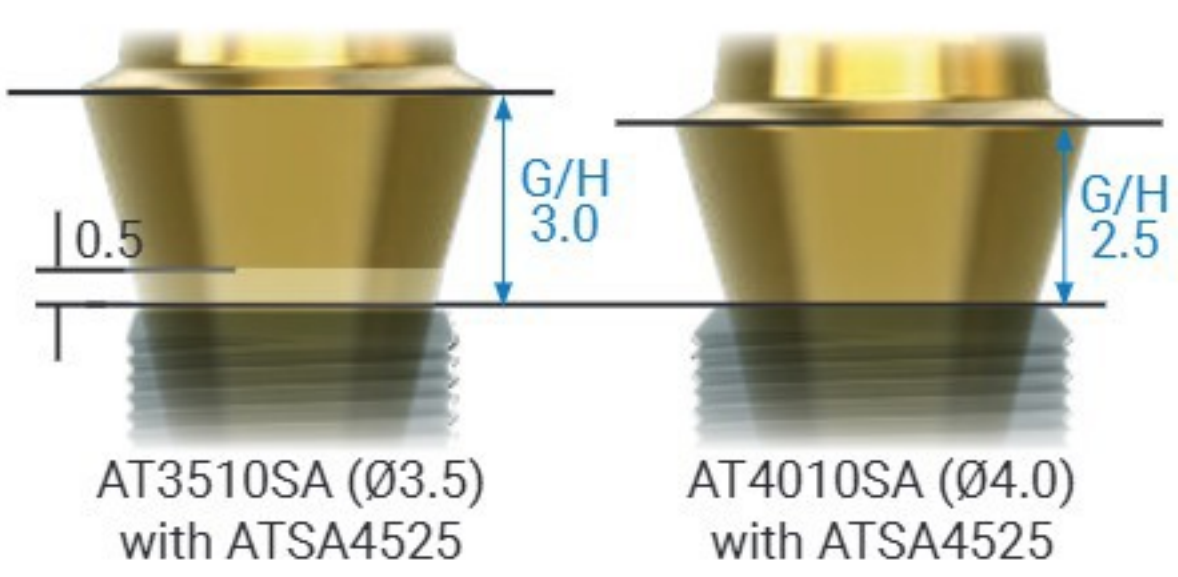

ИНСТРУКЦИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ ПО УХОДУ И ОБРАБОТКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОРРОЗИИ И РЖАВЧИНЫ НА ИНСТРУМЕНТАХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ИХ СРОКА СЛУЖБЫ:

- ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ МЯГКОЙ ЩЕТКИ И СПЕЦИАЛЬНОГО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КОРРОЗИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТЫСЫВАНИЯ МЕТАЛЛА, НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГУБКИ. ОСНОВАТЕЛЬНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ЧИСТКА, ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ЧИСТКИ УЛЬТРАЗВУКОМ.
- УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ В УЛЬТРАЗВУКОВОМ УСТРОЙСТВЕ. ИЗДЕЛИЯ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ (ШПРИЦЫ, ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ И НОЖНИЦЫ) ДЕЗИНФИЦИРУЮТ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ.
- ПОСЛЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТ СЛЕДУЕТ ТЩАТЕЛЬНО ПРОПОЛОСКАТЬ ВРУЧНУЮ. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТЕН ОТ ВОДЫ ПРИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫВКЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ФИЛЬТРАМИ, КОТОРЫЕ ПРЕДОТВРАТЯТ ОБРАЗОВАНИЕ СОЛЕЙ, ЩЕЛОЧИ, КИСЛОТЫ НА ИНСТРУМЕНТАХ И ДЕТАЛЯХ ОБОРУДОВАНИЯ. ТЩАТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЧИСТКУ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА, С ЦЕЛЬЮ СКОРЕЙШЕГО УДАЛЕНИЯ КРОВИ, СУКРОВИЦЫ.
- ПЕРЕД ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ПРОМЕЖУТОЧНОМ ХРАНЕНИИ, СЛЕДУЕТ ОСНОВАТЕЛЬНО ВЫСУШИТЬ И СМАЗАТЬ ИНСТРУМЕНТ С ШАРНИРАМИ И РЕЗЬБОЙ, ИСПОЛЬЗУЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ВИНТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ. УБЕДИТЕСЬ, В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СУХОМ СОСТОЯНИИ ИНСТРУМЕНТА, ОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ, МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ КОРРОЗИЮ ИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ПЯТЕН.
- В ПРОЦЕССЕ ХОЛОДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОРРОЗИИ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИНСТРУМЕНТ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК В РАСТВОРЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ, НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО УКАЗАННОЕ В ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВРЕМЯ. ПО ЗАВЕРШЕНИЮ, ТЩАТЕЛЬНО ПРОПОЛОСКАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ И ОСНОВАТЕЛЬНО ВЫСУШИТЕ ИХ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕДКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ И ДРУГИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ ДЛЯ ОЧИСТКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ.. ИНСТРУМЕНТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ОБРАБАТЫВАТЬСЯ СИЛИКОНОСОДЕРЖАЩИМИ СРЕДСТВАМИ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЗАЕДАНИЮ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ И СНИЗИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТЕРИЛИЗОВАТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ХРОМИРОВАННЫМИ, ТАК КАК ОБРАЗУЕТСЯ РАЗНИЦА ПОТЕНЦИАЛОВ, КОТОРАЯ СПОСОБСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ РЖАВЧИНЫ.
- ПОДОГРЕЙТЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В АВТОКЛАВЕ (СТЕРИЛИЗАТОРЕ), ПЕРЕД СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ ПАРОМ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЧРЕЗМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОНДЕНСАТА НА ПОВЕРХНОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ АВТОКЛАВ СЛИШКОМ БЫСТРО ПОСЛЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ ДЛЯ МЕДЛЕННОГО И ПОЛНОГО ОСТЫВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ.
- ИНСТРУМЕНТЫ НИ НА КАКОМ ЭТАПЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ НЕ ДОЛЖНЫ КОНТАКТИРОВАТЬ С РЖАВЕЮЩИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ИЛИ С ИНСТРУМЕНТАМИ С ПОВРЕЖДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.

В ИНСТРУМЕНТАХ «ORANGE » РУЧКИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ (Т ПЛАВЛЕНИЯ ~145С) И ПОЛИПРОПИЛЕНОВ (Т ПЛАВЛЕНИЯ > 165-170С). СТАНДАРТНЫЕ РЕЖИМЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПАРОВЫХ АВТОКЛАВАХ: 120 +2С ПРИ 1,1 КГС/ КВ. СМ И 132+- 2С ПРИ 2,0 КГС/ КВ. СМ. СТЕРИЛИЗАЦИЯ В СУХОЖАРОВЫХ ШКАФАХ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ПОСКОЛЬКУ МОЖЕТ СНИЖАТЬ ПРОЧНОСТЬ.



"СтомИнструмент"

+7(951)-669-01-52

+7(981)-847-40-20

stominstrument@mail.ru
<https://stominstrument.ru>

